



Sistema IPX Concept	4
Implantes dentales	8
Componentes protésicos	24
Galimplant 3D Exacto	90
Regenerador óseo y membrana	94
Cajas quirúrgicas	96
Instrumental quirúrgico	130
Guías de posicionamiento	134
Pistola de irrigación	136
Siliconas y registros	138
Sistema de registro oclusal	140
Aparatología	142
I+D+i	143



Expertos en implantología oral

Galimplant es actualmente una empresa de referencia nacional e internacional en el ámbito de la implantología oral, apostando fuertemente por la investigación e innovación.

Galimplant tiene su sede central en **C/ Benigno Quiroga, 90 - 27600 - Sarria (Lugo) – España.**

Galimplant utiliza los mejores materiales y cumple con todas las certificaciones ISO de calidad, ofreciendo siempre los mejores productos.

Versión 01/2022





CE
0051

IPX CONCEPT

Implantes de conexión interna, externa, cigomáticos y especiales.
Diferentes diámetros de plataforma con una sola conexión.


IPX

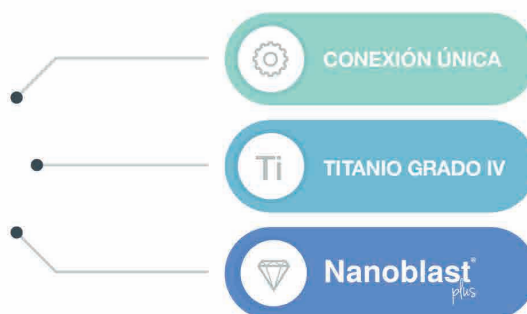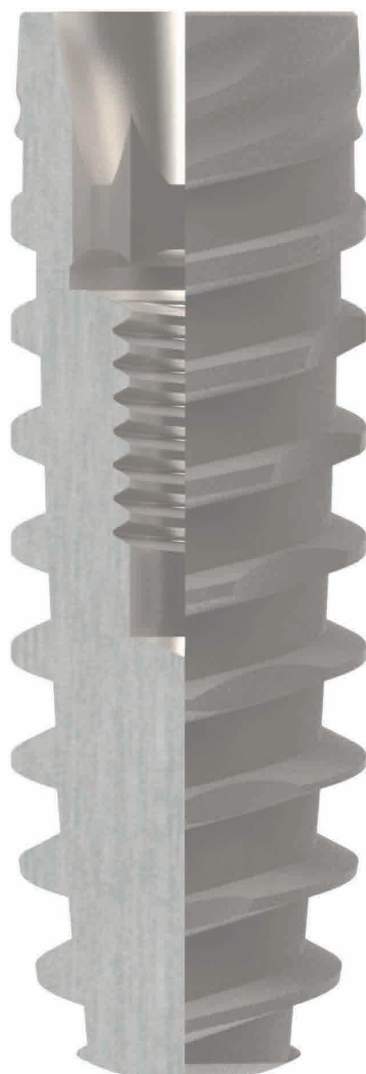


Gama de implantes

- ✓ CONEXIÓN INTERNA 14
- ✓ CONEXIÓN EXTERNA..... 18
- ✓ IMPLANTES CIGOMÁTICOS..... 20
- ✓ IMPLANTE ESPECIAL..... 22

Utiliza un diseño seguro. **Un solo concepto.**

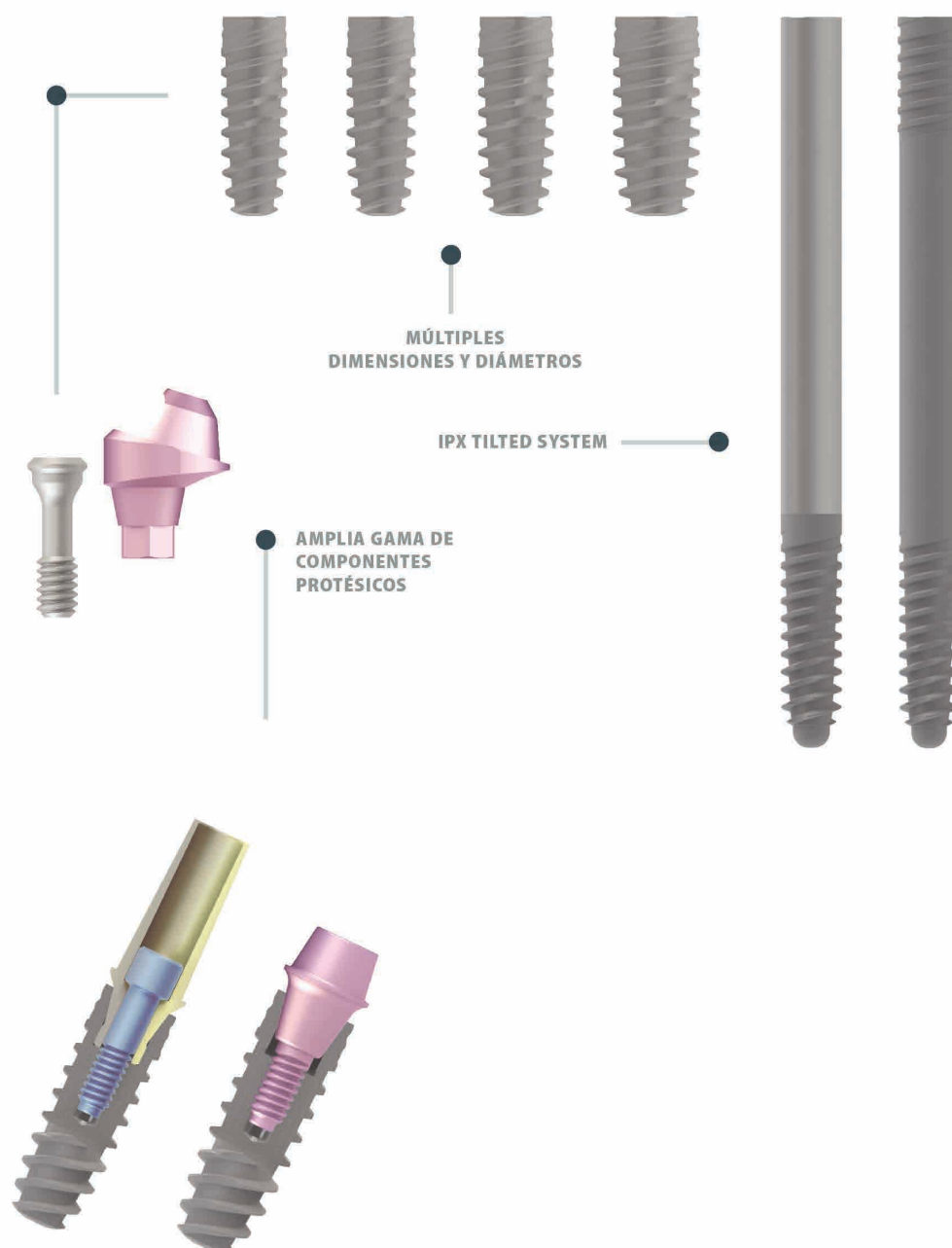

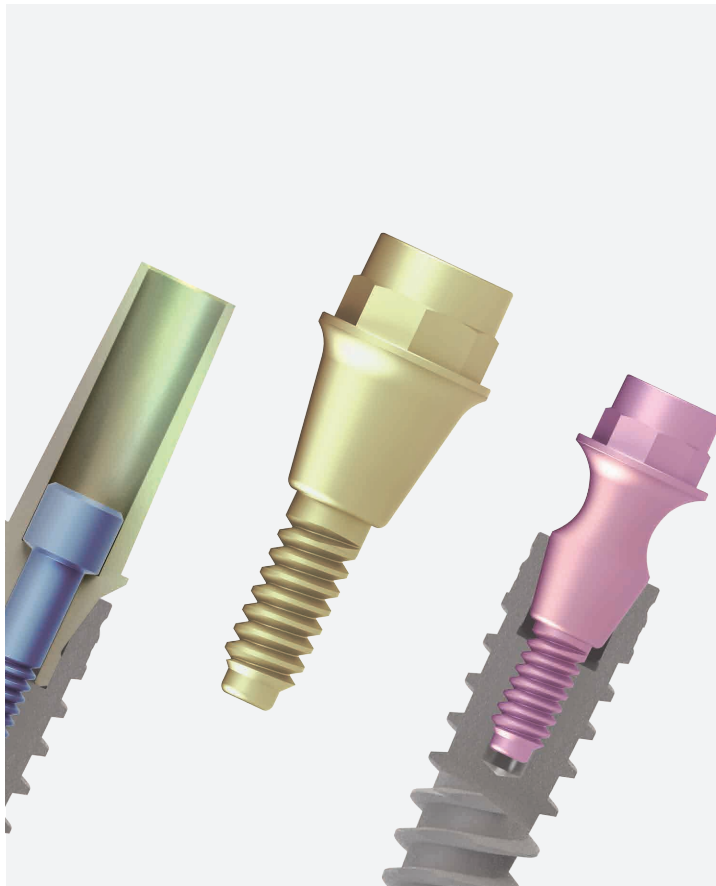

Componentes protésicos

Ponemos a su disposición todos los aditamentos protésicos.

Múltiples soluciones sencillas y estables.



Para cada paciente una solución personalizada

Estos nuevos productos han sido desarrollados gracias a una intensa investigación, tanto preclínica como clínica y bajo un enfoque biológico y biomecánico, proporcionando excelentes resultados funcionales a corto y a largo plazo.



Regenerador óseo

Biomaterial

Sintético mineral (fosfato tricálcico β), osteoconductor, estéril, reabsorbible y 100% biocompatible.

Membranas

Membranas de colágeno y pericardio reabsorbibles de origen equino, hermostáticas y estériles.



Cajas quirúrgicas

Proporcionamos el instrumental necesario para cualquier tipo de necesidad en el campo de la implantología, tanto para cirugía convencional, cirugía guiada y cirugía avanzada.



Nuestro progreso pone la tecnología a su alcance

Galimplant 3D exacto

Desarrollado en estrecha colaboración entre ingenieros informáticos y odontólogos con un objetivo claro:
suministrar al clínico un resultado sencillo y preciso.

- ✓ Software exclusivo
- ✓ Simulación en 2D y 3D
- ✓ Planificación avanzada



Características generales




MATERIAL DE FABRICACIÓN

Nuestros implantes están fabricados en titanio grado IV. Material probado científicamente que reúne las mejores condiciones de biocompatibilidad.




FABRICACIÓN

Nuestros productos están desarrollados bajo los mayores estándares de calidad.

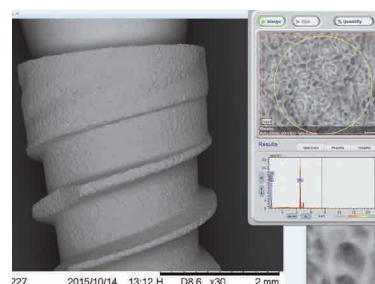


CONTROL DE CALIDAD

Todos nuestros materiales se someten a estrictos controles de calidad, obteniendo así productos 100% fiables.

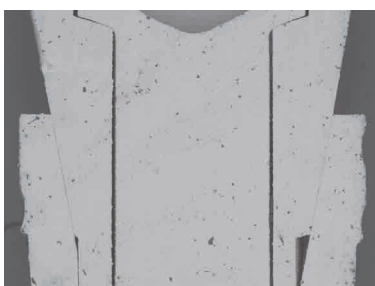

CONEXIÓN

Nuestra conexión cónica a 11° garantiza un perfecto sellado en la unión implante-pilar. Creando gran estabilidad y minimizando la posibilidad de contaminación bacteriana a largo plazo.

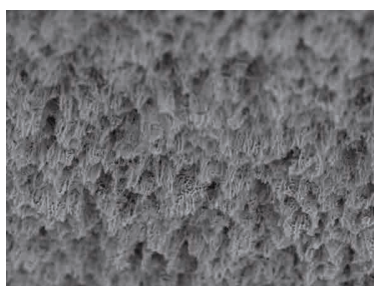

SUPERFICIE NANOBLAST PLUS®

Desarrollada por **Galimplant** como su activo más valioso, debido a sus excelentes propiedades físico-químicas que favorecen una adhesión ósea sólida y estable en el tiempo.



ENVASADO

Simple, práctico y ergonómico.



Identificación por colores según tipo de implante


- CONEXIÓN INTERNA
- CONEXIÓN EXTERNA
- CIRUGÍA GUIADA
- IMPLANTE CIGOMÁTICO TREATED
- IMPLANTE CIGOMÁTICO SMOOTH
- IMPLANTE ESPECIAL PARA CEMENTAR

¿Cómo retirar el implante del envase?




Envasado

Descripciones etiquetas

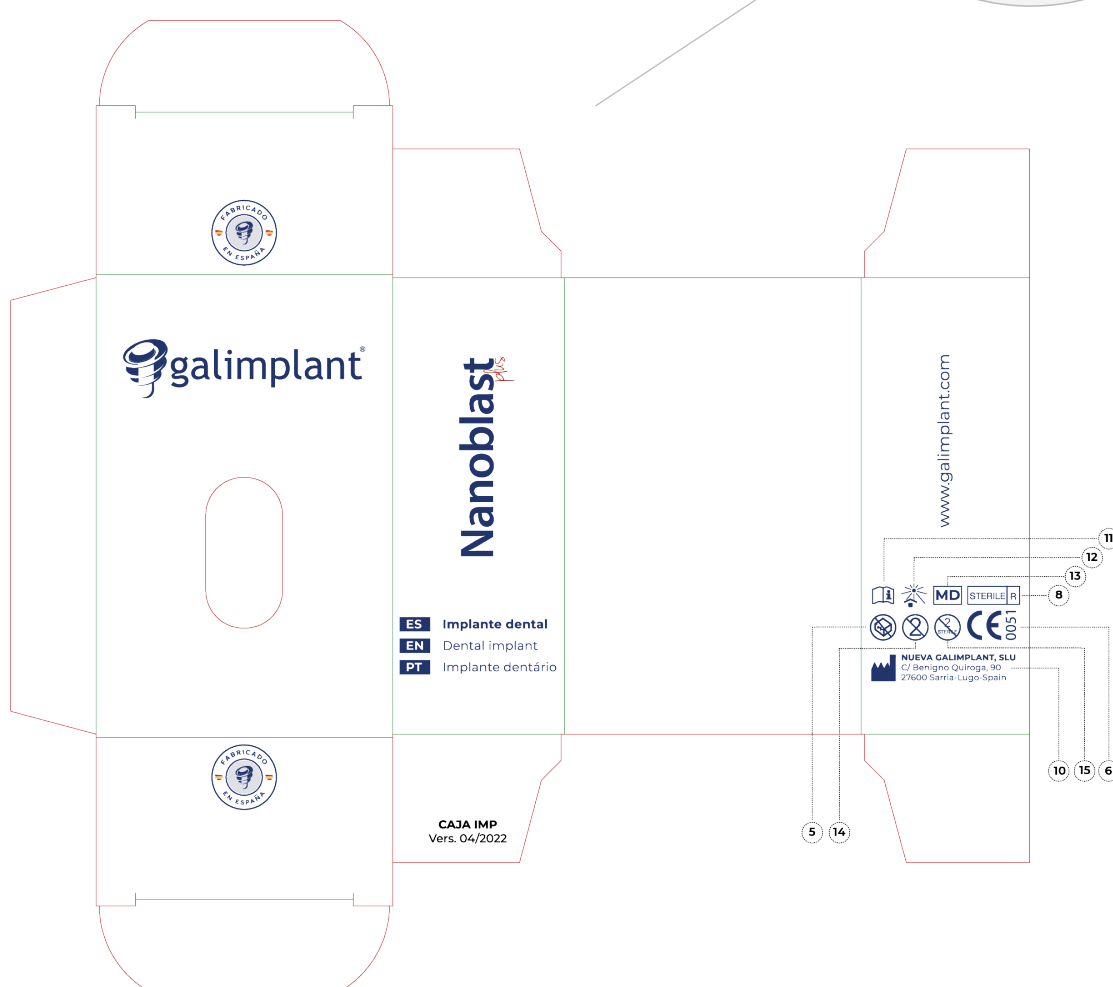


1. Etiqueta informativa exterior
2. Número de lote
3. Referencia (medida)

Etiqueta informativa exterior

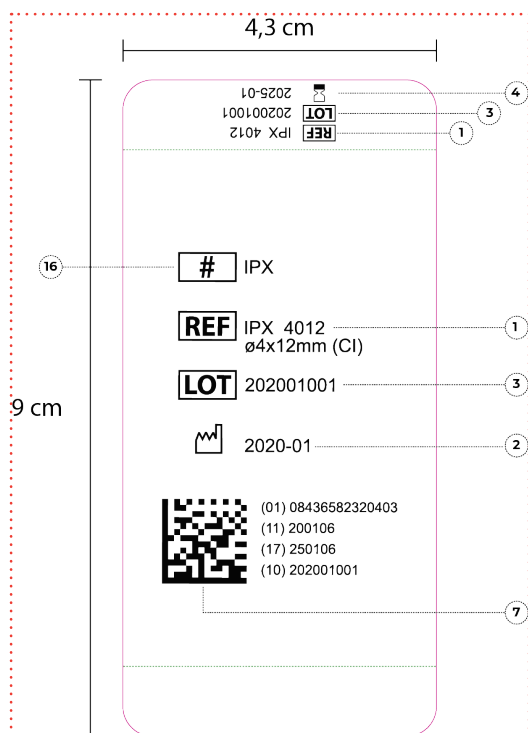

Etiqueta informativa interior (adhesiva, x2)

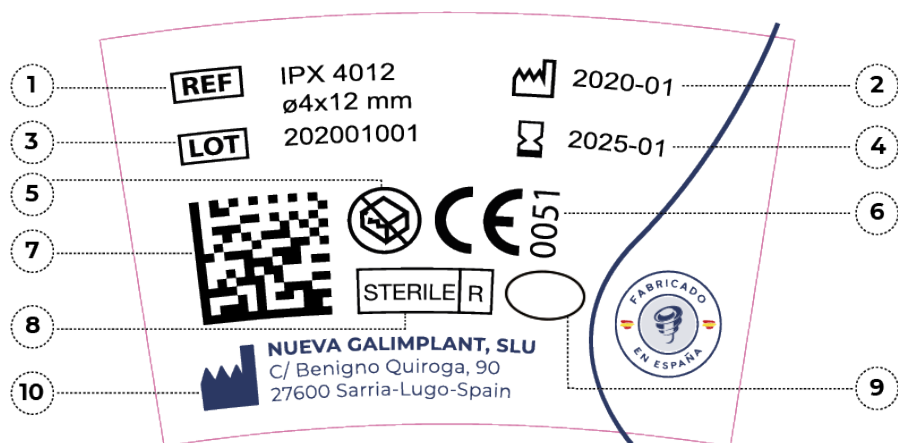

1. Referencia (medida)

2. Etiqueta informativa exterior

3. Número de lote

4. Fecha de caducidad

5. Esterilizado por irradiación

6. Mantener fuera del alcance de la luz solar


7. Un solo uso

8. Consulte las instrucciones de uso

9. No reesterilizar

10. No utilizarse si el envase está dañado


Nanoblast^{plus}®

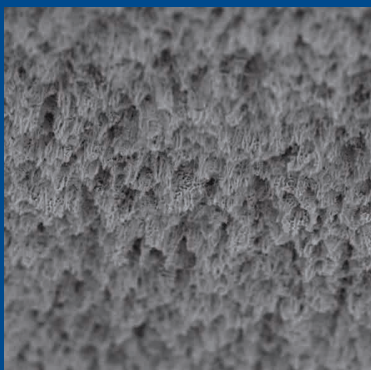

**Ideal para el
desarrollo y la
maduración celular.**

Superficie creada por **Galimplant** y su activo más valioso debido a sus excelentes propiedades físico-químicas que favorecen una adhesión ósea sólida y estable en el tiempo.

¿Qué nos hace diferentes?

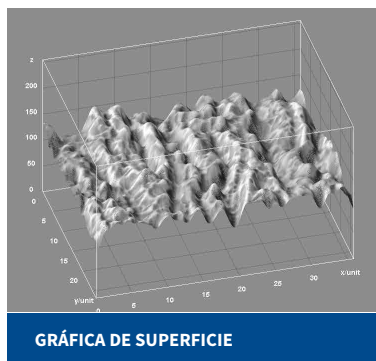

Nanoblast plus® es el resultado de una técnica que combina un chorreado de arena de grano grueso y un posterior triple grabado ácido. Así, se obtiene una macro, micro y nanorrugosidad en la superficie del implante ideal para la adhesión y crecimiento celular.


RUGOSIDAD

Ra **1.7** μm

COMPOSICIÓN

TiO₂ **99.9** %

Técnica empleada: **SEM (EDX)**

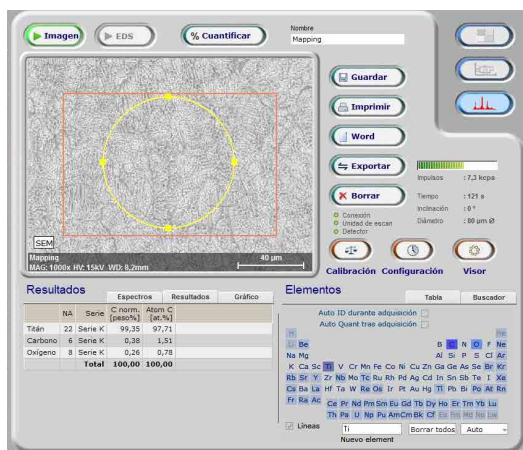

C norm. [peso %]

TITANIO

99.35 %

CARBONO

0.38 %

OXÍGENO

0.26 %

Atom C [at.%]

TITANIO

97.71 %

CARBONO

1.51 %

OXÍGENO

0.78 %

Vistas de la superficie del implante dental



Histología



Conexión interna



IPX (Ti)

Diseño macroscópico que favorece una gran estabilidad primaria en cualquier situación.

- ✓ AJUSTE PRECISO QUE GARANTIZA EL SELLADO BACTERIANO
- ✓ CONEXIÓN INTERNA CÓNICA A 11°
- ✓ ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
- ✓ PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA
- ✓ PLATAFORMA REDUCIDA



6 Ø 3,5 mm

Plataforma Ø 3,5 mm

8 mm	Ref. IPX 3508
10 mm	Ref. IPX 3510
12 mm	Ref. IPX 3512
14 mm	Ref. IPX 3514
16 mm	Ref. IPX 3516
18 mm	Ref. IPX 3518



6 Ø 4 mm

Plataforma Ø 4 mm

6 mm	Ref. IPX 4006
8 mm	Ref. IPX 4008
10 mm	Ref. IPX 4010
12 mm	Ref. IPX 4012
14 mm	Ref. IPX 4014
16 mm	Ref. IPX 4016
18 mm	Ref. IPX 4018



6 Ø 4,5 mm

Plataforma Ø 4,5 mm

6 mm	Ref. IPX 4506
8 mm	Ref. IPX 4508
10 mm	Ref. IPX 4510
12 mm	Ref. IPX 4512
14 mm	Ref. IPX 4514



6 Ø 5 mm

Plataforma Ø 5 mm

6 mm	Ref. IPX 5006
8 mm	Ref. IPX 5008
10 mm	Ref. IPX 5010
12 mm	Ref. IPX 5012

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante + Tornillo Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCS 04010



Ref. AIP 040



Ref. TAIP 0135
Long. 13,5 mm

Triple función:

- ✓ Porta-implante
- ✓ Aditamento de impresión (Cubeta abierta)
- ✓ Pilar provisional

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante (Ti)



Ref. PCS 04010



Ref. AIPC 040

Doble función:

- ✓ Porta-implante
- ✓ Aditamento de impresión (Cubeta cerrada)

*Si selecciona esta opción, la referencia del pedido debe llevar incluida una "C".
Ejemplo: IPXC 3508

Pilar de cicatrización recto Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCS 04020
Alt. 2 mm



Ref. PCS 04040
Alt. 4 mm



Ref. PCS 04060
Alt. 6 mm

Pilar de cicatrización cónico Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCCS 04040
Alt. 4 mm



Ref. PCCS 04060
Alt. 6 mm

Aditamento de impresión para cubeta abierta Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. AIP 040



Ref. TAIP 0135
Long. 13,5 mm



Ref. TAIP 0200
Long. 20 mm

Aditamento de impresión para cubeta cerrada Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. AIPC 040

Conexión interna



ICI (Ti)

Diseño macroscópico especialmente indicado para huesos tipo I y II.

- ✓ AJUSTE PRECISO QUE GARANTIZA EL SELLADO BACTERIANO
- ✓ CONEXIÓN INTERNA CÓNICA A 11°
- ✓ ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
- ✓ PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA
- ✓ PLATAFORMA REDUCIDA



6 Ø 3,2 mm

Plataforma Ø 3,2 mm

10 mm Ref. ICI 03210

12 mm Ref. ICI 03212

14 mm Ref. ICI 03214



6 Ø 3,5 mm

Plataforma Ø 3,5 mm

8 mm Ref. ICI 03508

10 mm Ref. ICI 03510

12 mm Ref. ICI 03512

14 mm Ref. ICI 03514



6 Ø 4 mm

Plataforma Ø 4 mm

8 mm Ref. ICI 04008

10 mm Ref. ICI 04010

12 mm Ref. ICI 04012

14 mm Ref. ICI 04014



6 Ø 5 mm

Plataforma Ø 5 mm

8 mm Ref. ICI 05008

10 mm Ref. ICI 05010

12 mm Ref. ICI 05012

14 mm Ref. ICI 05014

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante + Tornillo Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCS 04010



Ref. AIP 040



Ref. TAIP 0135

Long. 13,5 mm

Triple función:

- ✓ Porta-implante
- ✓ Aditamento de impresión (Cubeta abierta)
- ✓ Pilar provisional

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante (Ti)



Ref. PCS 04010



Ref. AIPC 040

Doble función:

- ✓ Porta-implante
- ✓ Aditamento de impresión (Cubeta cerrada)

*Si selecciona esta opción, la referencia del pedido debe llevar incluida una "C".
Ejemplo: ICIC 03508

Pilar de cicatrización recto Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCS 04020

Alt. 2 mm



Ref. PCS 04040

Alt. 4 mm



Ref. PCS 04060

Alt. 6 mm

Pilar de cicatrización cónico Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCCS 04040

Alt. 4 mm



Ref. PCCS 04060

Alt. 6 mm

Aditamento de impresión para cubeta abierta Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. AIP 040



Ref. TAIP 0135

Long. 13,5 mm



Ref. TAIP 0200

Long. 20 mm

Aditamento de impresión para cubeta cerrada Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. AIPC 040

Conexión externa



IPXE (Ti)

Diseño macroscópico que favorece una gran estabilidad primaria en cualquier situación.

- ✓ CONEXIÓN EXTERNA UNIVERSAL REGULAR
- ✓ GRAN CAPACIDAD AUTORROSCANTE
- ✓ PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA



6 Ø 3,5 mm
Plataforma Ø 4 mm

8 mm	Ref. IPXE 3508
10 mm	Ref. IPXE 3510
12 mm	Ref. IPXE 3512
14 mm	Ref. IPXE 3514



6 Ø 4 mm
Plataforma Ø 4 mm

6 mm	Ref. IPXE 4006
8 mm	Ref. IPXE 4008
10 mm	Ref. IPXE 4010
12 mm	Ref. IPXE 4012
14 mm	Ref. IPXE 4014



6 Ø 5 mm
Plataforma Ø 5 mm

6 mm	Ref. IPXE 5006
8 mm	Ref. IPXE 5008
10 mm	Ref. IPXE 5010
12 mm	Ref. IPXE 5012

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante + Tornillo Ø 2 mm (Ti)



Ref. PC 4010



Ref. AIP 40



Ref. TAIP 135
Long. 13,5 mm

Triple función:

- ✓ Porta-implante
- ✓ Aditamento de impresión
- ✓ Pilar provisional

Pilar de cicatrización recto Ø 2 mm (Ti)



Ref. PC 4020
Alt. 2 mm



Ref. PC 4040
Alt. 4 mm



Ref. PC 4060
Alt. 6 mm

Pilar de cicatrización cónico Ø 2 mm (Ti)



Ref. PCC 4040
Alt. 4 mm



Ref. PCC 4060
Alt. 6 mm

Aditamento de impresión Ø 2 mm (Ti)



Ref. AIP 40



Ref. TAIP 135
Long. 13,5 mm



Ref. TAIP 200
Long. 20 mm

Implantes cigomáticos

IPX- TILTED SYSTEM



Implantes diseñados para casos con maxilar superior atrófico severo.

- ✓ AJUSTE PRECISO QUE GARANTIZA EL SELLADO BACTERIANO
- ✓ CONEXIÓN INTERNA CÓNICA A 11°
- ✓ ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
- ✓ PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA
- ✓ PLATAFORMA REDUCIDA

Disponible en dos diseños

- ✓ SMOOTH
- ✓ TREATED



6 Ø 4,2 mm

Plataforma Ø 4,2 mm

30 mm	Ref. ICMS-4230
32,5 mm	Ref. ICMS-4232
35 mm	Ref. ICMS-4235
37,5 mm	Ref. ICMS-4237
40 mm	Ref. ICMS-4240
42,5 mm	Ref. ICMS-4242
45 mm	Ref. ICMS-4245
47,5 mm	Ref. ICMS-4247
50 mm	Ref. ICMS-4250
52,5 mm	Ref. ICMS-4252
55 mm	Ref. ICMS-4255
60 mm	Ref. ICMS-4260



6 Ø 4,3 mm

Plataforma Ø 4,3 mm

20 mm	Ref. ICMT-4320
25 mm	Ref. ICMT-4325
30 mm	Ref. ICMT-4330
32,5 mm	Ref. ICMT-4332
35 mm	Ref. ICMT-4335
37,5 mm	Ref. ICMT-4337
40 mm	Ref. ICMT-4340
42,5 mm	Ref. ICMT-4342
45 mm	Ref. ICMT-4345
47,5 mm	Ref. ICMT-4347
50 mm	Ref. ICMT-4350
52,5 mm	Ref. ICMT-4352
55 mm	Ref. ICMT-4355
60 mm	Ref. ICMT-4360

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante (Ti)



Ref. PCS 04010



Ref. AIPC 040

Doble función:

- ✓ Porta-implante
- ✓ Aditamento de impresión

Pilar de cicatrización recto Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCS 04020

Alt. 2 mm



Ref. PCS 04040

Alt. 4 mm



Ref. PCS 04060

Alt. 6 mm

Pilar de cicatrización cónico Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. PCCS 04040

Alt. 4 mm



Ref. PCCS 04060

Alt. 6 mm

Aditamento de impresión para cubeta abierta Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. AIP 040



Ref. TAIP 0135

Long. 13,5 mm



Ref. TAIP 0200

Long. 20 mm

Aditamento de impresión para cubeta cerrada Ø 1,6 mm (Ti)



Ref. AIPC 040

Implante especial



Implante especial fabricado en una sola pieza.
Diseñado para casos con limitaciones anatómicas severas.

✓ **IMPLANTE PARA CEMENTAR**



Implante para cementar

Ø 2,5 mm

10 mm	Ref. IMC-2510
12 mm	Ref. IMC-2512

Suministrado con
Porta-implante



Ref. AIP-IMC


Opcional

Réplica



Ref. RI-IMC


Pilar calcinable

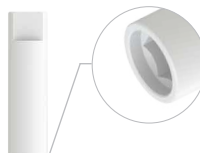

Ref. PCA-IMC

Componentes protésicos

Para **conexión interna**

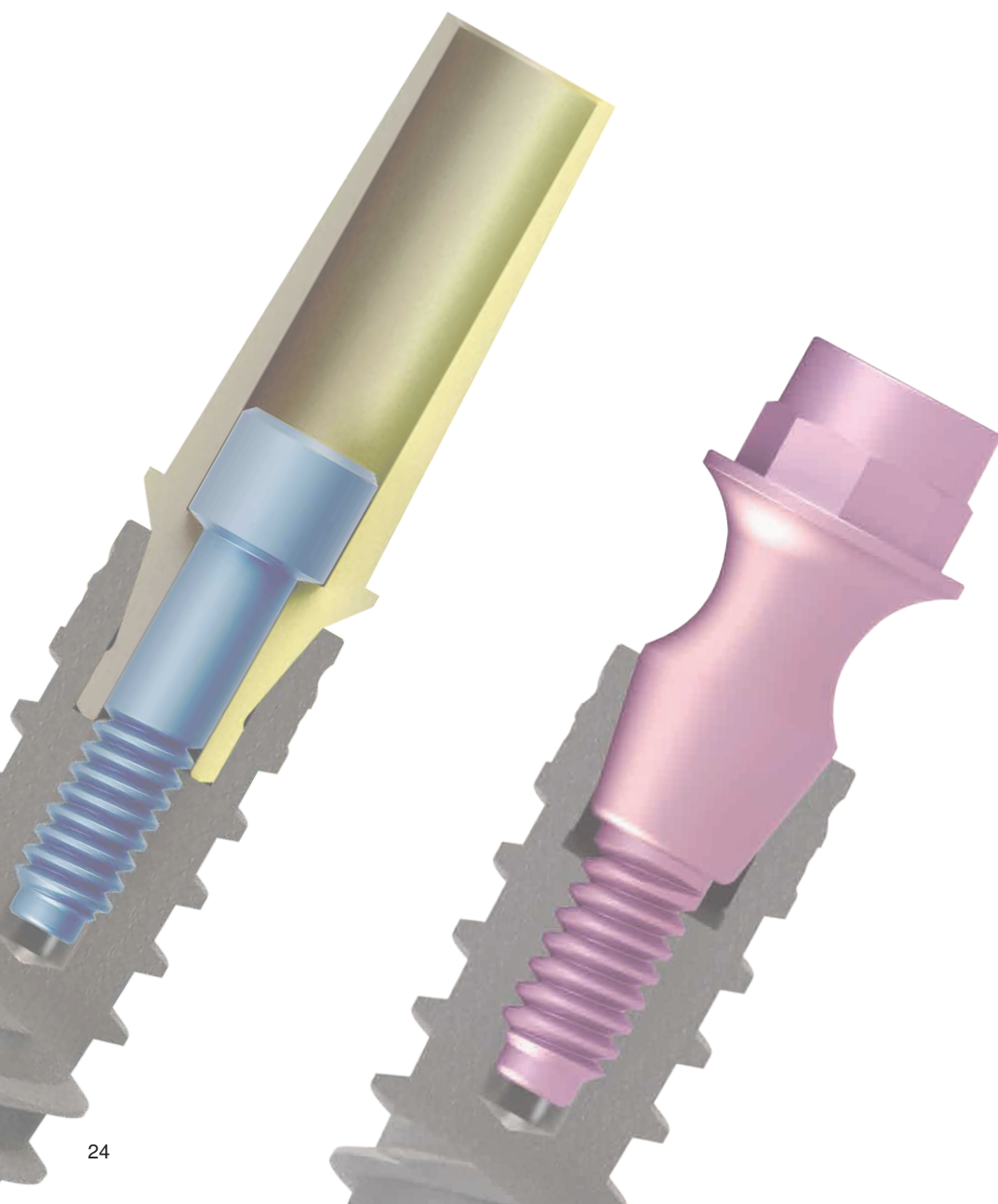

CI

Amplia gama de soluciones protésicas

Esquema protésico

Pág. 26

Prótesis de carga inmediata

Pág. 30

Prótesis cementada

Pág. 32

Pilar para escaneado

Pág. 36

Prótesis cemento-atornillada

Pág. 38

Prótesis atornillada

Pág. 44

Prótesis removible

Pág. 60

Esquema protésico CI


Pilares de cicatrización

Para implantes de conexión interna: IPX e ICI



Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis cementada

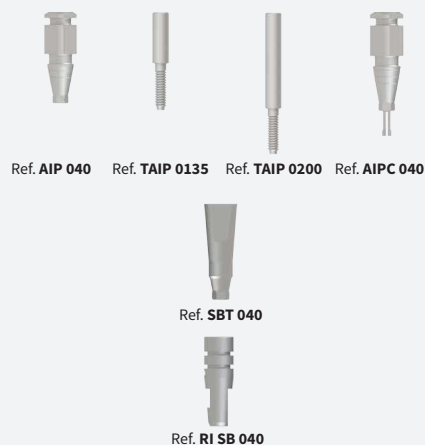

Prótesis cemento-atornillada

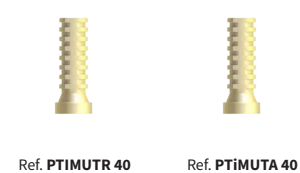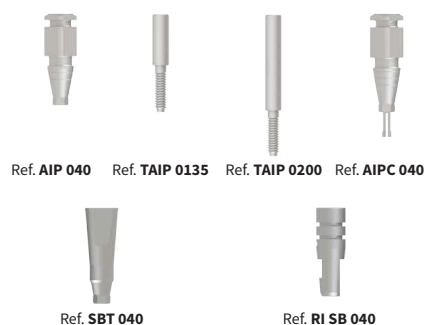

Pilares definitivos rectos

Pilares definitivos angulados

Tornillos



Ref. **PR 04000**



Ref. **PA 04000**
Ref. **PA 04010**
Ref. **PA 04030**
Ref. **PA 04050**



Ref. **PA 0154010**
Ref. **PA 0154030**
Ref. **PA 0154050**



Ref. **PA 0304010**
Ref. **PA 0304030**
Ref. **PA 0304050**



Ref. **TP 040 x 2**



Ref. **PGZA 04010**
Ref. **PGZA 04020**
Ref. **PGZA 04030**



Ref. **PCERC 04020**
Ref. **PCERC 04030**
Ref. **PCERC 04040**



Ref. **MUSLAR 04030**
Ref. **MUSLAR 04040**
Ref. **MUSLAR 04060**



Ref. **MUSR 04010**
Ref. **MUSR 04020**
Ref. **MUSR 04030**
Ref. **MUSR 04040**
Ref. **MUSR 04050**



Ref. **PITEMUR 4040**



Ref. **PGZMUR 40**



Ref. **PCERCMUR 40**



Ref. **MUSLA 04030**
Ref. **MUSLA 04040**
Ref. **MUSLA 04060**



Ref. **MUSA S04020**
Ref. **MUSA S04030**
Ref. **MUSA S04040**
Ref. **MUSA S04050**



Ref. **PITEMUA 4040**



Ref. **PGZMUA 40**



Ref. **PCERCMAU 40**



Ref. **MUST 04010**
Ref. **MUST 04020**
Ref. **MUST 04030**



Ref. **PITEMUTR 4040**



Ref. **MU 1504020**
Ref. **MU 1504030**
Ref. **MU 3004030**
Ref. **MU 3004040**
Ref. **MU 4504050**
Ref. **MU 5004050**
Ref. **MU 6004050**



Ref. **PITEMUTR 4040**



Ref. **TMUT 40 x 2**

Esquema protésico CI

Pilares de cicatrización

Para implantes de conexión interna: IPX e ICI

Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis atornillada



Ref. PCS 04010



Ref. PCS 04020
Ref. PCS 04040
Ref. PCS 04060



Ref. PCCS 04040
Ref. PCCS 04060



Ref. AIP 040



Ref. TAIP 0135



Ref. TAIP 0200



Ref. AIPC 040



Ref. SBT 040



Ref. RI SB 040



Ref. PCIR 040



Ref. PCIA 040
Ref. PCIA 04020
Ref. PCIA 04030
Ref. PCIA 04040



Ref. PCT 4030



Ref. AIPTR 40



Ref. TAIP 135



Ref. TAIP 200



Ref. SBT MUSR
Ref. SBT MUSA



Ref. RITR SB 40



Ref. AIPT 40



Ref. RIT SB 40



Ref. PTIMUR 4048



Ref. PTIMUA 4048



Ref. PCM 4030



Ref. AIPMU 40
Ref. AIPMUA 40



Ref. TAIPMU 135



Ref. SBT MUST
Ref. SBT MUSTA



Ref. RIMA SB 40



Ref. PTIMUTR 40



Ref. PTIMUTA 40

Prótesis removable



Ref. PCS 04010



Ref. PCS 04020
Ref. PCS 04040
Ref. PCS 04060



Ref. PCCS 04040
Ref. PCCS 04060



Ref. AIP 040



Ref. TAIP 0135



Ref. TAIP 0200



Ref. AIPC 040



Ref. SBT 040



Ref. RI SB 040

Pilares definitivos rectos

Pilares definitivos angulados

Tornillos

Conjunto de procesado



Ref. **TP 040** x 2



Ref. **MUSLAR 04030**
Ref. **MUSLAR 04040**
Ref. **MUSLAR 04060**



Ref. **MUSR 04010**
Ref. **MUSR 04020**
Ref. **MUSR 04030**
Ref. **MUSR 04040**
Ref. **MUSR 04050**



Ref. **PCMUR 4048**
Ref. **PCMUA 4048**



Ref. **MUSLA 04030**
Ref. **MUSLA 04040**
Ref. **MUSLA 04060**



Ref. **MUSA S04020**
Ref. **MUSA S04030**
Ref. **MUSA S04040**
Ref. **MUSA S04050**



Ref. **PSMUR 4048**
Ref. **PSMUA 4048**



Ref. **TMU 4048** x 2



Ref. **MUST 04010**
Ref. **MUST 04020**
Ref. **MUST 04030**



Ref. **PCMUTR 40**
Ref. **PCMUTA 40**



Ref. **MU 1504020**
Ref. **MU 1504030**
Ref. **MU 3004030**
Ref. **MU 3004040**
Ref. **MU 4504050**
Ref. **MU 5004050**
Ref. **MU 6004050**



Ref. **PCMUTR 40**



Ref. **TMUT 40** x 2



Ref. **PKO 04008**
Ref. **PKO 04016**
Ref. **PKO 04030**
Ref. **PKO 04040**
Ref. **PKO 04050**
Ref. **PKO 04070**



Ref. **PKOC 08**




Ref. **PKB 04008**
Ref. **PKB 04016**
Ref. **PKB 04030**
Ref. **PKB 04040**
Ref. **PKB 04050**



Ref. **TKO 4048**



Ref. **AKO 4048**

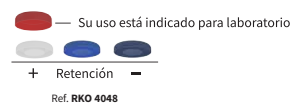

Ref. **TKB 4048**



Ref. **OB 4048**



Ref. **AKO 4048**

Pilar de carga inmediata


Pilar disponible en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Ambos pilares están indicados para prótesis provisionales cementadas o atornilladas.

Rotacional para prótesis múltiples.


Anti-rotacional para prótesis unitarias.

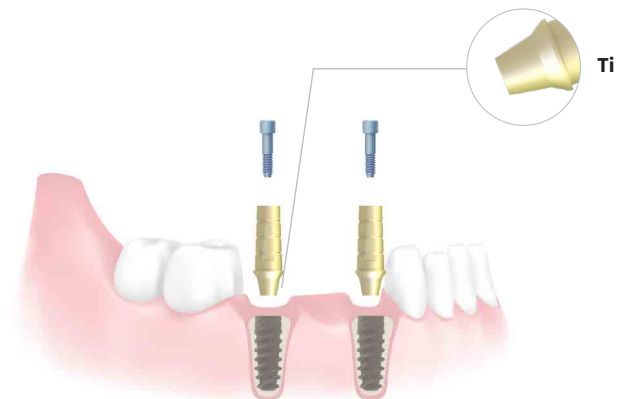

PILAR DE CARGA INMEDIATA ROTACIONAL

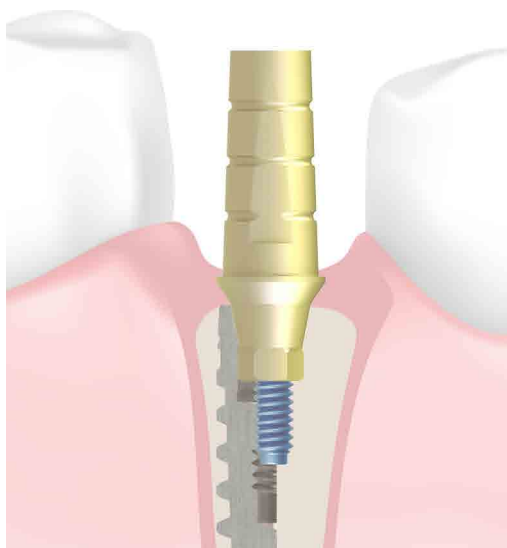

PILAR DE CARGA INMEDIATA + TORNILLO PROTÉSICO

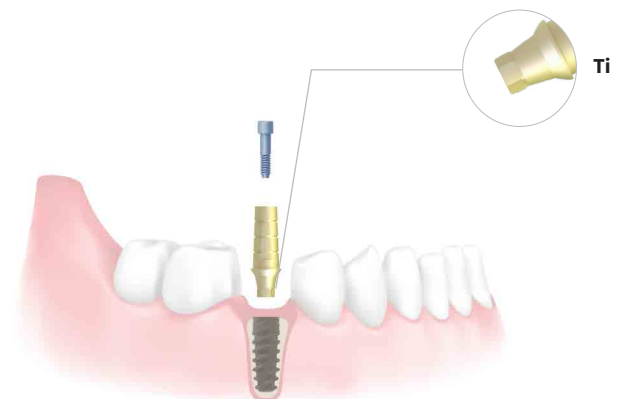

PILAR DE CARGA INMEDIATA ANTI-ROTACIONAL

Pilar de carga inmediata

Para **conexión interna**



Pilar carga inmediata rotacional (Ti)

Ref. **PCIR 040** Ø 4 mm Alt. Hombro 1 mm 



Pilar carga inmediata anti-rotacional (Ti)

Ref. **PCIA 040** Ø 4 mm Alt. Hombro 1 mm 

Ref. **PCIA 04020** Ø 4 mm Alt. Hombro 2 mm 

Ref. **PCIA 04030** Ø 4 mm Alt. Hombro 3 mm 

Ref. **PCIA 04040** Ø 4 mm Alt. Hombro 4 mm 

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø 4 mm 

Pilar recto

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Disponible en distintas alturas de hombro.

Indicaciones


Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples.

Rotacional para prótesis múltiples.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.



PILAR RECTO ROTACIONAL

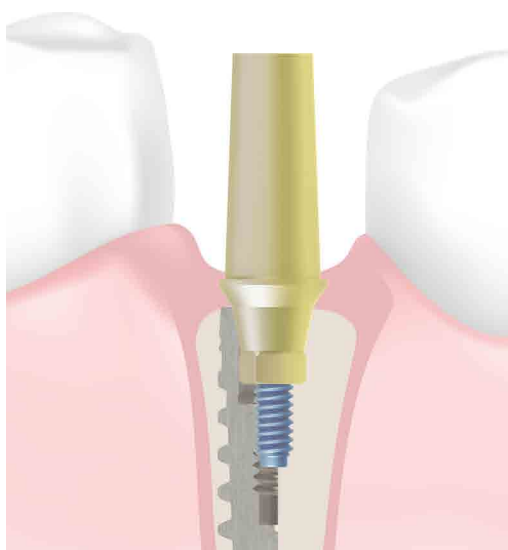

PILAR RECTO + TORNILLO PROTÉSICO



PILAR RECTO ANTI-ROTACIONAL

Pilar recto

Para **conexión interna**



Pilar recto rotacional (Ti)

Ref. **PR 04000** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm 



Pilar recto anti-rotacional (Ti)

Ref. **PA 04000** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm 

Ref. **PA 04010** Ø 4 mm Alt. Hombro 1 mm 

Ref. **PA 04030** Ø 4 mm Alt. Hombro 3 mm 

Ref. **PA 04050** Ø 4 mm Alt. Hombro 5 mm 

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø 4 mm 

Pilar angulado

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Disponible en distintas alturas de hombro.

Indicaciones

Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15° hasta 30°.



PILAR ANGULADO 15°



PILAR ANGULADO + TORNILLO PROTÉSICO



PILAR ANGULADO 30°

Pilar angulado

Para **conexión interna**



Pilar angulado (Ti)

Ref. PA 0154010	15°	Alt. Hombro 1 mm	
Ref. PA 0154030	15°	Alt. Hombro 3 mm	
Ref. PA 0154050	15°	Alt. Hombro 5 mm	



Pilar angulado (Ti)

Ref. PA 0304010	30°	Alt. Hombro 1 mm	
Ref. PA 0304030	30°	Alt. Hombro 3 mm	
Ref. PA 0304050	30°	Alt. Hombro 5 mm	

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4 mm**

Pilar para escaneado

Directo a implante

Pilar para escanear fabricado en titanio grado V.

Indicaciones

Puede utilizarse colocado directamente en boca o sobre modelos.
Reproduce la posición del implante de forma exacta.

Se colocará aplicando el torque final de la prótesis.

Pilar para escaneado

directo a implante




Ref. **SBT 040** Ø 4 mm 

Suministrado con tornillo



Tornillo clínico (1,6 mm)

Ref. **TP 040**

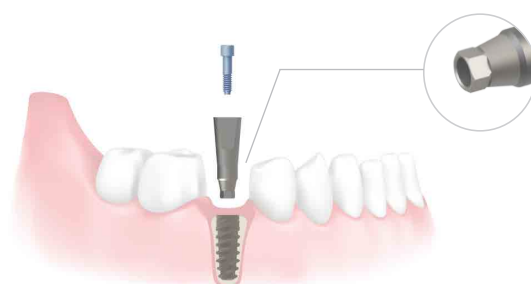

DIRECTO A IMPLANTE

Opcional

Réplica



Ref. **RI SB 040** Ø 4 mm 

**Es necesario el uso del tornillo para
modelo digital
(No incluido con la réplica)**



Tornillo clínico (2 mm)

Ref. **TMU 4048**

Pilar para escaneado

Directo a pilar multi-posición recto estético y recto

Pilar para escanear fabricado en titanio grado V.

Indicaciones

Puede utilizarse colocado directamente en boca o sobre modelos.
Reproduce la posición del pilar transepitelial de forma exacta.

Se colocará aplicando el torque final de la prótesis.

Pilar para escaneado

directo a pilar multi-posición recto estético

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm




Ref. **SBT MUSR** Ø 4 mm 
Ref. **SBT MUSA** Ø 4 mm 

Suministrado con tornillo



Tornillo clínico (2 mm)
Ref. **TMU 4048**

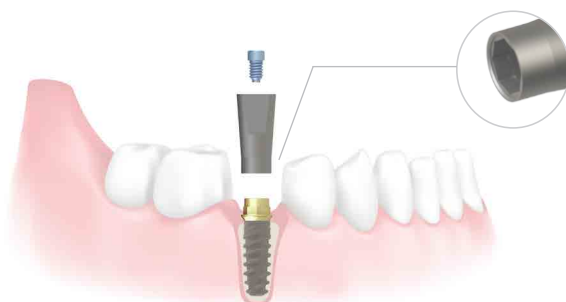

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO ESTÉTICO




Ref. **SBT MUST** Ø 4,8 mm 
Ref. **SBT MUSTA** Ø 4,8 mm 

Suministrado con tornillo




Tornillo clínico (1,4 mm)
Ref. **TMUT 40**

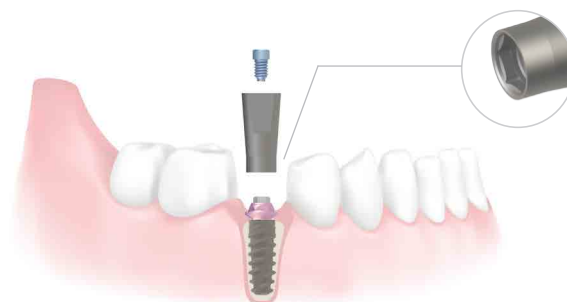

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO

Opcional

Réplica

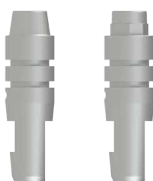

Ref. **RITR SB 40** Ø 4 mm 
Ref. **RIT SB 40** Ø 4 mm 

**Es necesario el uso del tornillo para
modelo digital
(No incluido con la réplica)**



Tornillo clínico (2 mm)
Ref. **TMU 4048**



Ref. **RIMA SB 40** Ø 4,8 mm 

**Es necesario el uso del tornillo para
modelo digital
(No incluido con la réplica)**



Tornillo clínico (2 mm)
Ref. **TMU 4048**

Base para prótesis cemento-atornillada (Directa a implante)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas usándolo como base mecanizada sobre la que se cementa la corona en el laboratorio.

Rotacional para prótesis múltiples.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.



Base para prótesis cemento-atornillada anti-rotacional (Ti) (Directa a implante)

Ref. PGZA 04010	Ø 4 mm	Alt. Hombro 1 mm	6
Ref. PGZA 04020	Ø 4 mm	Alt. Hombro 2 mm	6
Ref. PGZA 04030	Ø 4 mm	Alt. Hombro 3 mm	6



BASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ANTI-ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040 x 2**

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø 4 mm 6

Base para prótesis cemento-atornillada (Directa a multi-posición recto estético)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas usándolo como base mecanizada sobre la que se cementa la corona en el laboratorio.

Rotacional para prótesis múltiples.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.



**Base para prótesis
cemento-atornillada**
rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PGZMUR 40** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm



**Base para prótesis
cemento-atornillada**
anti-rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PGZMUA 40** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm



BASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ROTACIONAL



BASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ANTI-ROTACIONAL


Suministrado con dos tornillos



**Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)**

Ref. **TMU 4048 x 2**

Opcional

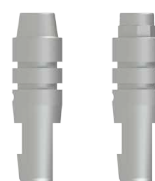

Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø 4 mm

Ref. **RIT SB 40** Ø 4 mm

Interfase compatible con el Sistema Cerec® (Directa a implante)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Permite un ajuste óptimo con el implante y nos permite conseguir una prótesis pasiva a través de la cementación.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.

Interfase compatible con el Sistema Cerec®
anti-rotacional (Ti)
(Directa a implante)



Ref. PCERC 04020	Ø 4 mm	Alt. Hombro 2 mm	6
Ref. PCERC 04030	Ø 4 mm	Alt. Hombro 3 mm	6
Ref. PCERC 04040	Ø 4 mm	Alt. Hombro 4 mm	6

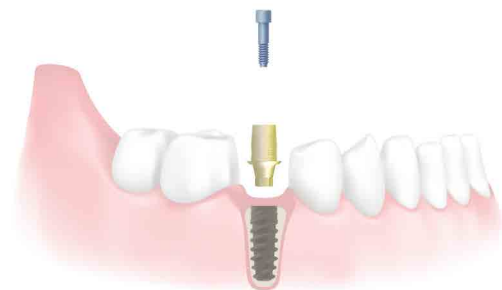

INTERFASE COMPATIBLE CEREC ANTI-ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040 x 2**

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø 4 mm 6

Interfase compatible con el Sistema Cerec® (Directa a multi-posición recto estético)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Indicaciones

Permite un ajuste óptimo con el implante y nos permite conseguir una prótesis pasiva a través de la cementación.

Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.



Interfase compatible con el Sistema Cerec®
rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PCERC MUR 40** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm



INTERFASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ROTACIONAL



Interfase compatible con el Sistema Cerec®
anti-rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PCERC MUA 40** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm



INTERFASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ANTI-ROTACIONAL


Suministrado con dos tornillos



**Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)**

Ref. **TMU 4048 x 2**

Opcional

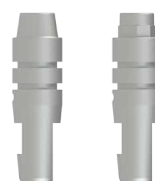

Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø 4 mm

Ref. **RIT SB 40** Ø 4 mm

Interfase para pilar multi-posición recto estético

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Una sola pieza.

Indicaciones

Está indicada para prótesis cemento-atornilladas unitarias o múltiples.

Rotacional para prótesis múltiples.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.




Suministrado con tornillo



**Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)**

Ref. **TMU 4048 x 2**

Opcional

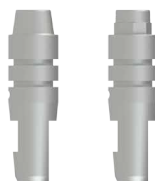

Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø 4 mm

Ref. **RIT SB 40** Ø 4 mm

Interfase para pilar multi-posición recto y angulado

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 10 Ncm.

Una sola pieza.


Indicaciones

Está indicada para prótesis cemento-atornilladas múltiples.

Rotacional para prótesis múltiples.



Ref. **PITEMUTR 4040** Alt. 4 mm 

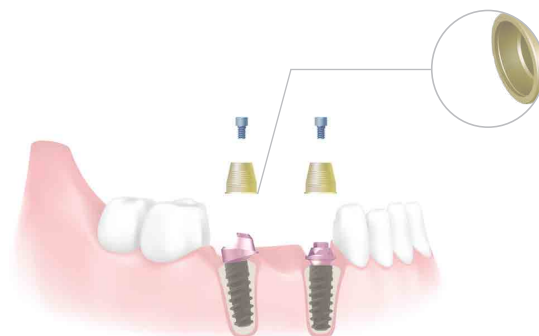

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO Y ANGULADO

Suministrado con tornillo



**Tornillo clínico (1,4 mm)
+ Tornillo lab. (1,4 mm)**

Ref. **TMUT 40 x 2**

Opcional



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø 4,8 mm 

Pilar multi-posición recto estético slim rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas múltiples.

Su forma anatómica cóncava permite a este pilar albergar el tejido mucoso sin tensión, favoreciendo la creación de un tejido conectivo lo suficientemente grueso que minimizará el infiltrado a nivel de la plataforma del implante.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Una sola pieza.

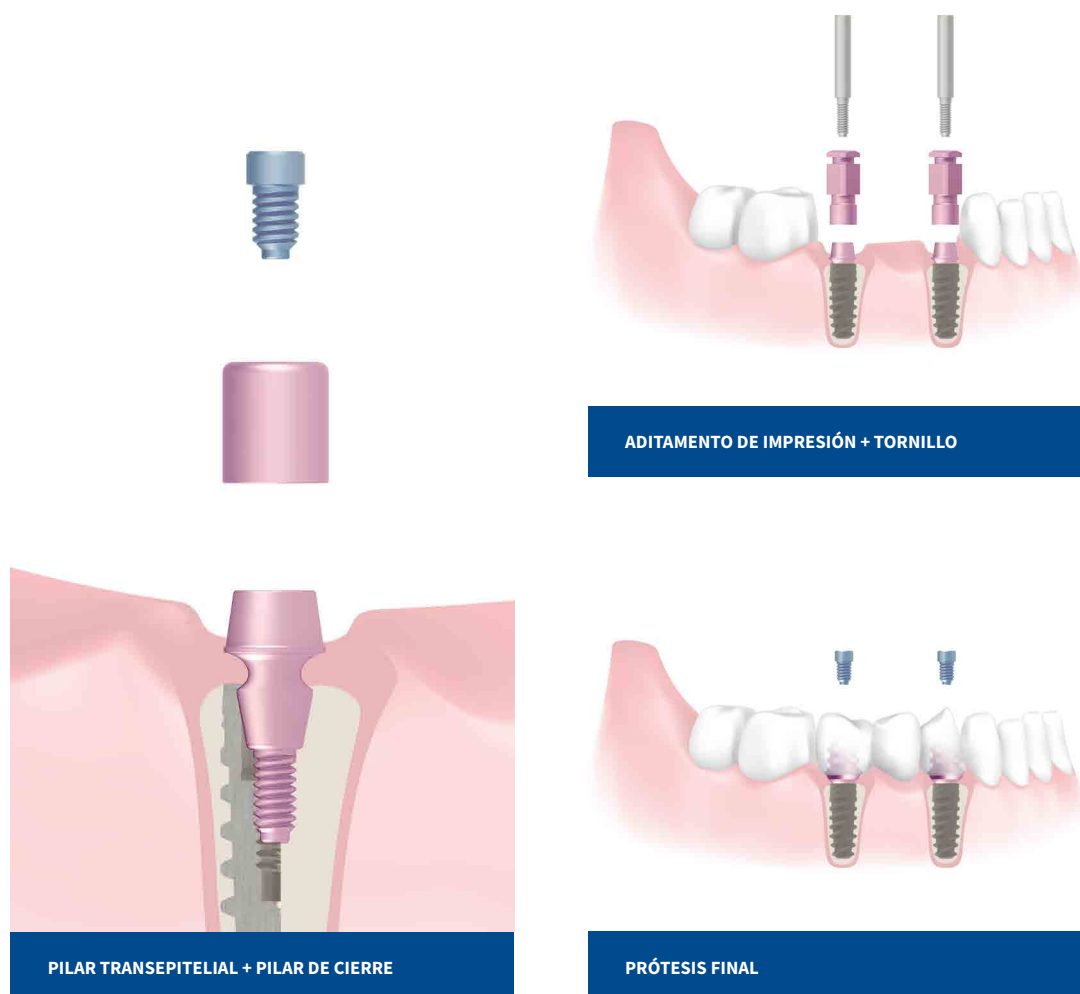

Kit multi-posición recto estético slim rotacional

Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. MUSLAR 04030	Alt. Hombro 3 mm	⊙
Ref. MUSLAR 04040	Alt. Hombro 4 mm	⊙
Ref. MUSLAR 04060	Alt. Hombro 6 mm	⊙

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. **20 mm**



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPTR 40** ⊙



Pilar calcinable

Ref. **PCMUR 4048** Ø **4 mm** ⊙

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUR 4048** Ø **4 mm** ⊙



Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø **4 mm** ⊙



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. **PSMUR 4048** Ø **4 mm** ⊙



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 135** Long. **13,5 mm**

Pilar multi-posición recto estético slim anti-rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas unitarias de pequeño diámetro, por ejemplo, incisivos inferiores, incisivos laterales superiores.

Su forma anatómica cóncava permite a este pilar albergar el tejido mucoso sin tensión, favoreciendo la creación de un tejido conectivo lo suficientemente grueso que minimizará el infiltrado a nivel de la plataforma del implante.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Una sola pieza.



Kit multi-posición recto estético slim anti-rotacional

Para **conexión interna**



Pilar transeptal (Ti)

Ref. MUSLA 04030	Alt. Hombro 3 mm	1
Ref. MUSLA 04040	Alt. Hombro 4 mm	1
Ref. MUSLA 04060	Alt. Hombro 6 mm	1

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. TMU 4048 x 2



Pilar de cierre transeptal

Ref. PCT 4030



Tornillo aditamento de impresión

Ref. TAIP 200 Long. 20 mm



Aditamento de impresión transeptal

Ref. AIPT 40 1



Pilar calcinable

Ref. PCMUA 4048 Ø 4 mm 8

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. PTIMUA 4048 Ø 4 mm 8



Réplica transeptal

Ref. RIT SB 40 Ø 4 mm 1



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. PSMUA 4048 Ø 4 mm 8



Tornillo aditamento de impresión

Ref. TAIP 135 Long. 13,5 mm

Pilar multi-posición recto estético rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas múltiples, con alta exigencia estética. Tiene una emergencia anatómica que respeta el espacio biológico.

Permite una divergencia de los implantes de hasta 20°.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Una sola pieza.

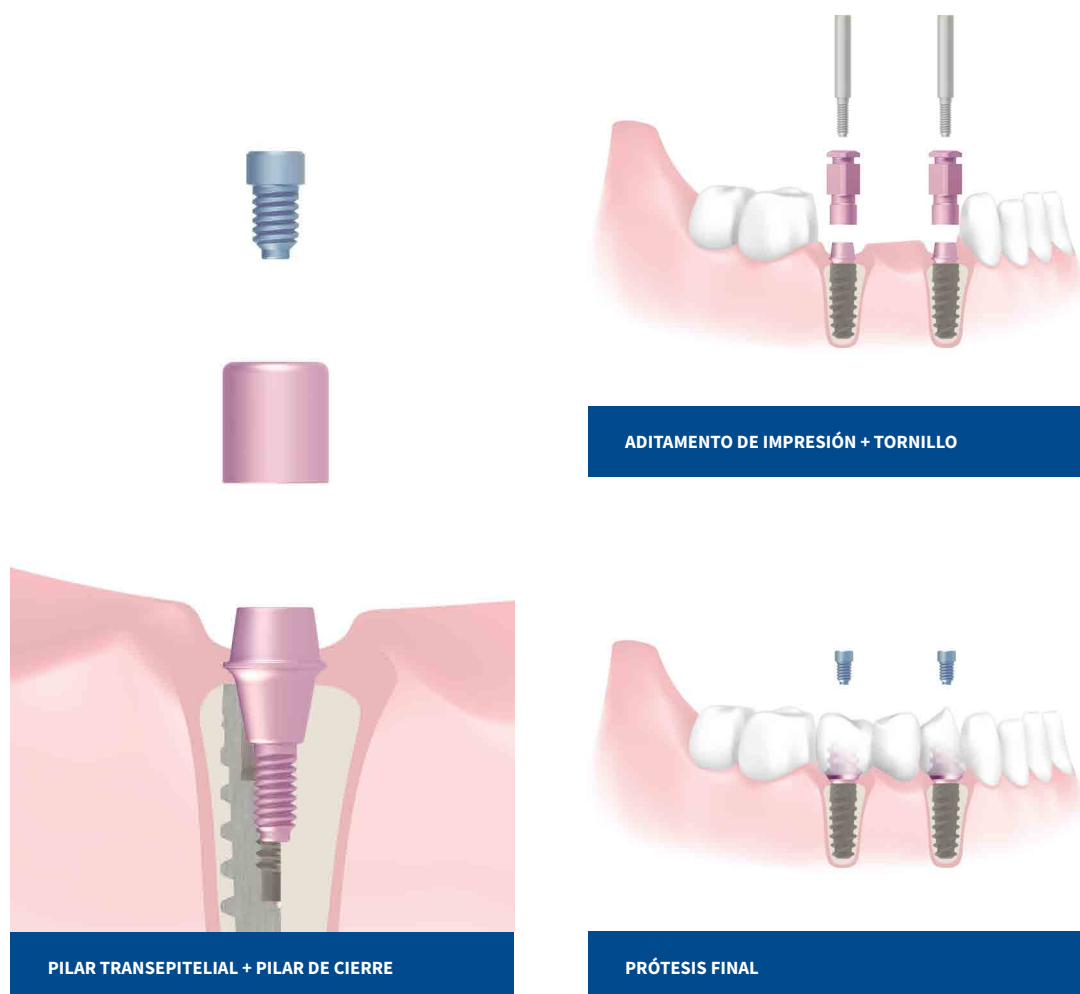

Kit multi-posición recto estético rotacional

Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. MUSR 04010	Alt. Hombro 1 mm	⊙
Ref. MUSR 04020	Alt. Hombro 2 mm	⊙
Ref. MUSR 04030	Alt. Hombro 3 mm	⊙
Ref. MUSR 04040	Alt. Hombro 4 mm	⊙
Ref. MUSR 04050	Alt. Hombro 5 mm	⊙

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. **20 mm**



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPTR 40** ⊙



Pilar calcinable

Ref. **PCMUR 4048** Ø **4 mm** ⊙

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUR 4048** Ø **4 mm** ⊙



Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø **4 mm** ⊙



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. **PSMUR 4048** Ø **4 mm** ⊙



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 135** Long. **13,5 mm**

Pilar multi-posición recto estético anti-rotacional


Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas unitarias.

Tiene una emergencia anatómica que respeta el espacio biológico.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

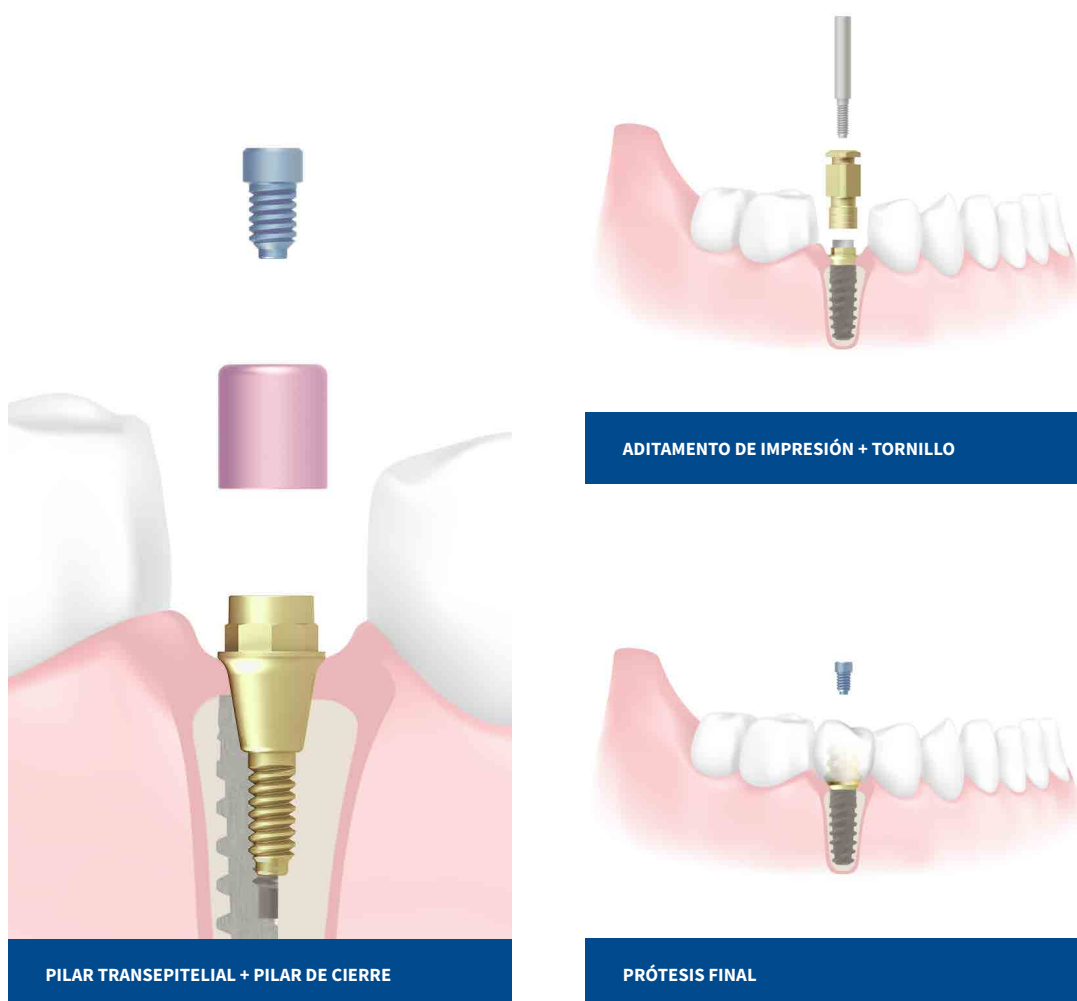

Kit multi-posición recto estético anti-rotacional

Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Una sola pieza

Ref. MUSA S04020	Alt. Hombro 2 mm	3
Ref. MUSA S04030	Alt. Hombro 3 mm	3
Ref. MUSA S04040	Alt. Hombro 4 mm	3
Ref. MUSA S04050	Alt. Hombro 5 mm	3

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. 20 mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPT 40** 1



Pilar calcinable

Ref. **PCMUA 4048** Ø 4 mm 8

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUA 4048** Ø 4 mm 8



Réplica transepitelial

Ref. **RIT SB 40** Ø 4 mm 3



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. **PSMUA 4048** Ø 4 mm 8



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 135** Long. 13,5 mm


Pilar multi-posición recto rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas múltiples.
Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Una sola pieza.

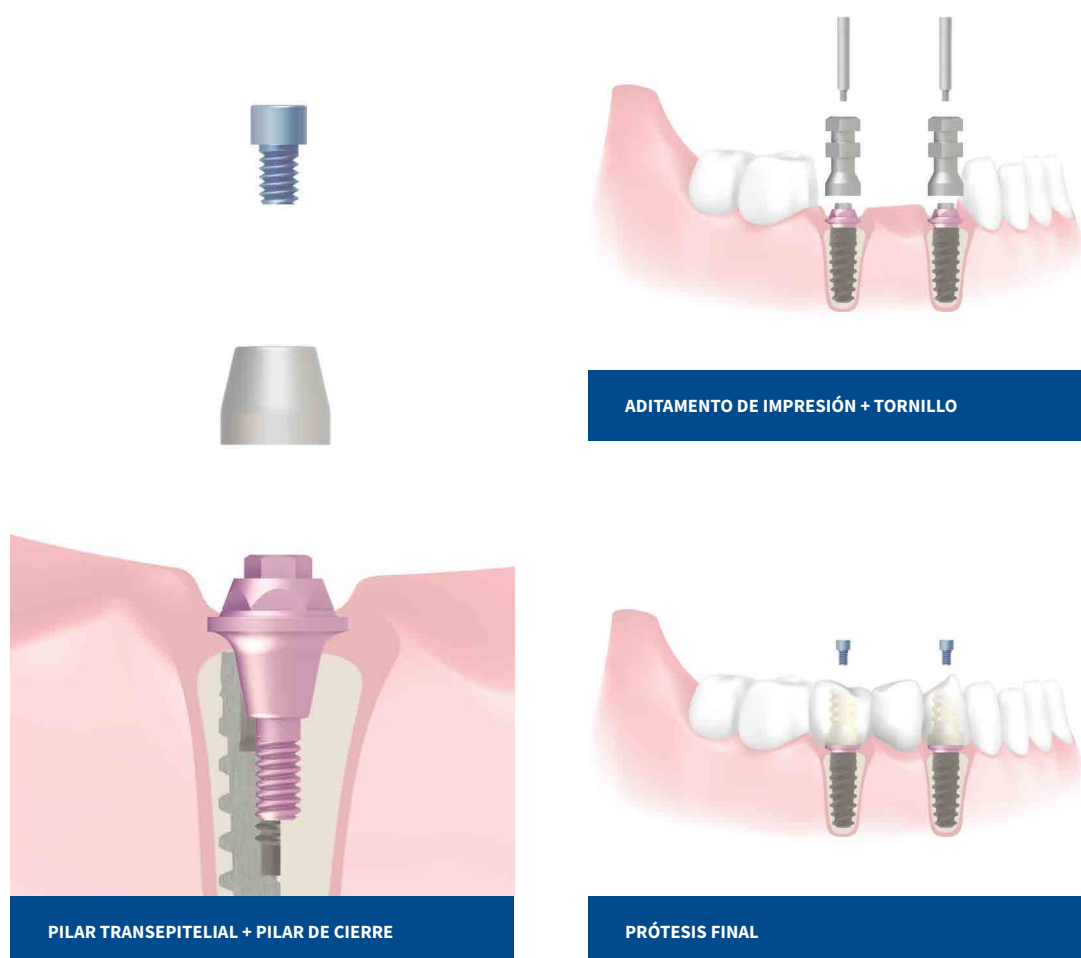

Kit multi-posición recto rotacional

Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. MUST 04010	Alt. Hombro 1 mm 
Ref. MUST 04020	Alt. Hombro 2 mm 
Ref. MUST 04030	Alt. Hombro 3 mm 

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40 x 2**



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5 mm**



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMU 40** 



Pilar calcinable

Ref. **PCMUTR 40** Ø **4,8 mm** 

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUTR 40** Ø **4,8 mm** 



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8 mm** 

Compatible con

Llave multi-posición larga

Ref. **LLCAMU 244**



Llave multi-posición corta

Ref. **LLCAMU 174**



Pilar multi-posición angulado

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis atornilladas múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15° hasta 60°. Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Corrige grandes disparalelismos de los implantes.



Kit multi-posición angulado

Para **conexión interna**

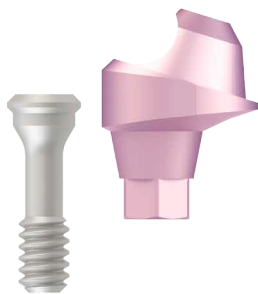

Pilar transeptal (Ti)

Ref. MU 1504020	15°	Alt. Hombro 2 mm	⊙
Ref. MU 1504030	15°	Alt. Hombro 3 mm	⊙
Ref. MU 3004030	30°	Alt. Hombro 3 mm	⊙
Ref. MU 3004040	30°	Alt. Hombro 4 mm	⊙
Ref. MU 4504050	45°	Alt. Hombro 5 mm	⊙
Ref. MU 5004050	50°	Alt. Hombro 5 mm	⊙
Ref. MU 6004050	60°	Alt. Hombro 5 mm	⊙

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. TMUT 40 x 2



Pilar de cierre transeptal

Ref. PCM 4030



Tornillo aditamento de impresión

Ref. TAIPMU 135 Long. 13,5 mm



Aditamento de impresión transeptal

Ref. AIPMU 40 ⊙



Pilar calcinable

Ref. PCMUTR 40 ∅ 4 mm ⊙



El pilar incluye **transportador**

Opcional



Pilar Titanio de carga inmediata

Ref. PTIMUTR 40 ∅ 4 mm ⊙



Réplica transeptal

Ref. RIMA SB 40 ∅ 4,8 mm ⊙

Pilar overdent

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis implanto-retenidas o implanto-soportadas.
Permite corregir la angulación de los implantes hasta 10°.

Existe un pilar calcinable que se usa como mecanismo de retención en la fabricación de barras para prótesis removibles.

El conjunto de procesado dispone de teflones de mayor y menor retención.



PREPARACIÓN TAPA + RETENEDOR



PILAR OVERDENT



PRÓTESIS FINAL

Pilar overdent

Para **conexión interna**



Pilar overdent (Ti)

Ref. PKO 04008	Ø 4 mm	Alt. 0,8 mm	⊙
Ref. PKO 04016	Ø 4 mm	Alt. 1,6 mm	⊙
Ref. PKO 04030	Ø 4 mm	Alt. 3 mm	⊙
Ref. PKO 04040	Ø 4 mm	Alt. 4 mm	⊙
Ref. PKO 04050	Ø 4 mm	Alt. 5 mm	⊙
Ref. PKO 04070	Ø 4 mm	Alt. 7 mm	⊙



Pilar overdent calcinable

Ref. **PKOC 08** ⊙

Suministrado con

Tapa



Ref. **TKO 4048**

Anillo separador



Ref. **AKO 4048**

Retenedor



— Su uso está indicado para laboratorio



+

Retención

-

Ref. **RKO 4048**

Compatible con



Llave overdent

Ref. **LLKOD 250**

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø 4 mm 6

Pilar de bola


Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis implanto-retenidas o implanto-soportadas. Permite corregir la angulación de los implantes hasta 30°.

Permite corregir grandes divergencias entre los implantes.

La retención se obtiene mediante un o-ring, (se suministra ya colocado en la tapa).
Gran retención.

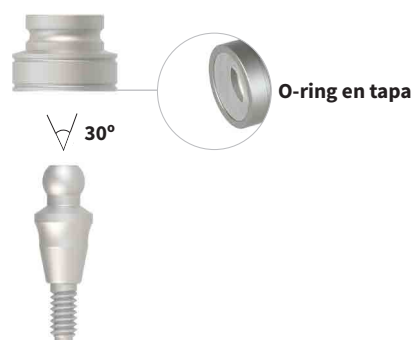

O-RING + TAPA

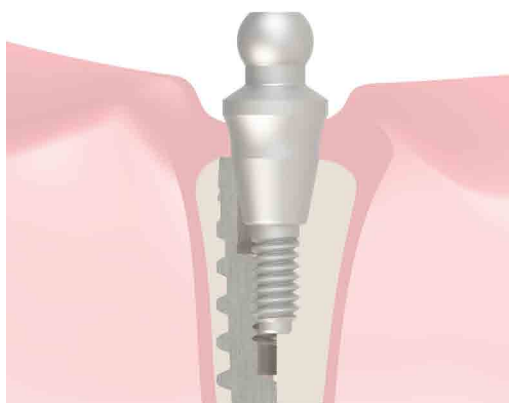

PILAR DE BOLA



PRÓTESIS FINAL

Pilar de bola

Para **conexión interna**



Pilar de bola (Ti)

Ref. PKB 04008	Alt. 0,8 mm	⊙
Ref. PKB 04016	Alt. 1,6 mm	⊙
Ref. PKB 04030	Alt. 3 mm	⊙
Ref. PKB 04040	Alt. 4 mm	⊙
Ref. PKB 04050	Alt. 5 mm	⊙

Suministrado con

Tapa



Ref. **TKB 4048**

O-ring



Ref. **OB 4048**

Anillo separador



Ref. **AKO 4048**

Compatible con



Llave manual

Ref. **LLMC 220**

Ref. **LLML 290**



Llave protésica

Ref. **LLCA 174**

Ref. **LLCA 220**

Ref. **LLCA 290**

Opcional




Réplica

Ref. **RI SB 040** $\varnothing$ 4 mm 6

Componentes protésicos

Para **conexión externa**

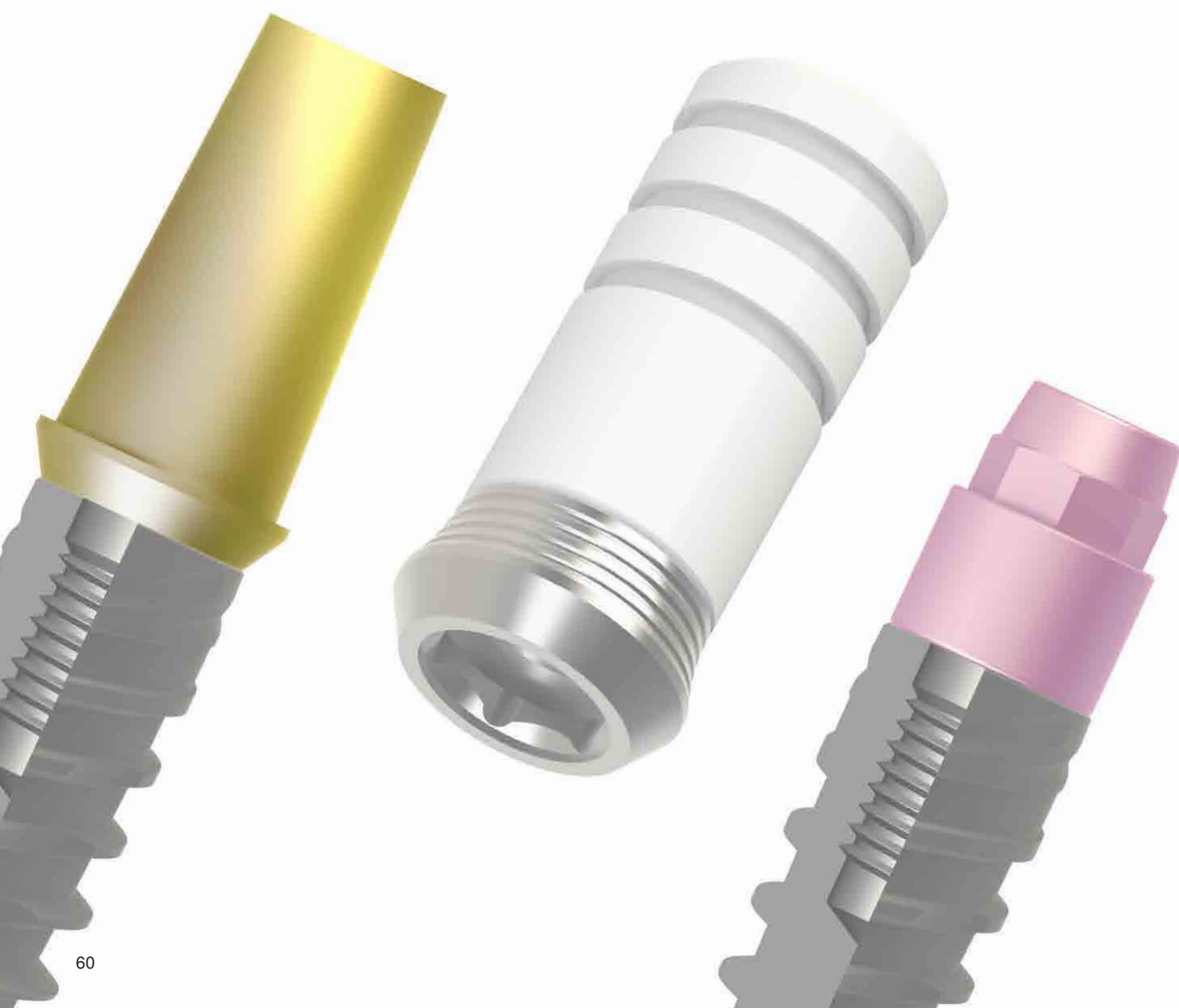

CE

Amplia gama de soluciones protésicas

Esquema protésico

Pág. 66

Prótesis de carga inmediata

Pág. 70

Prótesis cementada

Pág. 72

Prótesis cemento-atornillada

Pág. 76

Prótesis atornillada

Pág. 78

Prótesis removible

Pág. 88

Esquema protésico CE




Pilares de cicatrización

Para implantes de conexión externa: IPXE

Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis cementada

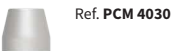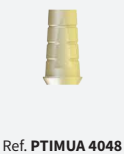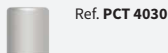

Prótesis cemento-atornillada

Pilares definitivos rectos



Ref. **PR 4000**
 Ref. **PA 4000**
 Ref. **PA 4010**
 Ref. **PA 4030**
 Ref. **PA 4050**

Pilares definitivos angulados



Ref. **PA 154010** Ref. **PA 304010**
 Ref. **PA 154030** Ref. **PA 304030**
 Ref. **PA 154050** Ref. **PA 304050**

Tornillos



Ref. **TP 4048 x 2**

Conjunto de procesado



Ref. **PGZA 40**



Ref. **TP 4048 x 2**



Ref. **MUS 4020**
 Ref. **MUS 4030**
 Ref. **MUS 4050**



Ref. **PITEMUA 4040**



Ref. **TMU 4048 x 2**



Ref. **MUST 4010**
 Ref. **MUST 4020**
 Ref. **MUST 4030**



Ref. **PITEMUTR 4040**



Ref. **MU 154020**
 Ref. **MU 154030**



Ref. **MU 304030**
 Ref. **MU 304040**



Ref. **PITEMUTR 4040**



Ref. **TMUT 40 x 2**

Esquema protésico CE

Pilares de cicatrización

Para implantes de conexión externa: IPXE

Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis atornillada



Ref. **PC 4010**



Ref. **PC 4020**
Ref. **PC 4040**
Ref. **PC 4060**



Ref. **PCC 4040**
Ref. **PCC 4060**



Ref. **AIP 40**



Ref. **TAIP 135**



Ref. **TAIP 200**



Ref. **PCIA 40**
Ref. **PCIR 40**



Ref. **RI 40**



Ref. **PCT 4030**



Ref. **AIPT 40**



Ref. **TAIP 135**



Ref. **RIT 40**



Ref. **PTIMUA 4048**



Ref. **PCM 4030**



Ref. **AIPMU 40**
Ref. **AIPMUA 40**



Ref. **TAIPMU 135**



Ref. **SBT MUST**
Ref. **SBT MUSTA**



Ref. **RIMA SB 40**



Ref. **PTIMUTR 40**
Ref. **PTIMUTA 40**

Prótesis removable



Ref. **PC 4010**



Ref. **PC 4020**
Ref. **PC 4040**
Ref. **PC 4060**



Ref. **PCC 4040**
Ref. **PCC 4060**



Ref. **AIP 40**



Ref. **TAIP 135**



Ref. **TAIP 200**



Ref. **RI 40**

Pilares definitivos rectos

Pilares definitivos angulados

Tornillos

Conjunto de procesado



Ref. **MUS 4020**
Ref. **MUS 4030**
Ref. **MUS 4050**



Ref. **MUST 4010**
Ref. **MUST 4020**
Ref. **MUST 4030**



Ref. **PCMUTR 40**
Ref. **PCMUTA 40**



Ref. **MU 154020**
Ref. **MU 154030**



Ref. **MU 304030**
Ref. **MU 304040**



Ref. **PCMUTR 40**



Ref. **TMU 4048 x 2**



Ref. **TMUT 40 x 2**



Ref. **PKO 4008**
Ref. **PKO 4016**
Ref. **PKO 4030**
Ref. **PKO 4040**
Ref. **PKO 4050**
Ref. **PKO 4070**




Ref. **PKOC 08**



Ref. **TKO 4048**



Ref. **AKO 4048**

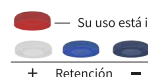

Pilar de carga inmediata


Pilar disponible en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Ambos pilares están indicados para prótesis provisionales cementadas o atornilladas.

Rotacional para prótesis múltiples.


Anti-rotacional para prótesis unitarias.

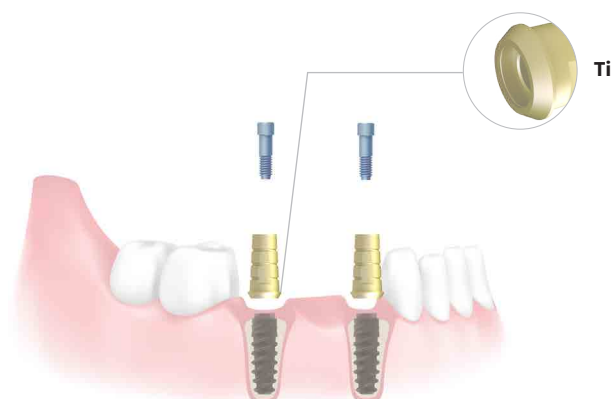

PILAR DE CARGA INMEDIATA ROTACIONAL

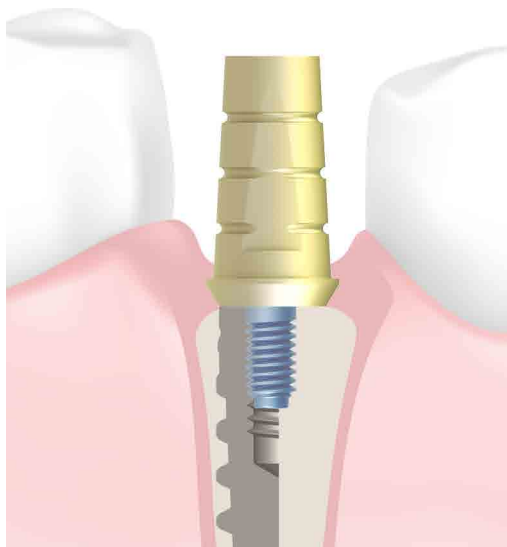

PILAR DE CARGA INMEDIATA + TORNILLO PROTÉSICO

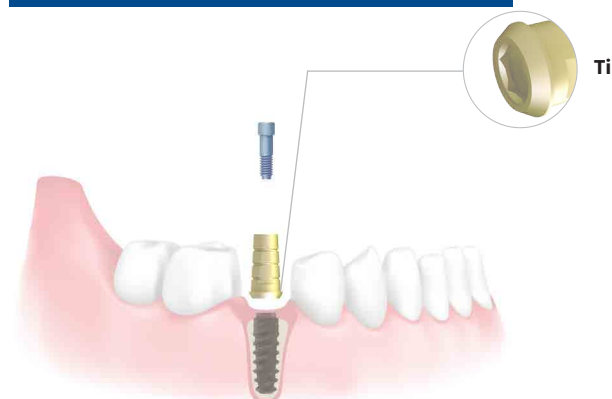

PILAR DE CARGA INMEDIATA ANTI-ROTACIONAL

Pilar de carga inmediata

Para **conexión externa**



Pilar carga inmediata rotacional (Ti)

Ref. **PCIR 40** Ø 4 mm 



Pilar carga inmediata anti-rotacional (Ti)

Ref. **PCIA 40** Ø 4 mm 

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048 x 2**

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø 4 mm 

Pilar recto

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Disponible en distintas alturas de hombro.

Indicaciones


Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples.

Rotacional para prótesis múltiples.


Anti-rotacional para prótesis unitarias.

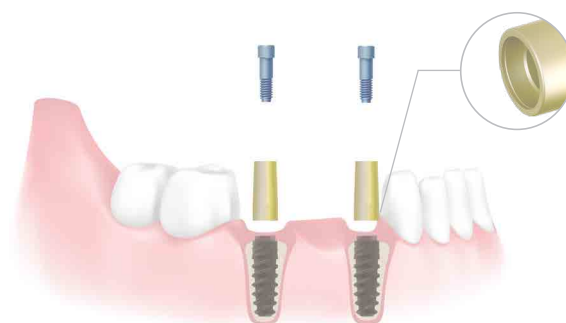

PILAR RECTO ROTACIONAL

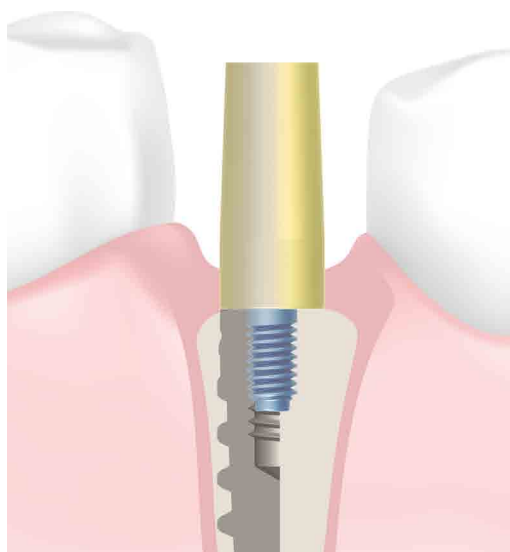

PILAR RECTO + TORNILLO PROTÉSICO

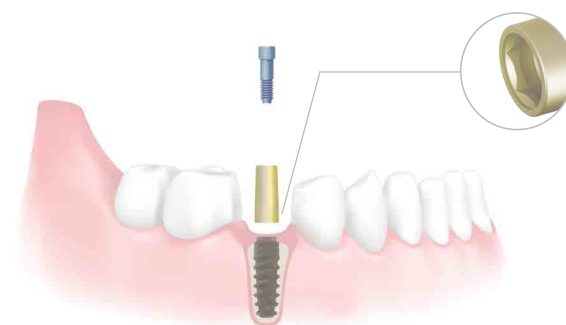

PILAR RECTO ANTI-ROTACIONAL

Pilar recto

Para **conexión externa**



Pilar recto rotacional (Ti)

Ref. **PR 4000** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm 



Pilar recto anti-rotacional (Ti)

Ref. **PA 4000** Ø 4 mm Alt. Hombro 0 mm 

Ref. **PA 4010** Ø 4 mm Alt. Hombro 1 mm 

Ref. **PA 4030** Ø 4 mm Alt. Hombro 3 mm 

Ref. **PA 4050** Ø 4 mm Alt. Hombro 5 mm 

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø 4 mm 


Pilar angulado

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Disponible en distintas alturas de hombro.

Indicaciones

Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15° hasta 30°.

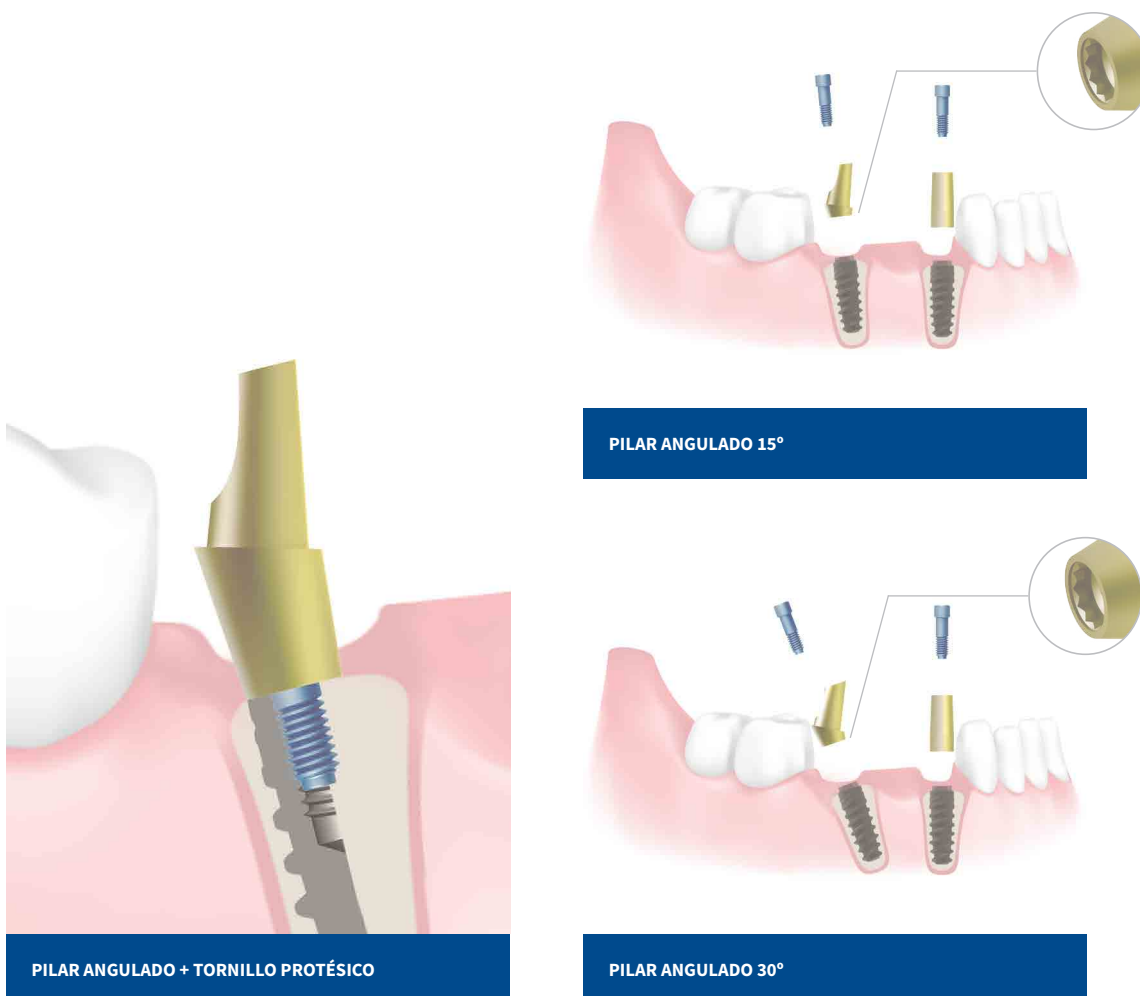

Pilar angulado

Para **conexión externa**



Pilar angulado (Ti)

Ref. PA 154010	15°	Alt. Hombro 1 mm	
Ref. PA 154030	15°	Alt. Hombro 3 mm	
Ref. PA 154050	15°	Alt. Hombro 5 mm	



Pilar angulado (Ti)

Ref. PA 304010	30°	Alt. Hombro 1 mm	
Ref. PA 304030	30°	Alt. Hombro 3 mm	
Ref. PA 304050	30°	Alt. Hombro 5 mm	

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø **4 mm**

Base para prótesis cemento-atornillada

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas usándolo como base mecanizada sobre la que se cementa la corona en el laboratorio.



Ref. **PGZA 40** Ø 4 mm 



Suministrado con dos tornillos



**Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)**

Ref. **TP 4048 x 2**

BASE PARA PRÓTESIS CEMENTO-ATORNILLADA

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø 4 mm 

Interfase para pilar multi-posición

Interfase para pilar multi-posición recto y angulado.

Fabricado en titanio grado V.

Indicaciones

Están indicadas para prótesis cemento-atornilladas múltiples.


Rotacional para prótesis múltiples.

Interfase para pilar multi-posición recto y angulado

Torque recomendado: 25 Ncm.



Ref. **PITEMUTR 4040** Alt. 4 mm 

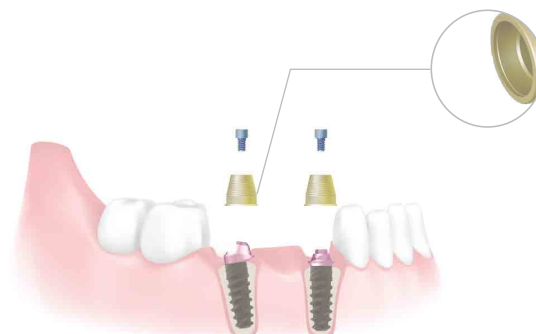

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO Y ANGULADO

Suministrado con tornillo



**Tornillo clínico (1,4 mm)
+ Tornillo lab. (1,4 mm)**

Ref. **TMUT 40 x 2**

Opcional



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø 4,8 mm 

Pilar multi-posición recto estético anti-rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas multiples. Tiene una emergencia anatómica que respeta el espacio biológico.

Puede ser utilizado tanto en el sector anterior como en el posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Una sola pieza.

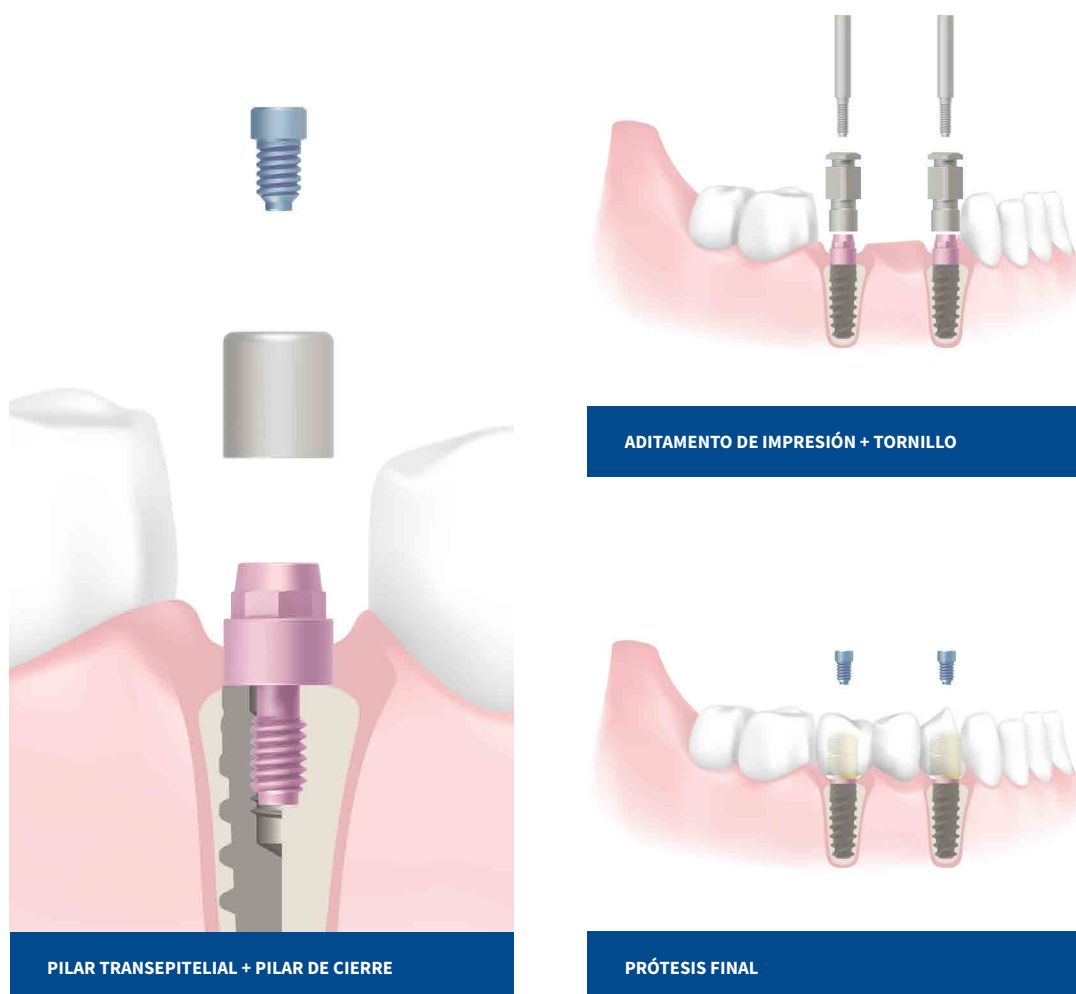

Kit multi-posición recto estético

Para **conexión externa**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. MUS 4020	Alt. Hombro 2 mm	8
Ref. MUS 4030	Alt. Hombro 3 mm	8
Ref. MUS 4050	Alt. Hombro 5 mm	8

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. 20 mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPT 40** 8



Pilar calcinable

Ref. **PCMUA 4048** Ø 4 mm 8

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUA 4048** Ø 4 mm 8



Réplica transepitelial

Ref. **RIT 40** Ø 4 mm 8

Pilar multi-posición recto rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas múltiples.
Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Una sola pieza.



ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO

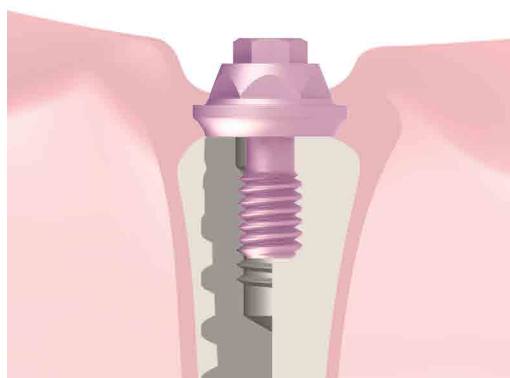

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE



PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición recto rotacional

Para **conexión externa**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. MUST 4010	Alt. Hombro 1 mm	⊙
Ref. MUST 4020	Alt. Hombro 2 mm	⊙
Ref. MUST 4030	Alt. Hombro 3 mm	⊙

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5 mm**



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMU 40** ⊙



Pilar calcinable

Ref. **PCMUTR 40** Ø **4,8 mm** ⊙

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUTR 40** Ø **4,8 mm** ⊙



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8 mm** ⊙

Compatible con

Llave multi-posición larga

Ref. **LLCAMU 244**



Llave multi-posición corta

Ref. **LLCAMU 174**




Pilar multi-posición angulado

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis atornilladas múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15° hasta 30°. Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Corrige grandes disparalelismos de los implantes.

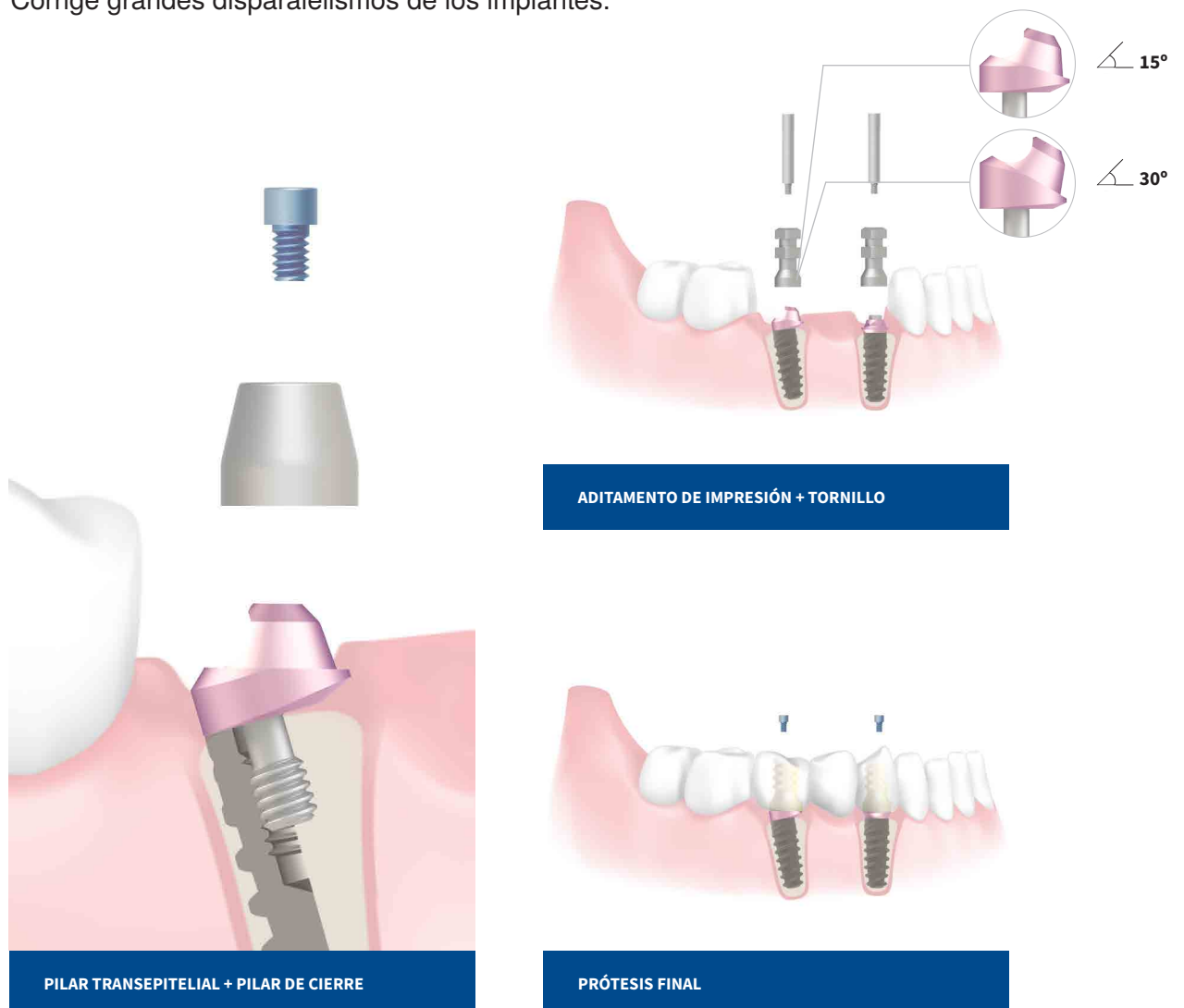


Kit multi-posición angulado

Para **conexión externa**

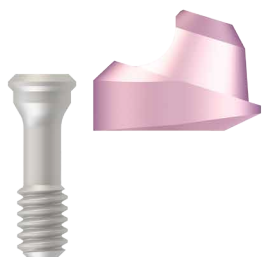

Pilar transepitelial (Ti)

Ref. MU 154020	15°	Alt. Hombro 2 mm	⊙
Ref. MU 154030	15°	Alt. Hombro 3 mm	⊙

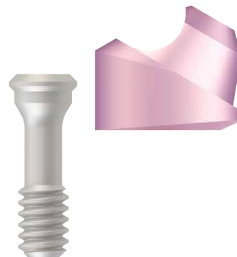

Pilar transepitelial (Ti)

Ref. MU 304030	30°	Alt. Hombro 3 mm	⊙
Ref. MU 304040	30°	Alt. Hombro 4 mm	⊙

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40 x 2**



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5 mm**



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMU 40** ⊙



Pilar calcinable

Ref. **PCMUTR 40** Ø **4,8 mm** ⊙



El pilar incluye **transportador**

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUTR 40** Ø **4,8 mm** ⊙



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8 mm** ⊙

Pilar overdent

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis implanto-retenidas o implanto-soportadas.
Permite corregir la angulación de los implantes hasta 10°.

Existe un pilar calcinable que se usa como mecanismo de retención en la fabricación de barras para prótesis removibles.

El conjunto de procesamiento dispone de teflones de mayor y menor retención.



PREPARACIÓN TAPA + RETENEDOR

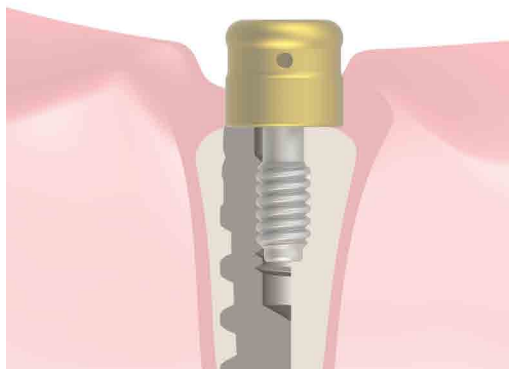

PILAR OVERDENT



PRÓTESIS FINAL

Pilar overdent

Para **conexión externa**



Pilar overdent (Ti)

Ref. PKO 4008	Ø 4 mm	Alt. 0,8 mm	⊙
Ref. PKO 4016	Ø 4 mm	Alt. 1,6 mm	⊙
Ref. PKO 4030	Ø 4 mm	Alt. 3 mm	⊙
Ref. PKO 4040	Ø 4 mm	Alt. 4 mm	⊙
Ref. PKO 4050	Ø 4 mm	Alt. 5 mm	⊙
Ref. PKO 4070	Ø 4 mm	Alt. 7 mm	⊙



Pilar overdent calcinable

Ref. **PKOC 08** ⊙

Suministrado con

Tapa



Ref. **TKO 4048**

Anillo separador



Ref. **AKO 4048**

Retenedor

 — Su uso está indicado para laboratorio



+ Retención -
Ref. **RKO 4048**

Compatible con

Llave overdent

Ref. **LLKOD 250**



Opcional

Réplica

Ref. **RI 40** Ø 4 mm ⬡






Precisión y facilidad

Simulación de implantes dentales en 3D. Una operación segura, eficiente y práctica.


Planificación

Planifique sus implantes protesicamente guiados y seleccione los aditamentos protésicos más adecuados.

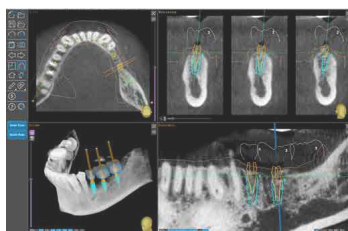

Simulación en 2D y 3D


Simulación de implantes en los modelos 2D y 3D. Completa identificación del canal mandibular. Creación de imágenes panorámicas.

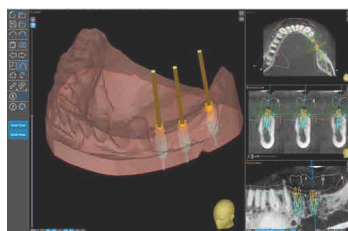

Software exclusivo

Un software que permite la simulación en 3D de la planificación de los implantes directamente en su ordenador para el diseño de guías quirúrgicas.




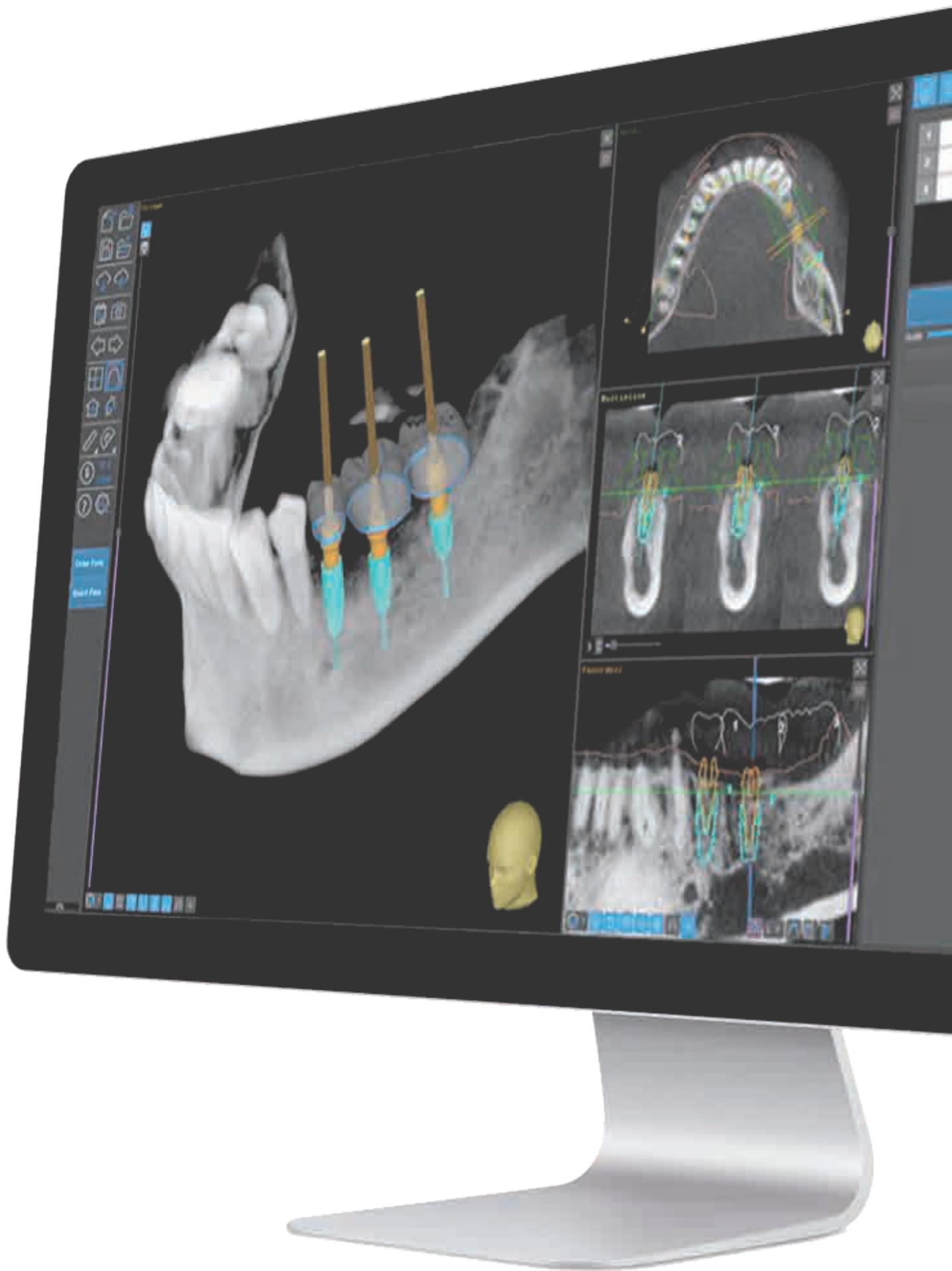




Planificación Galimplant 3D

Flujo de requerimientos y tiempo de espera

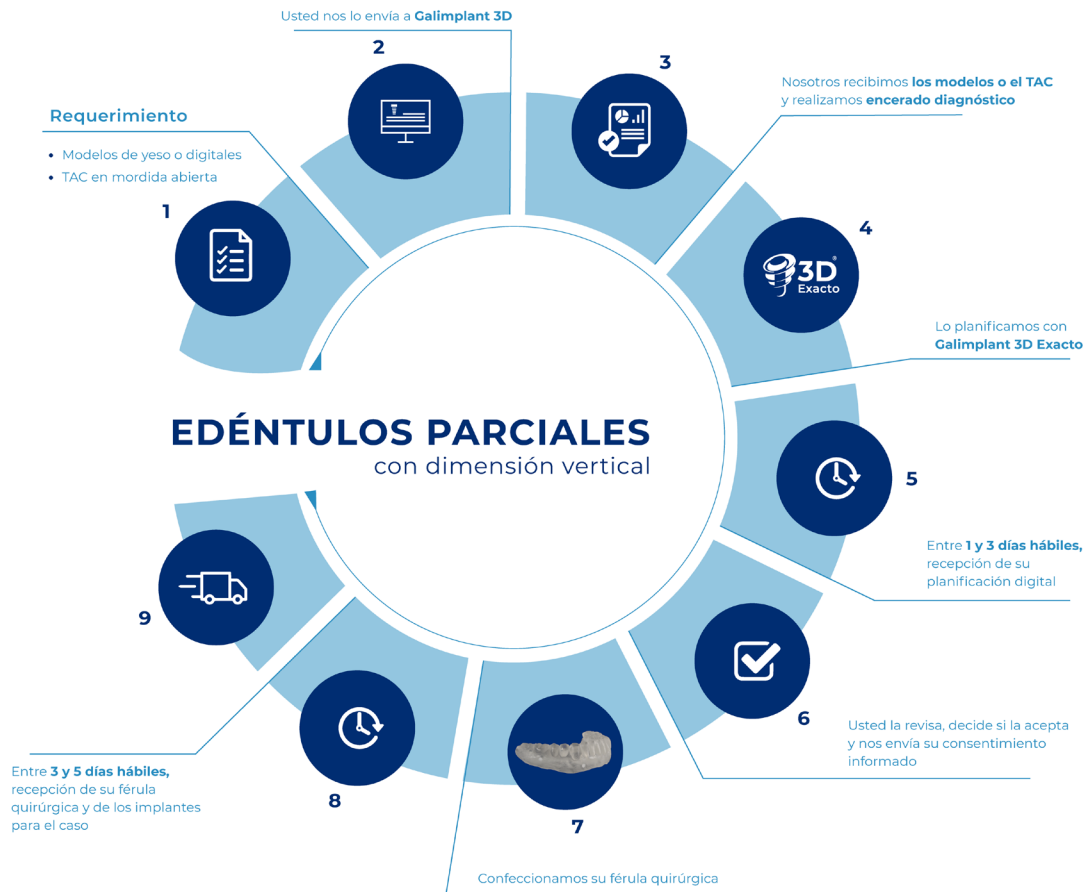

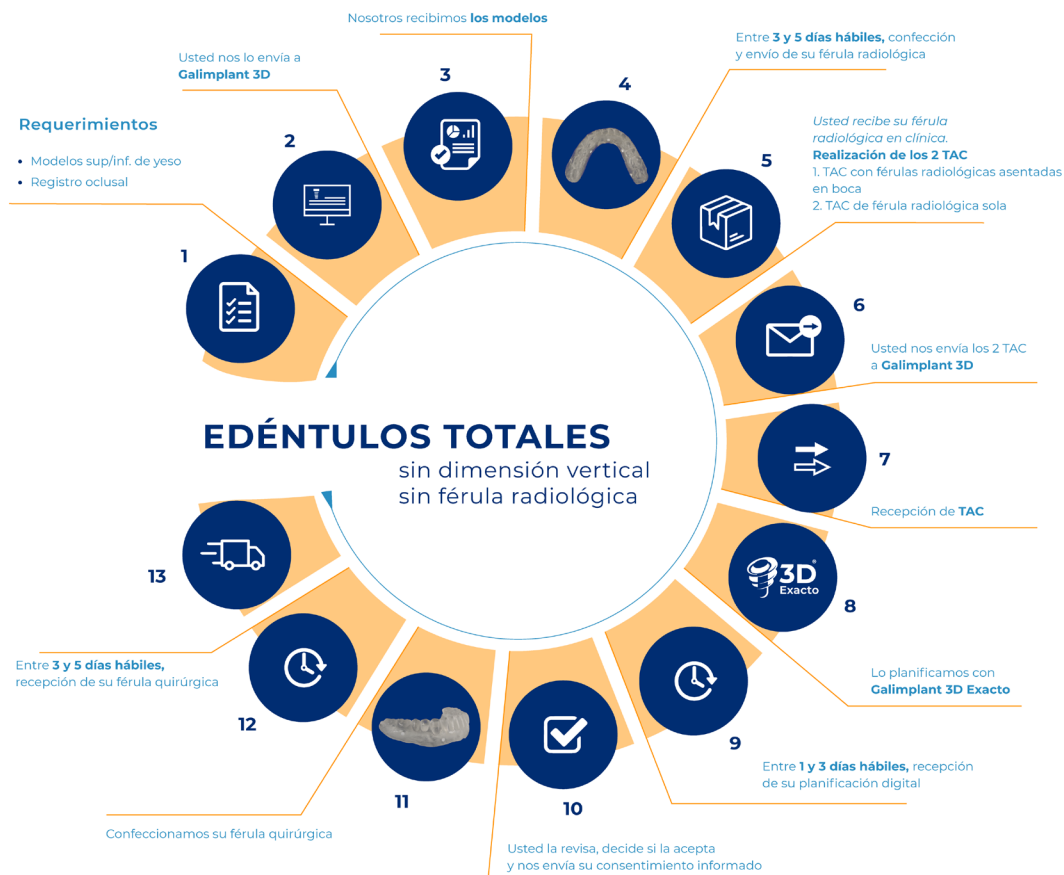

Regenerador óseo

Osteoblast Plus



0,5 g Ref. **OPT021005G**

1 g Ref. **OPT021015G**

Estéril e indicado para utilizarse como material de relleno, sin responsabilidad de carga, en cavidades óseas maxilares y mandibulares producidas por un defecto óseo o como consecuencia de una intervención quirúrgica.

Su uso está indicado para aplicaciones del tipo:

- ✓ Relleno de cavidades óseas obtenidas tras extracción dentaria a fin de evitar la reabsorción del proceso alveolar.
- ✓ Relleno de cavidades quirúrgicas originadas por la exodoncia de dientes totalmente incluidos.
- ✓ Relleno de cavidades quirúrgicas generadas tras apicetomía y quistectomía periapical.
- ✓ Recubrimiento de las fenestraciones óseas que se producen en aquellos casos en los que la dimensión vestíbulo-lingual de la cresta alveolar es reducida.
- ✓ Relleno de defectos de ajuste en los márgenes que quedan entre los onlays de hueso autólogo y lecho quirúrgico.
- ✓ Relleno de cavidades óseas generadas por la pérdida de un diente definitivo en edades en las que no es factible su sustitución por un implante.
- ✓ Como material adyuvante para que los resultados estéticos sean óptimos, como suele ocurrir en el caso de las exodoncias del frente anterior, previniendo así el colapso del hueso y la encía.
- ✓ Elevaciones del seno maxilar.

Membranas

Reabsorbibles de origen equino, hemostáticas y estériles.

Su uso está indicado en cirugía maxilar y en implantología para aplicaciones de tipo:

- ✓ Recubrimiento de defectos y fijación de materiales de aumento en el campo de la regeneración ósea guiada.
- ✓ Recubrimiento de la pared externa del seno y de pequeñas perforaciones de la mucosa sinusal en las cirugías de elevación del seno maxilar.
- ✓ Cirugías de relleno óseo como membrana de barrera.
- ✓ Recubrimiento de alvéolos post extracción.
- ✓ Recubrimiento de implantes y rellenos maxilares laterales.
- ✓ Protección de la membrana sinusal de Schneider.

Membrana cover[®]

Membrana de colágeno

Tamaño: 30 x 25 x 0,2 mm

Biocompatibilidad (1-5): 5

Tiempo de degradación: 4-6 semanas

Hidratación (minutos): 1-2 minutos en suero fisiológico

Aguanta tensión (1-5): 4

Fijación: Sí, mediante sutura o chinchetas. No necesario en pequeños defectos y/o contenidos.

Engrosa biotipo: 0,3 a 0,5 mm

Indicaciones:

- Reparación de pequeñas perforaciones de la membrana sinusal.
- Fenestraciones en implantes.
- Contención de biomaterial para aumento de volumen.

Ref. **CVR-01**

Membrana heart[®]

Membrana de pericardio

Tamaño: 50 x 30 x 0,2 mm

Biocompatibilidad (1-5): 5

Tiempo de degradación: 12-16 semanas

Hidratación (minutos): 1-2 minutos en suero fisiológico

Aguanta tensión (1-5): 5

Fijación: Sí, mediante sutura o chinchetas. No necesario en pequeños defectos y/o contenidos.


Engrosa biotipo: 0,1 a 0,3 mm

Indicaciones:

- Grandes perforaciones membrana sinusal.
- Defecto horizontal dentro del marco óseo. Hasta grandes defectos.
- Protección de injertos corticales o RTG.

Ref. **HRT-002**


Cajas quirúrgicas

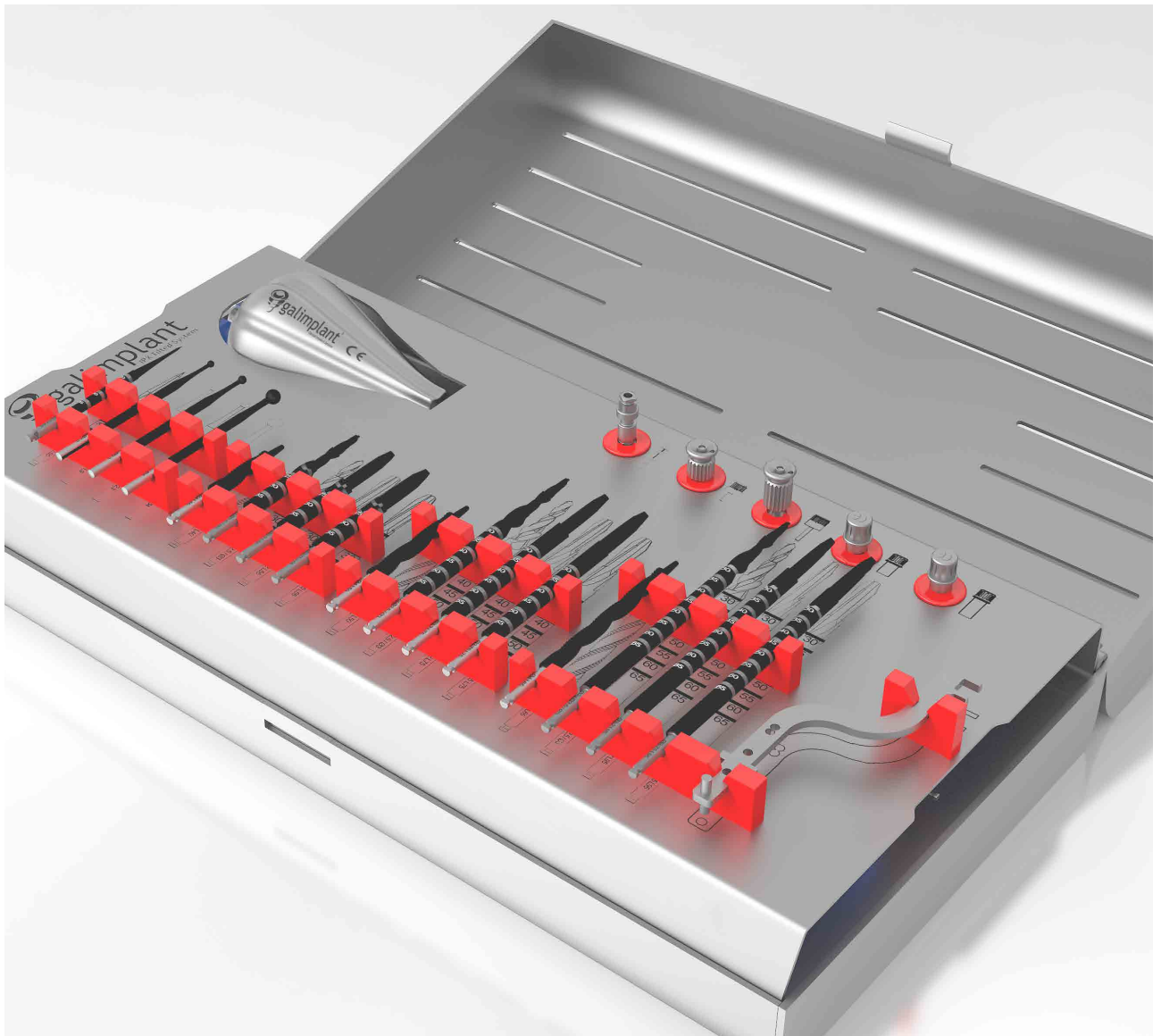

Caja para implantes cigomáticos

Contiene las herramientas necesarias para la colocación de implantes cigomáticos Galimplant®.


Ref. CQ CM

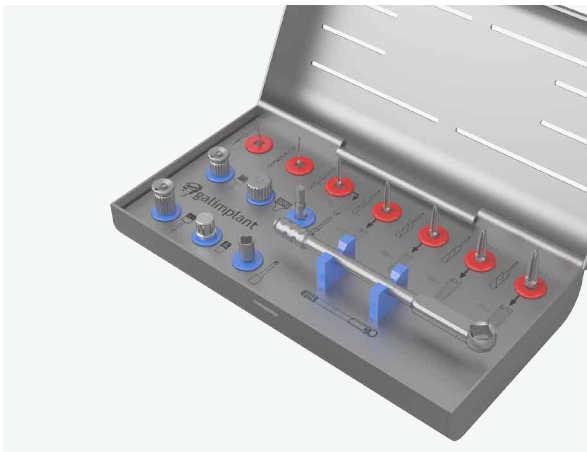

Caja quirúrgica mini

Ref. CQM IMPL


Esta caja quirúrgica contiene lo mínimo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®**.

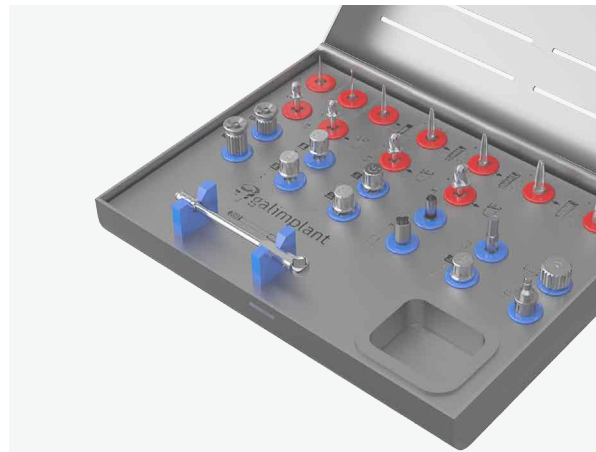

Caja quirúrgica

Ref. CQ IMPL


Esta caja quirúrgica contiene todo lo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®** y su prótesis.

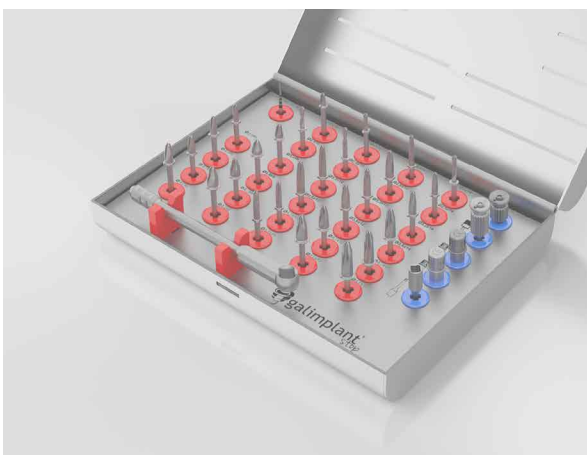

Caja fresas con tope

Ref. CQ STOP


Esta caja quirúrgica contiene fresas con tope para la colocación de los implantes **Galimplant®**.

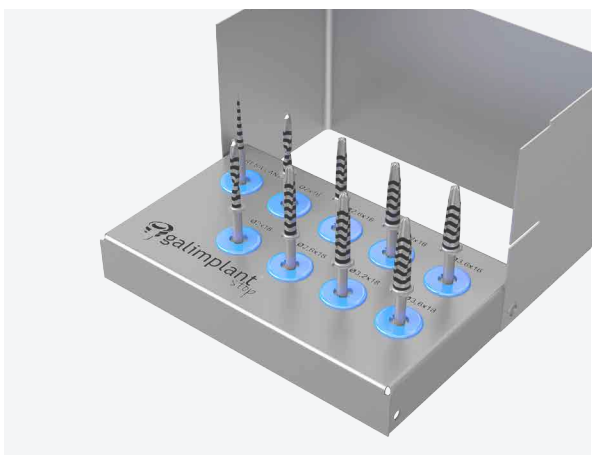

Caja fresas especiales

Ref. C FESP L


Contiene 2 grupos de fresas para longitudes especiales.

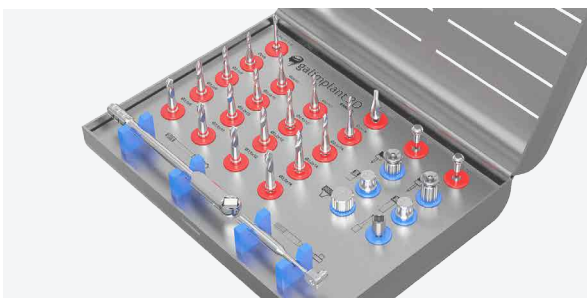

Caja cirugía guiada

Ref. CQ 3D


Diseñada para realizar cualquier cirugía guiada con el sistema **Galimplant 3D exacto**.

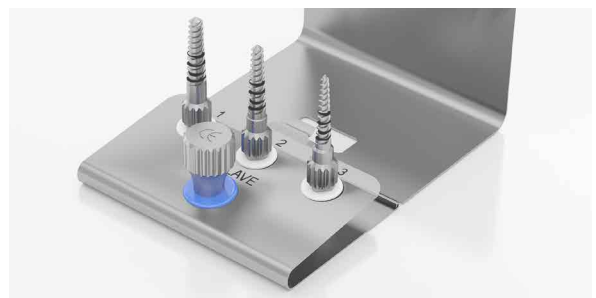

Osteótomos

Ref. C OST

Contiene 3 dilatares óseos de diferentes diámetros.

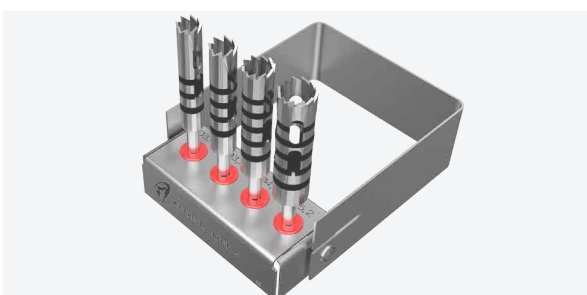

Trefinas

Ref. C TREF


Contiene 4 trefinas de diferentes diámetros.



Extractores

Ref. KIT EXT/LE

Contiene 4 extractores de diferentes diámetros.

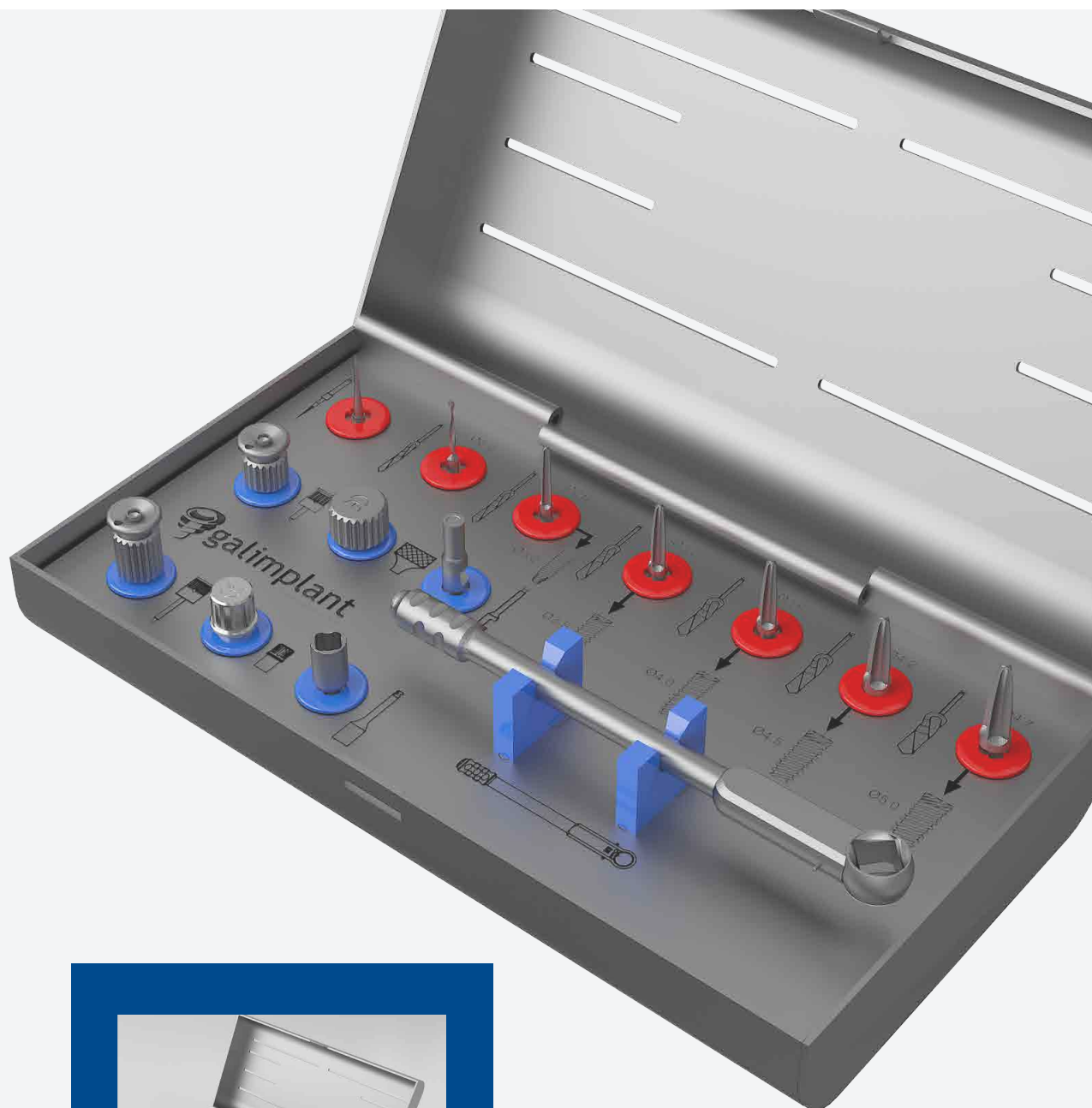

Caja quirúrgica mini

Esta caja quirúrgica contiene lo mínimo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®**.

Mini

Caja quirúrgica mini

Ref. **CQM IMPL**

Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresa lanza

Fresas de diferentes diámetros

Llaves

Dado manual

Dado directo corto


Prolongador de fresas

Llave motor

Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.

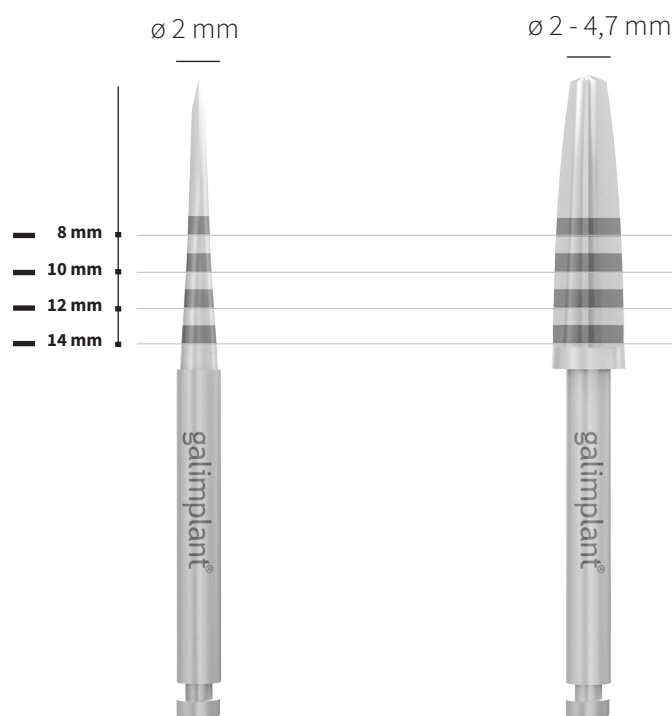


Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.

Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **8 mm, 10 mm, 12 mm y 14 mm.**

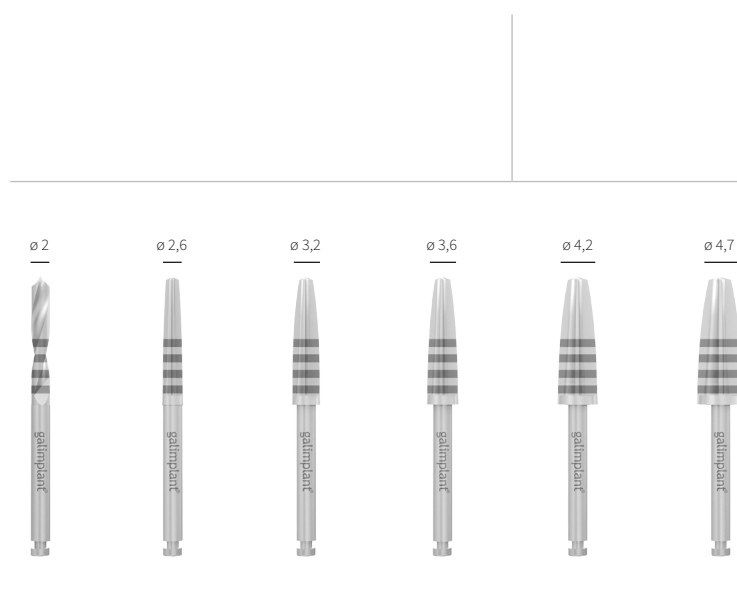

Ref. **K FRES**

Mini



Llave dual corta (17,4 mm)

Ref. **LLDC 174**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Dado manual

Ref. **DMA 150**

Conectado al porta-implante, se utiliza para insertar el implante de forma manual.



Llave dual larga (29 mm)

Ref. **LLDL 290**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Prolongador de fresas

Ref. **P FRES**

Incrementa la longitud de cualquier fresa del sistema **Galimplant®**.



Llave motor

Ref. **LLM 215**

Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Carraca no dinamométrica

Ref. **CA N/DIN**

Permite insertar el implante de forma manual.



Caja quirúrgica

Esta caja quirúrgica contiene todo lo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®** y su prótesis.

Quirúrgica

Caja quirúrgica

Ref. CQ IMPL

Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresa lanza

Fresas de diferentes diámetros

Fresas con tope para implantes de 6 mm

Llaves

Dados

Bisturí circular

Llave motor

Prolongador de fresas

Llave para carraca directa a implante


Dado manual

Llave overdent

Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.

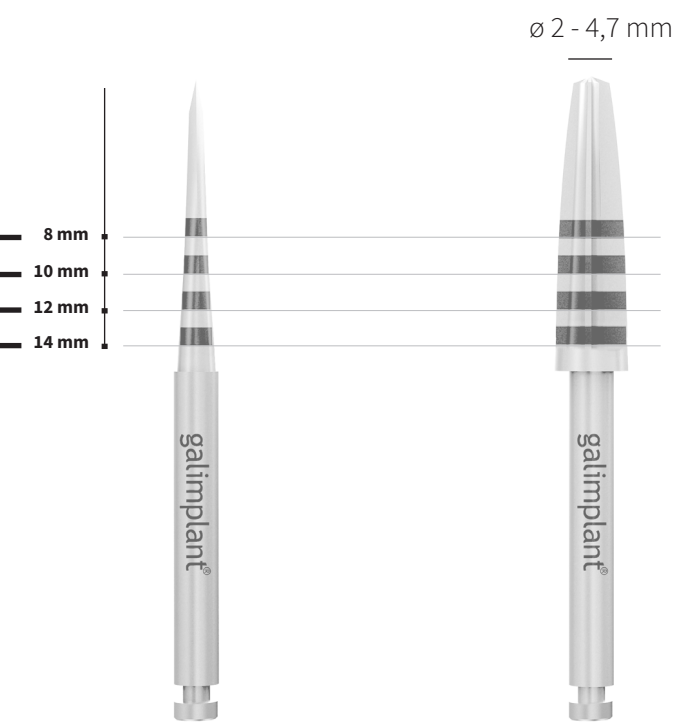

Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.


Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.
Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **8 mm, 10 mm, 12 mm y 14 mm.**




Fresas con tope

Para crear el lecho en dirección y profundidad del implante de **6 mm** de longitud.

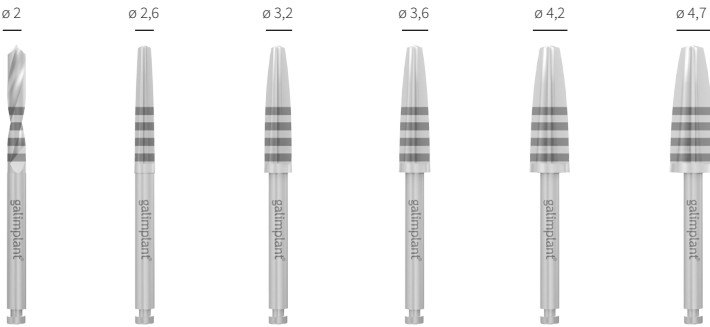

Ref. **K FRES**

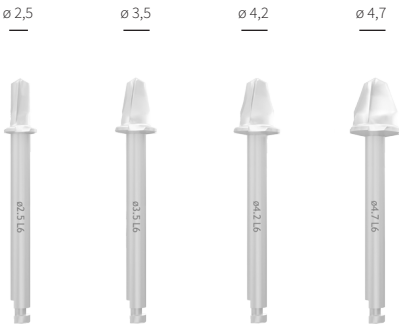

Ref. **K FRES L6**



Llave dual corta (17,4 mm)

Ref. **LLDC 174**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Llave protésica corta

Ref. **LLCA 220**

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Llave dual larga (29 mm)

Ref. **LLDL 290**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Llave protésica larga

Ref. **LLCA 290**

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Bisturí circular

Ref. **BC 102340**

Diseñado para conectar al contra-ángulo del motor y realizar cortes de $\varnothing 4$ mm en la mucosa.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave motor

Ref. **LLM 215**

Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Dado largo

Ref. **DL 244**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Prolongador de fresas

Ref. **P FRES**

Incrementa la longitud de cualquier fresa del sistema **Galimplant®**.



Llave para carraca directa a implante

Ref. **LLCAI 220**

Con la ayuda de la carraca y conectada directamente a la conexión interna de los implantes **Galimplant®**, permite su inserción.



Dado manual

Ref. **DMA 150**

Conectado al porta-implante, se utiliza para insertar el implante de forma manual.



Llave overdent

Ref. **LLKOD 250**


Por el extremo cuadrado permite atornillar el pilar overdent y por el extremo opuesto posibilita la colocación del retenedor sobre la tapa overdent.



Carraca no dinamométrica

Ref. **CA N/DIN**

Permite insertar el implante de forma manual.

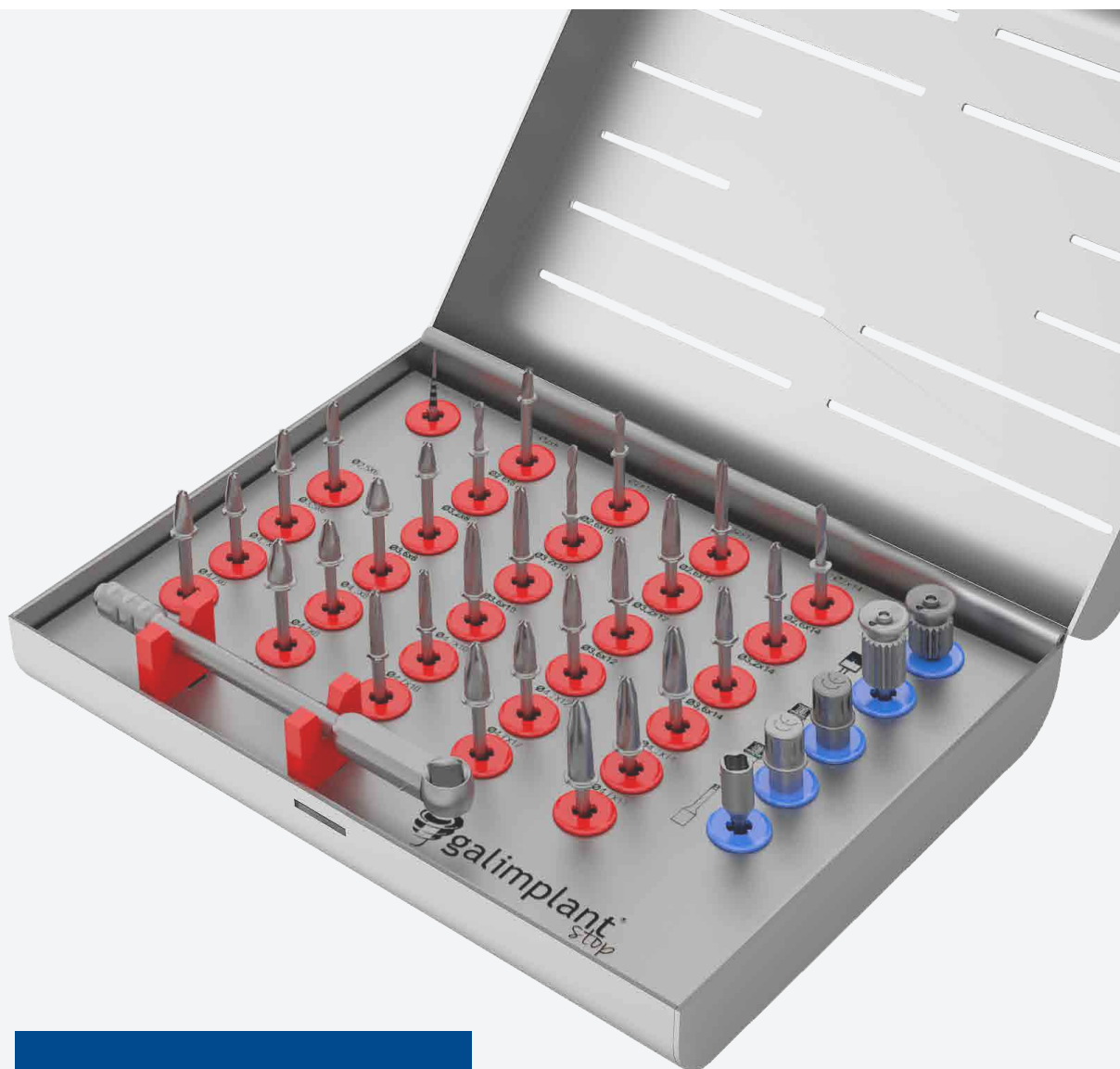

Caja quirúrgica stop

Esta caja quirúrgica contiene fresas con tope para la colocación de los implantes **Galimplant®**

Stop

Caja fresas con tope

Ref. **CQ STOP**

Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresa lanza

5 grupos de fresas con tope de diferentes diámetros y longitudes


Llaves

Dados

Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.

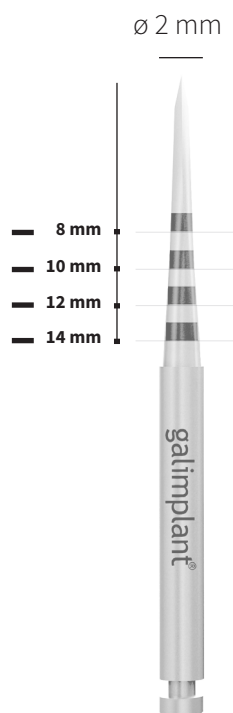

Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.



Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm y 14 mm**.



Ref. K FRES STOP

Stop



Llave dual corta (17,4 mm)

Ref. LLDC 174

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Dado corto

Ref. DC 144

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave dual larga (29 mm)

Ref. LLDL 290

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Llave para carraca directa a implante

Ref. LLCAI 220

Con la ayuda de la carraca y conectada directamente a la conexión interna de los implantes **Galimplant®**, permite su inserción.



Llave motor

Ref. LLM 215


Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Carraca no dinamométrica

Ref. CA N/DIN

Permite insertar el implante de forma manual.

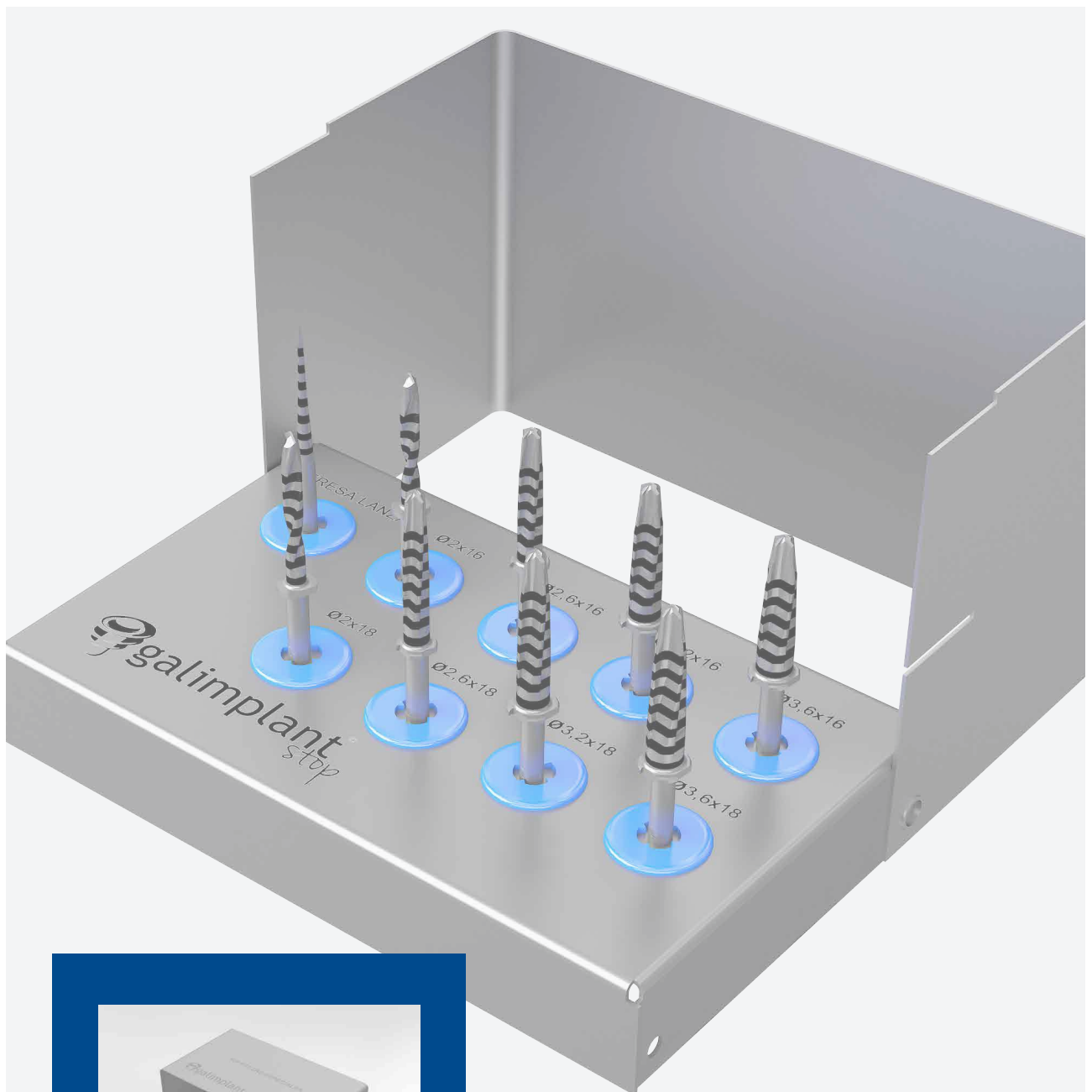

Fresas especiales


Contiene 2 grupos de fresas para longitudes especiales.

Fresas especiales

Ref. **C FESP L**

Caja de fresas con tope diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitud 16 y 18 mm.

Fabricadas en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.
Se pueden utilizar como fresas largas, marcadas para colocar implantes desde 6 mm de longitud.

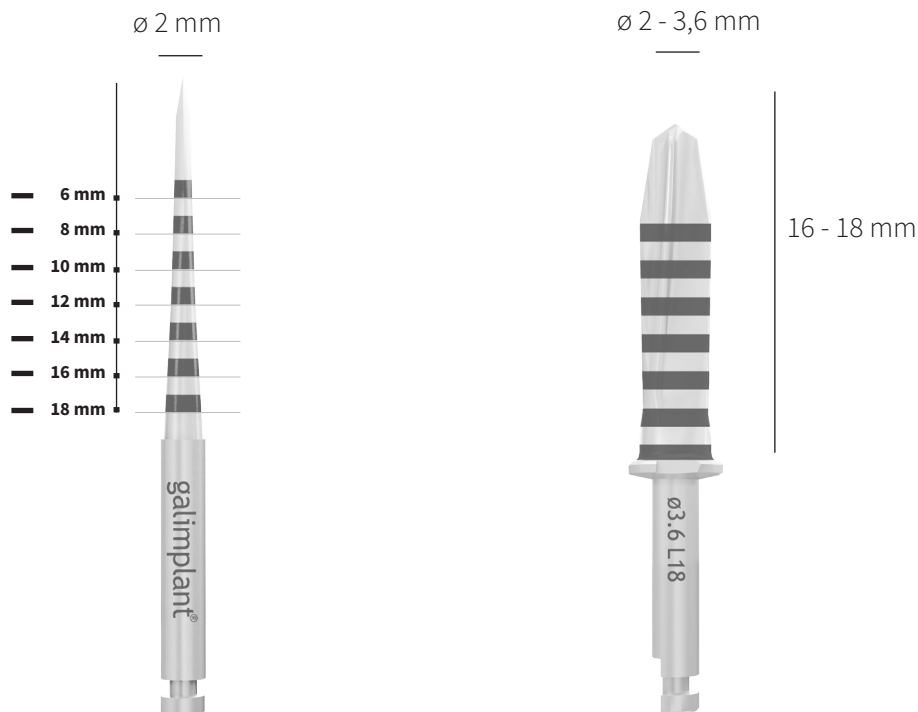


Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.


Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **16 mm y 18 mm**.

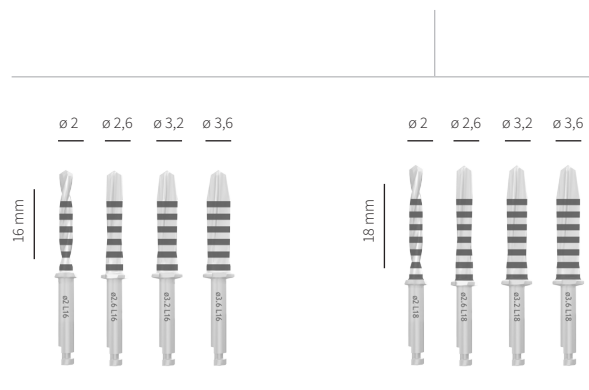

Ref. **K FESP L**

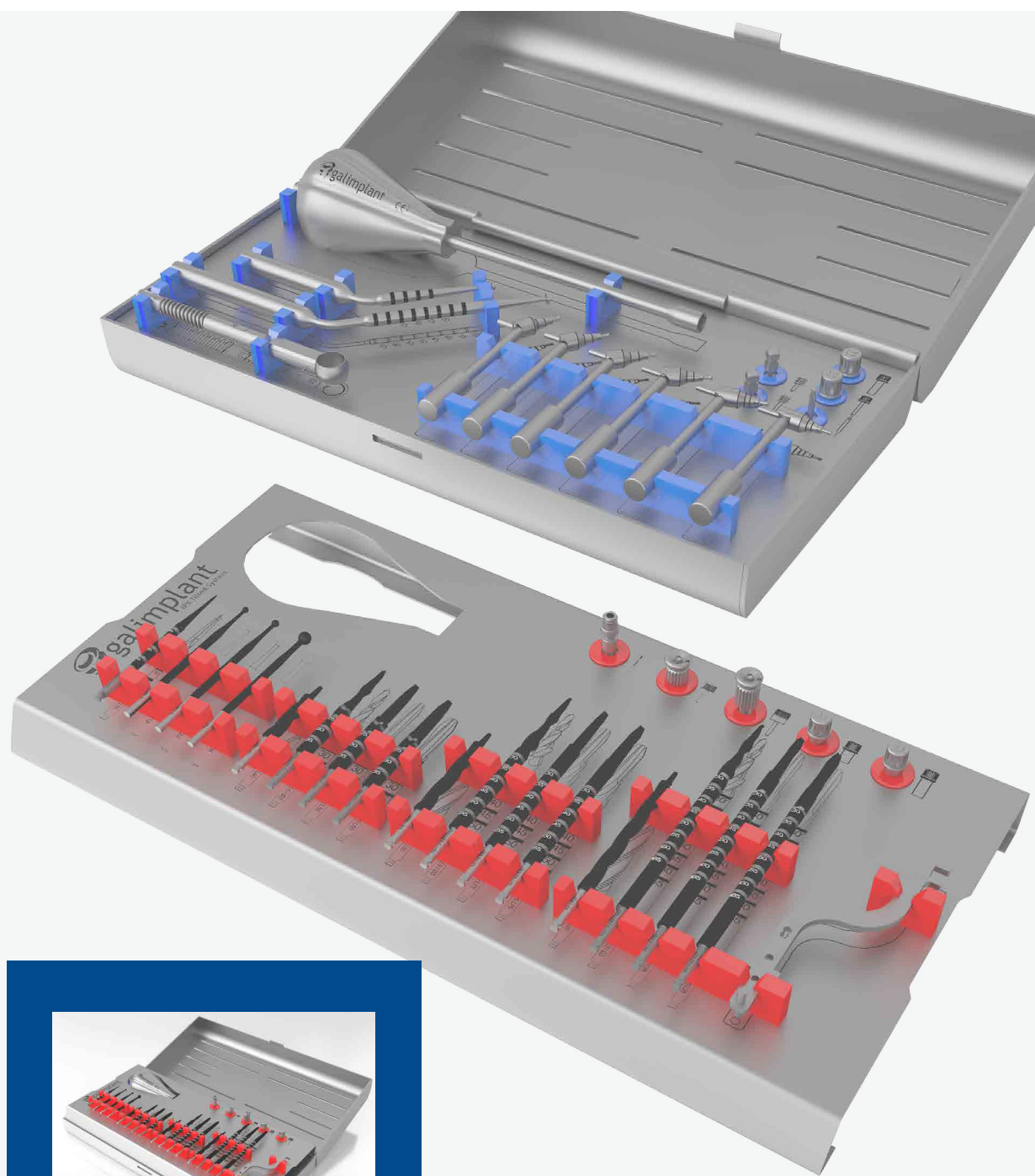

Caja cigomáticos

Contiene fresas y herramientas necesarias para la instalación de implantes cigomáticos. Además, contiene aditamentos para la selección y colocación de pilares transeptiliales.

Cigomáticos

Caja para implantes cigomáticos

Ref. **CQ CM**


Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

- Fresa lanza extra larga
- Fresas de bola
- Fresas de avellanado lateral
- 3 grupos de fresas de diferentes longitudes
- Llaves quirúrgicas y protésicas
- Dados
- Llave fiador
- Portaimplante largo
- Destornillador manual
- Indicadores de profundidad de implantes cigomáticos
- Indicadores de angulación de pilares multi-posición
- Carraca dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.

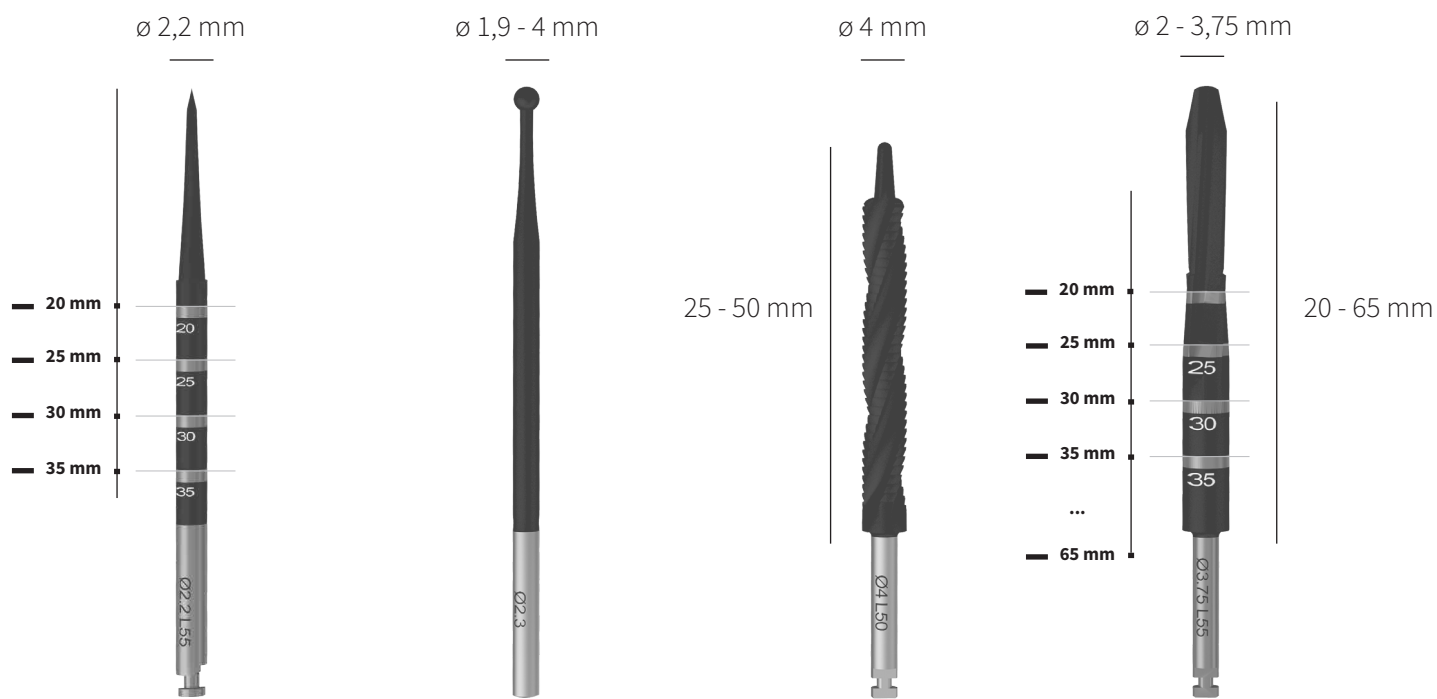

Fresa lanza extra larga

Se usa para perforar la cortical y marcar la dirección del implante. Sirve también para rectificar trayectorias de fresados previos.

Fresas de bola


Fresas de osteotomía para: preparación de ventana de antrostomía, osteotomía de pared lateral del maxilar superior, osteoplastia proceso alveolar.

Fresas de avellanado lateral

Se usan para la preparación del cuerpo del implante para Implantes IPX Tilted en posición cigomática para ZAGA 1, 2 y 3.

Fresas

Fresas para preparación inicial y ensanchamiento del lecho implantario en huesos D1, D2 y D3.

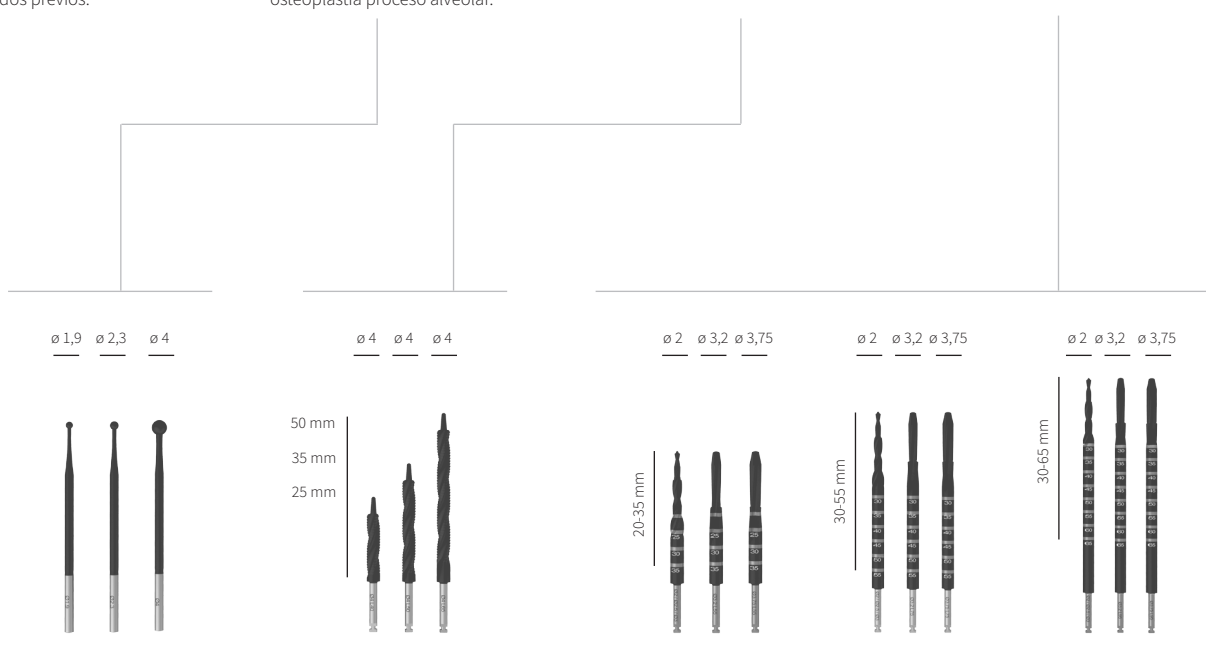

Cigomáticos



Llave dual corta (17,4 mm)

Ref. **LLDC 174**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Llave dual larga (29 mm)

Ref. **LLDL 290**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Llave protésica de motor

Ref. **LLMTP 200**

Con la ayuda del motor permite atornillar y desatornillar toda la gama de tornillos **Galimplant®**.



Llave protésica

Ref. **LLCAC 160**

Se conecta al destornillador manual y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Llave protésica

Ref. **LLCAC 250**

Se conecta al destornillador manual y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Dado largo

Ref. **DL 244**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave multi-posición

Ref. **LLCAMU 244**

Se utiliza para colocar pilares multi-posición recto o angulado con ayuda de la carraca.



Llave protésica corta

Ref. **LLCA 220**

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Porta-implante largo

Ref. **PICGC 04040**

Porta-implante largo sin tornillo.



Carraca dinamométrica

Ref. **CA DIN**

Permite aplicar torque. Rango de 10 a 40 Ncm.

Componentes caja quirúrgica


Fabricados en acero quirúrgico.



Destornillador manual

Ref. **DMI 1660**


Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante manualmente o con ayuda de la carraca.

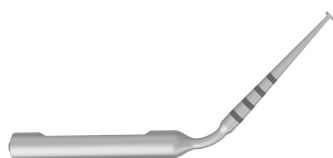

Indicador de profundidad corto

Ref. **MCG 100**

Se utiliza para indicar la profundidad de implantes cigomáticos de longitud 20 a 35 mm.

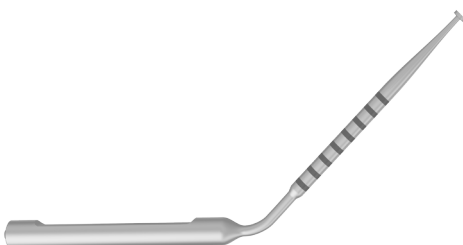

Indicador de profundidad largo

Ref. **MCG 156**

Se utiliza para indicar la profundidad de implantes cigomáticos de longitud 30 a 65 mm.



Llave fiador

Ref. **LLFI 70**

Permite fijar el portaimplantes para facilitar su desinserción en caso de emplear transpotadores atornillados. El cuerpo de la llave fiadora sirve como plantilla para la planificación estándar de implantes en posiciones 11i, 21i, 13i, 15i y 25i.

Cigomáticos


Indicadores de angulación y profundidad de pilares multi-posición.

Se utiliza para indicar la angulación y profundidad de los pilares multi-posición.



Indicador 60°

Ref. MPMU 60

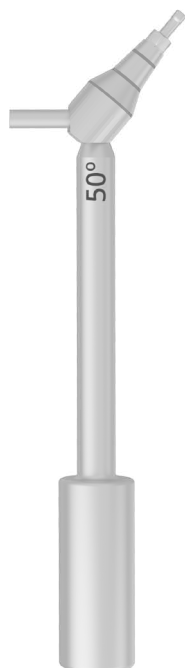

Indicador 50°

Ref. MPMU 50



Indicador 45°

Ref. MPMU 45



Indicador 30°

Ref. MPMU 30



Indicador 15°

Ref. MPMU 15



Indicador 0°

Ref. MPMU 0

Instrumental adicional

Fabricados en acero quirúrgico. Esterilizable en autoclave.



Llave protésica

Ref. **LLCA 097** - 9,7 mm
LLCA 174 - 17,4 mm
LLCA 220 - 22 mm
LLCA 290 - 29 mm

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Llave protésica multi-posición corta y larga

Ref corta. **LLCAMU 174**
 Ref larga. **LLCAMU 244**

Con la ayuda de la carraca permite atornillar y desatornillar toda la gama de pilares multi-posición rectos **Galimplant®**.



Llave para carraca directa a implante

Ref. **LLCAI 220** - 22 mm
LLCAI 290 - 29 mm

Con la ayuda de la carraca y conectada directamente a la conexión interna de los implantes **Galimplant®**, permite su inserción.



Fresa convencional ø 2.8 mm

Ref. **F-102928**

Fresa final para colocar implantes **Galimplant®** de ø 3,2 mm en hueso denso y de ø 3,5 mm en hueso blando.



Llave motor directa a implante

Ref. **LLMI 295**

Con la ayuda del motor y conectada directamente a la conexión interna de los implantes **Galimplant®**, permite su inserción.



Fresa convencional ø 3.8 mm

Ref. **F-102938**

Fresa final para colocar implantes **Galimplant®** de ø 4 mm en hueso denso y medio.



Llave protésica de motor corta

Ref. **LLMTP 200** - 20 mm
LLMTP 220 - 22 mm

Con la ayuda del motor permite atornillar y desatornillar toda la gama de tornillos **Galimplant®**.



Fresa convencional ø 4.8 mm

Ref. **F-102948**

Fresa final para colocar implantes **Galimplant®** de ø 5 mm en hueso denso.



Llave protésica de motor larga

Ref. **LLMTP 290**

Con la ayuda del motor permite atornillar y desatornillar toda la gama de tornillos **Galimplant®**.



Cánula guía férula/pin

Ref. **CGF 4040**

Adherida a la férula quirúrgica, sirve de guía a los implantes para cirugía guiada.

Ref. **CP 120**

Adherida a la férula quirúrgica, sirve de guía a los pins de fijación para cirugía guiada.



Paralelizador

Ref. **PAR 20-26**

Los paralelizadores están fabricados en acero quirúrgico, tiene formato cilíndrico, con un extremo de diámetro 2mm y un extremo de diámetro 2,6mm. Ambos extremos del paralelizador poseen agujero pasahilos, para sujetar el paralelizador durante su utilización y prevenir su aspiración.

Carraca dinamométrica

Ref. **CA DIN**

Permite aplicar torque. Rango de 10 a 40 Ncm.





Secuencia de fresado

Se recomienda seguir las indicaciones de la siguiente tabla para lograr una óptima estabilidad primaria del implante.

Ø Diámetro del implante	Hueso denso	Hueso medio	Hueso blando
	TIPO I	TIPO II-III	TIPO IV
2,5 mm	2 mm	2 mm	fresa lanza
3,2 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,0 mm
3,5 mm	3,2 mm y los 3 mm iniciales de la fresa 3,6 mm	3,2 mm	2,8 mm
4,0 mm	3,8 mm y los 3 mm iniciales de la fresa 4,2 mm	3,6 - 3,8 mm	3,2 mm
4,5 mm	4,2 mm y los 3 mm iniciales de la fresa 4,5 mm	4,2 mm	3,6 mm
5,0 mm	4,8 mm	4,7 mm	4,2 mm

Fresa lanza 2,0 mm 2,6 mm 2,8 mm 3,2 mm 3,6 mm 3,8 mm 4,2 mm 4,7 mm 4,8 mm



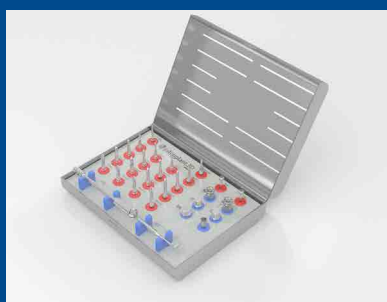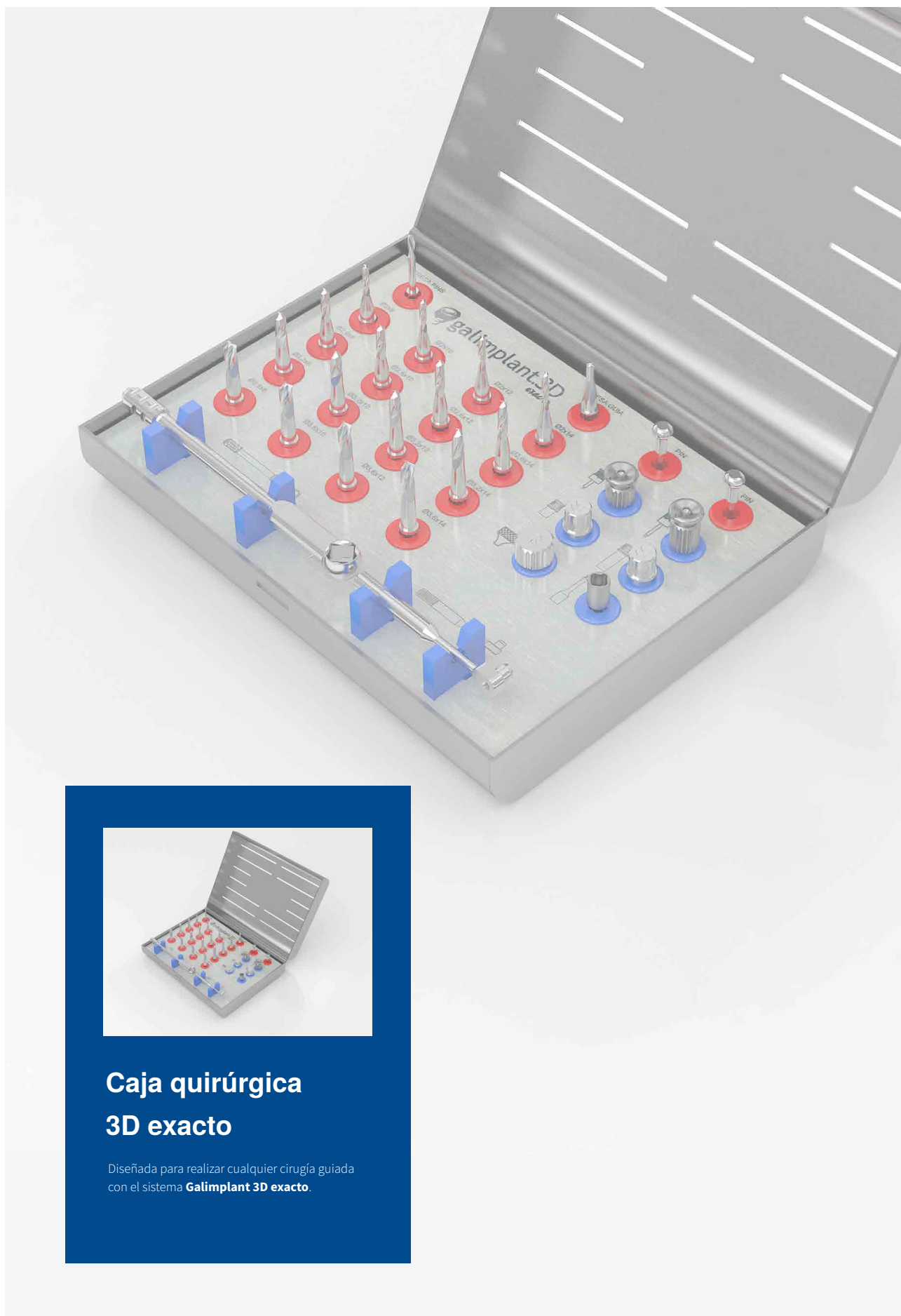

Caja quirúrgica 3D exacto

Diseñada para realizar cualquier cirugía guiada
con el sistema **Galimplant 3D exacto**.

Cirugía guiada

Caja quirúrgica 3D exacto

Ref. CQ 3D

Caja específica para cirugía guiada,
fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresas especiales para cirugía guiada de diferentes diámetros y longitudes

Pins de fijación

Llaves

Dados

Dado manual

Llave motor

Reductor de cirugía guiada

Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.



Fresa pin

Tiene dos usos:

Permite la colocación de los pins de fijación que proporcionan una mayor estabilidad a la férula.

Utilizada junto con el reductor, crea un lecho de 8 mm de profundidad en el hueso.



Fresa guía


Diseñada con forma cónica para retirar el tapón mucoso. Consta de una punta no activa y 5 bisturíes en su perímetro.



Fresas

Gracias a su forma cilíndrica en la parte superior, las fresas se adaptan perfectamente a la cánula de la guía quirúrgica.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **8 mm, 10 mm, 12 mm y 14 mm.**

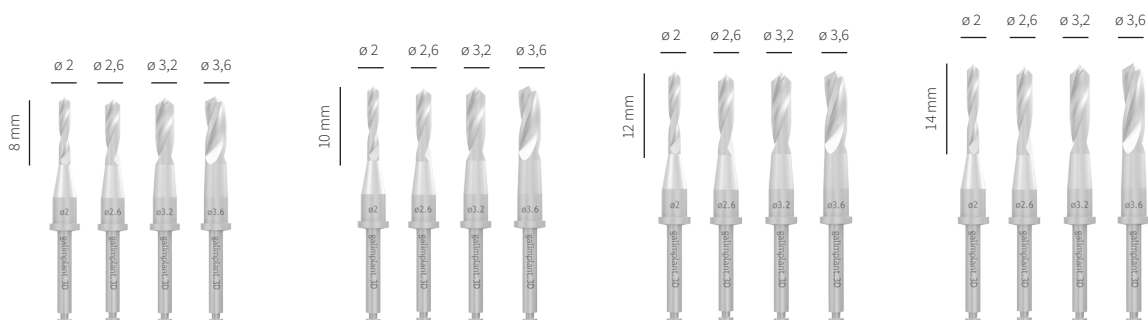

Ref. **K FRES CG**

3D exacto



Pin de fijación

Ref. **PIN 290** x2

Se usa para fijar la férula quirúrgica al maxilar del paciente.



Llave dual corta (17,4 mm)

Ref. **LLDC 174**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Llave dual larga (29 mm)

Ref. **LLDL 290**

Esta llave presenta doble función, sirve tanto para dar el torque manual como para usar con una carraca.



Dado manual

Ref. **DMA 150**

Conectado al porta-implante, se utiliza para insertar el implante de forma manual.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Dado largo

Ref. **DL 244**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave motor

Ref. **LLM 215**

Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Reductor

Ref. **RCG 4020**


Se usa para reducir el diámetro de la cánula de la férula quirúrgica de $\varnothing$ 4 mm. a $\varnothing$ 2 mm. Marca la posición del implante en el hueso.



Carraca no dinamométrica

Ref. **CA N/DIN**

Permite insertar el implante de forma manual.

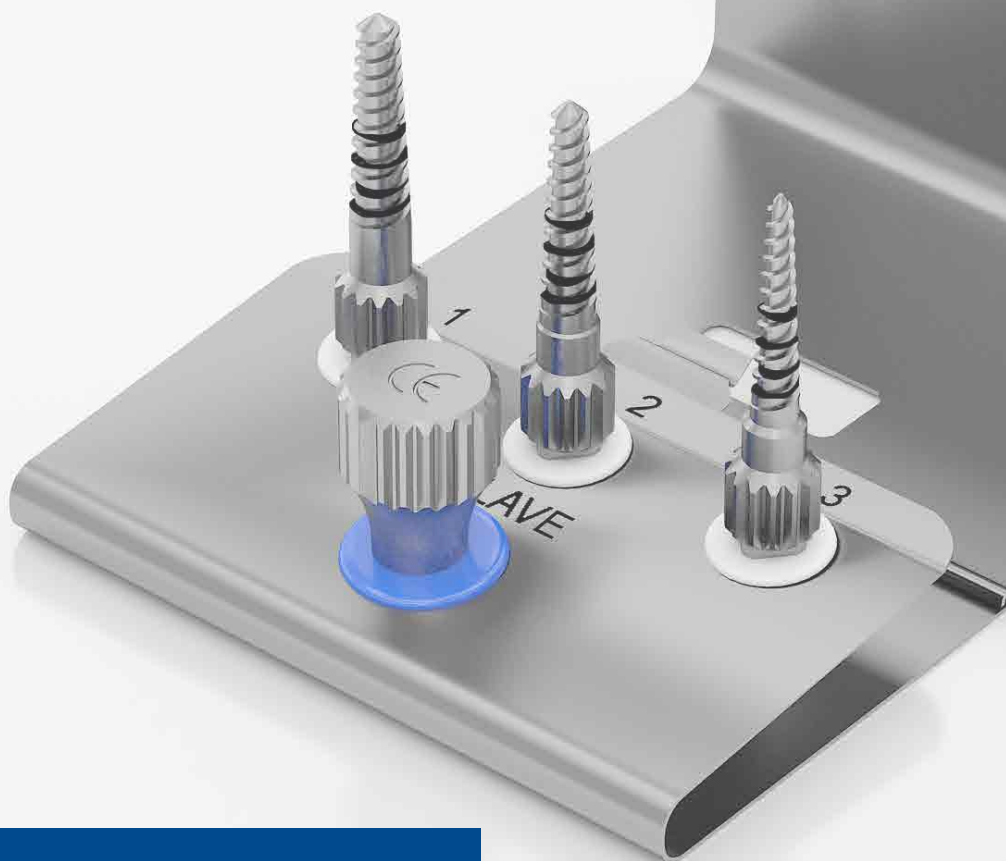

Osteótomos


Contiene 3 dilatores óseos de diferentes diámetros.

Osteótomos

Ref. **COST**

Su uso está indicado para dilatación ósea.

Fabricados en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.

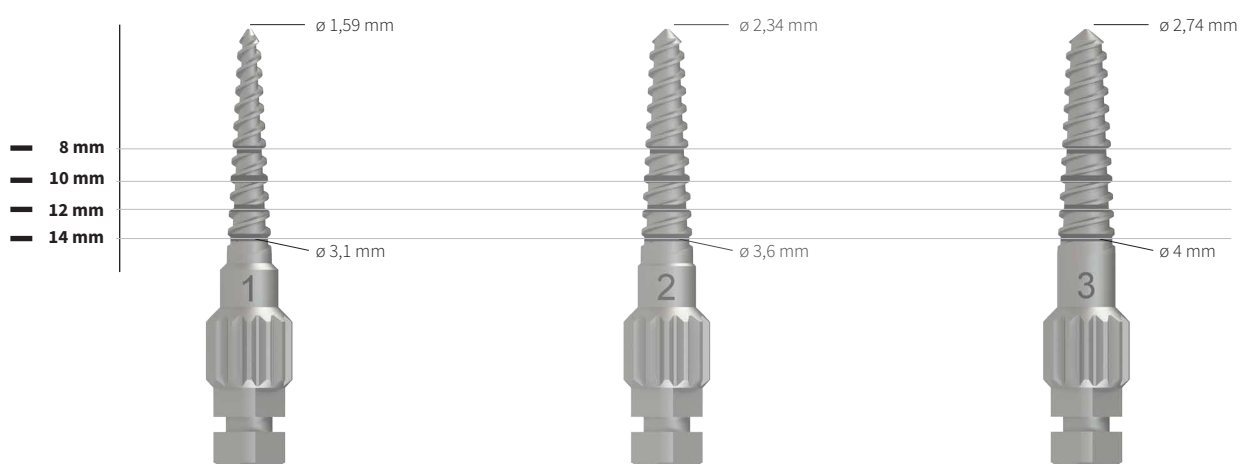

Osteótomo N° 1

Ref. **EXP 1**

Osteótomo N° 2

Ref. **EXP 2**

Osteótomo N° 3

Ref. **EXP 3**



Dado Manual

Fabricado en acero quirúrgico.

Ref. **DMA 150**



Trefinas


Contiene 4 trefinas de diferentes diámetros.

Trefinas

Ref. C TREF

Su uso está indicado para recolección de hueso y
explantación de implantes.

Fabricadas en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.

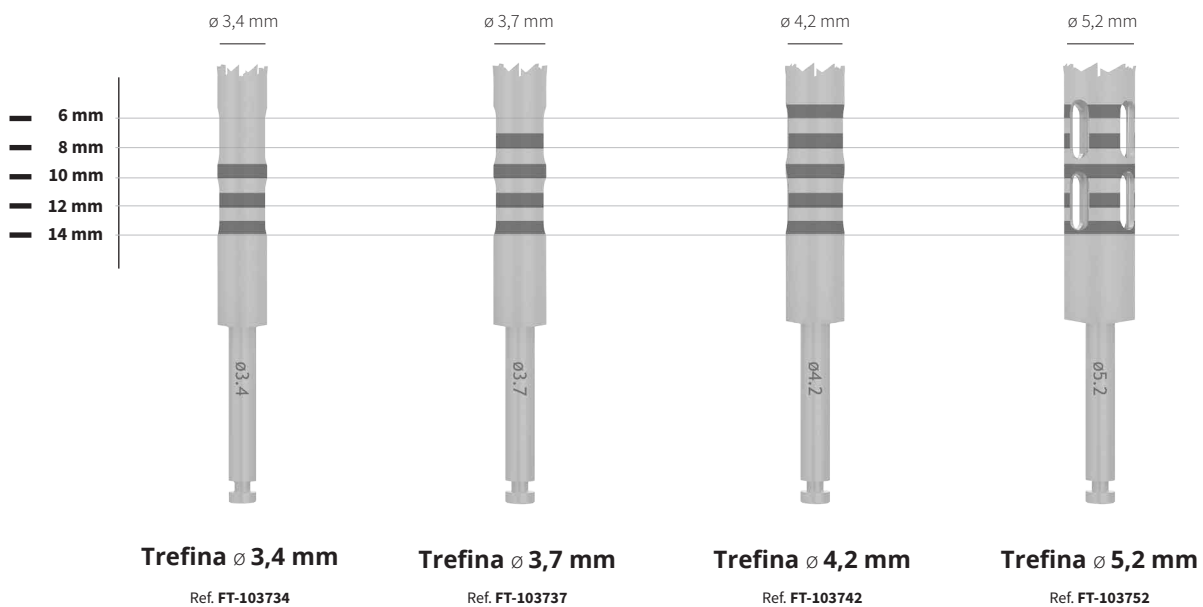



Extractores

Contiene 4 extractores de diferentes diámetros.

Extractores

Ref. KIT EXT-LE

Su uso está indicado para extracción de tornillos coronados y explantación de implantes fracasados.

Fabricados en acero endurecido y esterilizables en autoclave.



Extractor Tipo 1

Ref. EXT-1

Diseñado para extraer tornillos protésicos con la conexión coronada o deformada.



Extractor Tipo 2

Ref. EXT-2

Diseñado para extraer tornillos protésicos con la conexión totalmente deteriorada.

Se utiliza cuando el extractor tipo 1 no sujeta o arrastra la zona afectada.



Extractor Tipo 3

Ref. EXT-3

Diseñado para extraer implantes de conexión interna con métrica $\varnothing 1.6$ mm.

No debe exceder un torque superior a 100 Ncm. Para torques mayores debe utilizarse el extractor tipo 4.



Extractor Tipo 4

Ref. EXT-4


Diseñado para extraer implantes de conexión externa con métrica $\varnothing 2$ mm.

Aconsejable no exceder un torque superior a 200 Ncm.

Estos extractores pueden ser utilizados con el dado corto/largo y la carraca **Galimplant**.

Recomendable un sólo uso.


Instrumental quirúrgico

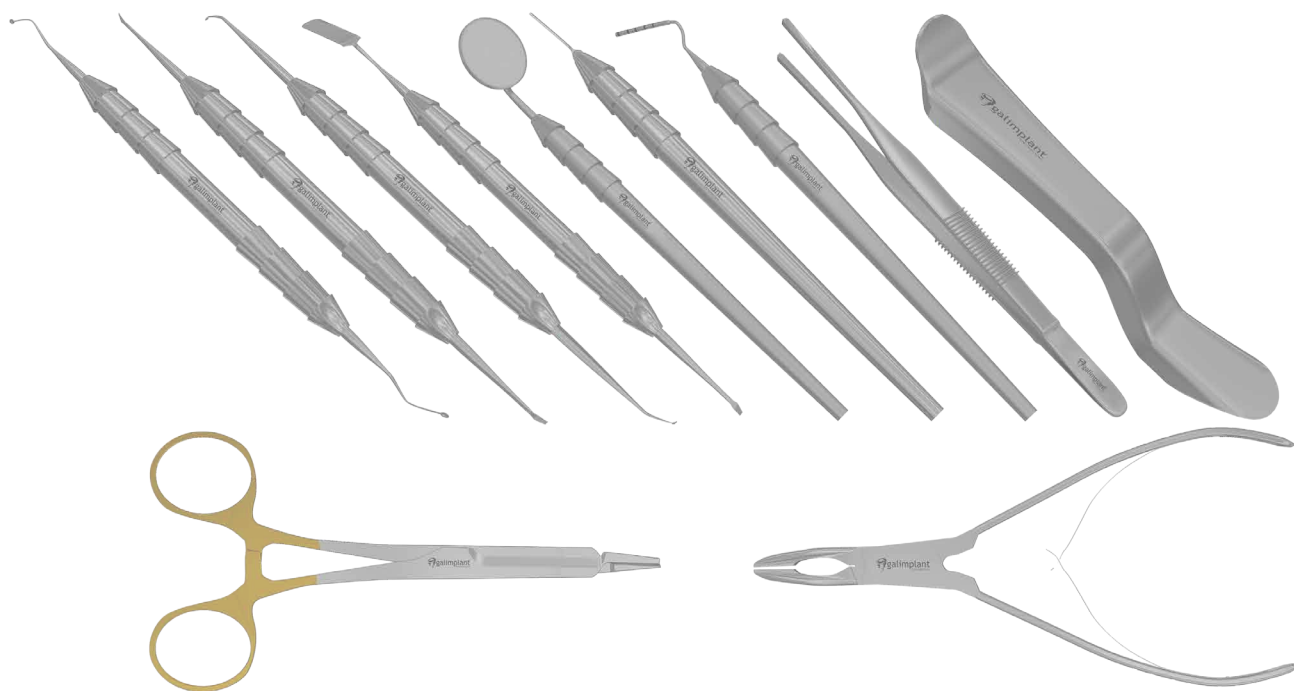


Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.

Esterilizable en autoclave.


Ref. **KIT GAL**

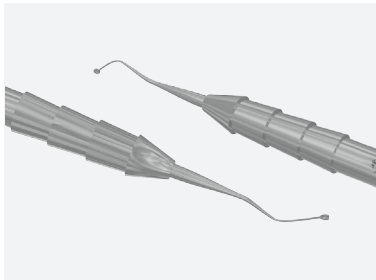


CURETA DE HEMINGWAY

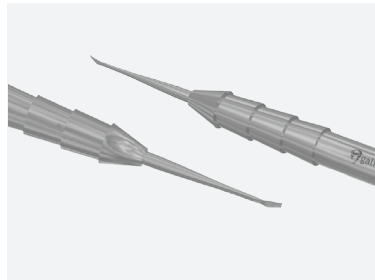


CURETA QUIRÚRGICA MOLT N°4

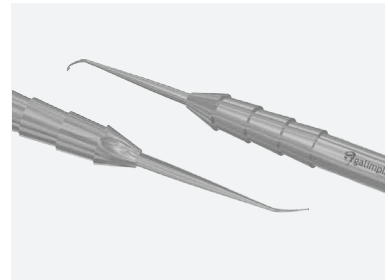


ELEVADOR DEL SENO MAXILAR

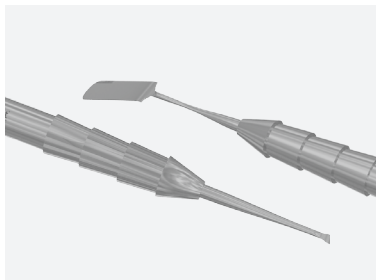


ELEVADOR PERIÓSTICO DE PRICHARD

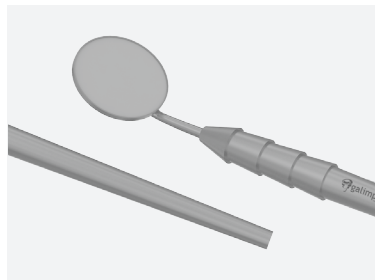


ESPEJO BUCAL + MANGO SATINADO

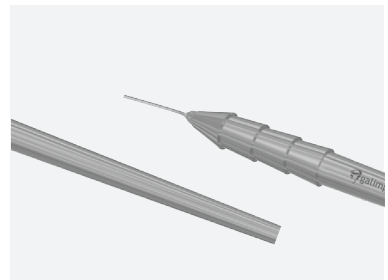

MANGO DE BISTURÍ ANGULADO

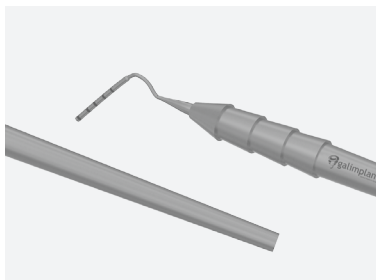

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

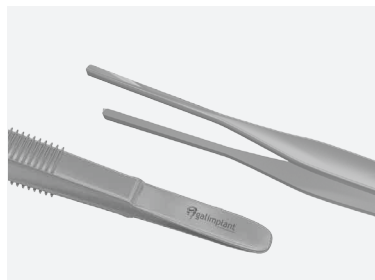

PINZA DE TEJIDOS



SEPARADOR BUCAL




PORTAAGUJAS CON TIJERAS



PINZA GUBIA FRIEDMAN

Instrumental cigomáticos

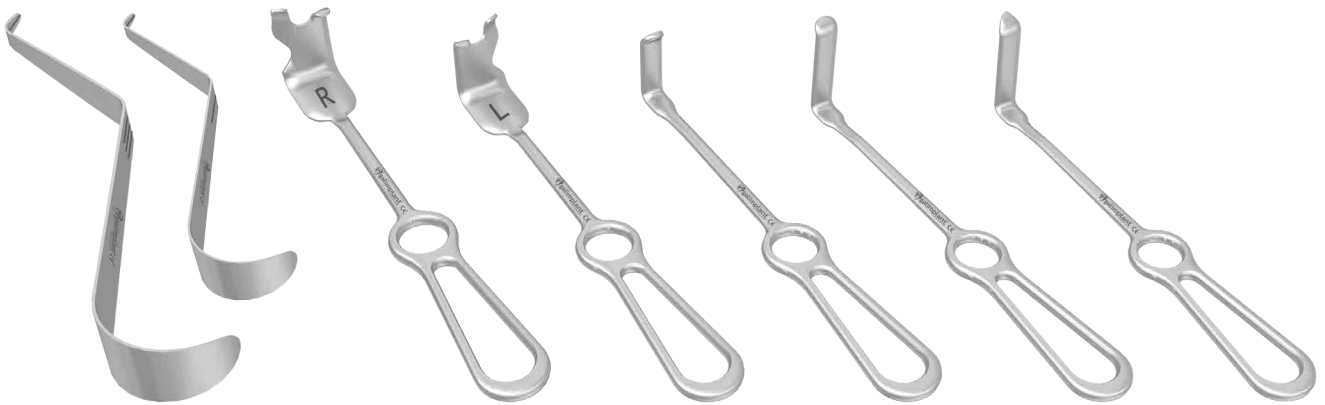

Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.

Esterilizable en autoclave.



RETRACTOR CIGOMÁTICO ESTRECHO

Ref. RET BUC A


Separador diseñado para alcanzar la conjunción entre el proceso frontal y temporal del hueso cigomático, estrecho para la colocación de un implante cigomático.



RETRACTOR CIGOMÁTICO ANCHO

Ref. RET BUC B

Separador diseñado para alcanzar la conjunción entre el proceso frontal y temporal del hueso cigomático, ancho para la colocación de dos o tres implantes cigomáticos.

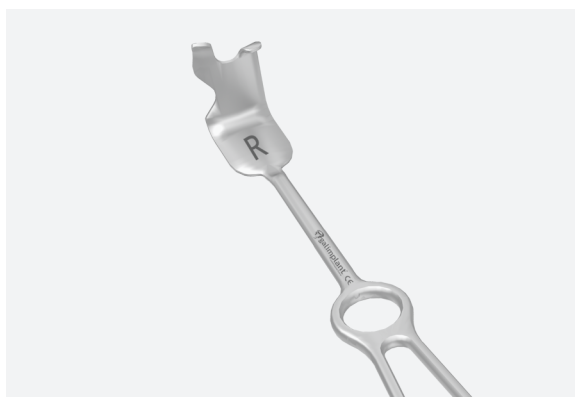

SEPARADOR DE SENO DERECHO

Ref. SEP SEN R

Separador quirúrgico adaptado anatómicamente a la pared lateral sinusal derecha.



SEPARADOR DE SENO IZQUIERDO

Ref. SEP SEN L

Separador quirúrgico adaptado anatómicamente a la pared lateral sinusal izquierda.



SEPARADOR LANGENBECK

Ref. SEP LAN

Separador para cirugía oral y maxilofacial.



SEPARADOR LANGENBECK INVERTIDO ROMO

Ref. SEP LAN IR


Separador para cirugía oral y maxilofacial.



SEPARADOR LANGENBECK INVERTIDO AGUDO Ref. SEP LAN IA

Separador para cirugía oral y maxilofacial.

Guías de posicionamiento

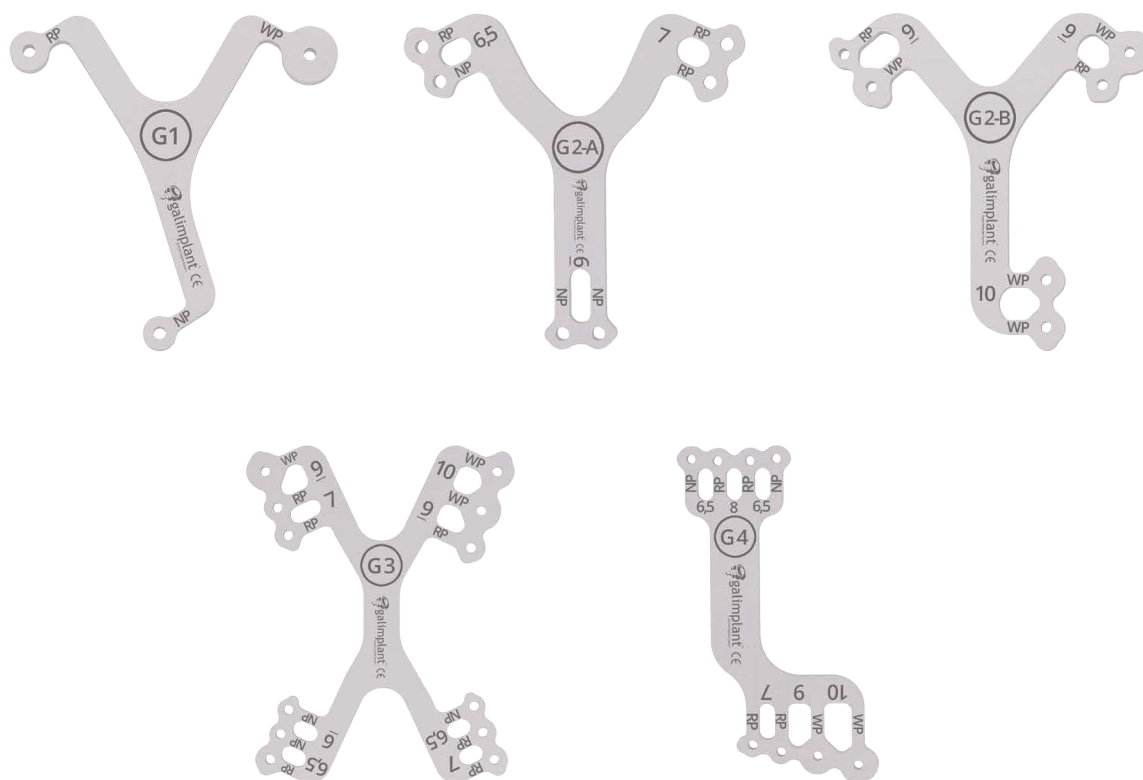

Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.

Esterilizable en autoclave.


Los orificios permiten el paso de la fresa lanza y la fresa espiral de $\varnothing$ 2 mm. del Sistema.




Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de implantes unitarios.




Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros reducidos y/o estándar.

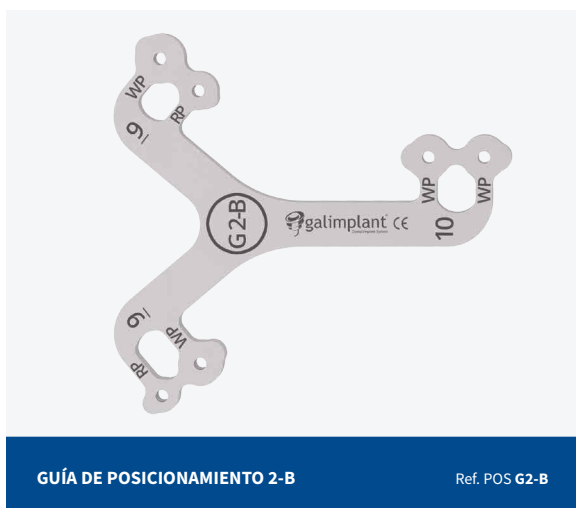

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros estándar y anchos.

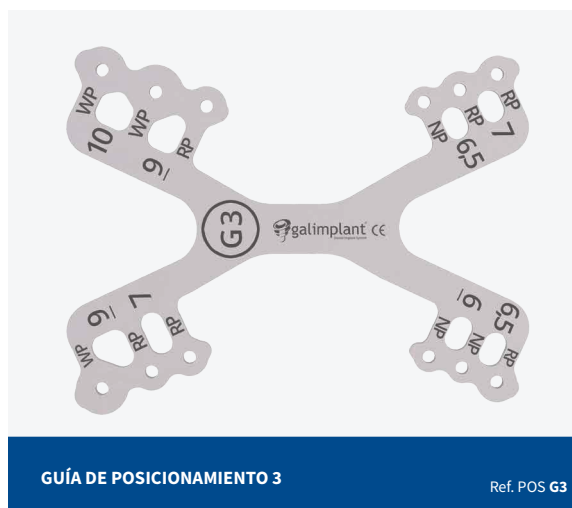

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de tres implantes consecutivos de diámetros reducidos, estándar y anchos.

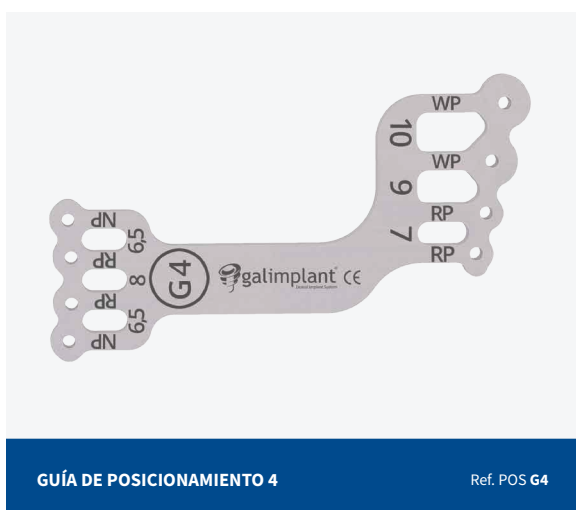

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de cuatro implantes consecutivos tanto en sector anterior como en sector posterior.



Pistola de irrigación


Suministrada en caja de aluminio.

Pistola de irrigación

Ref. C PIST

Pistola para irrigación y lavado quirúrgico.

También disponemos de líneas de irrigación estériles.

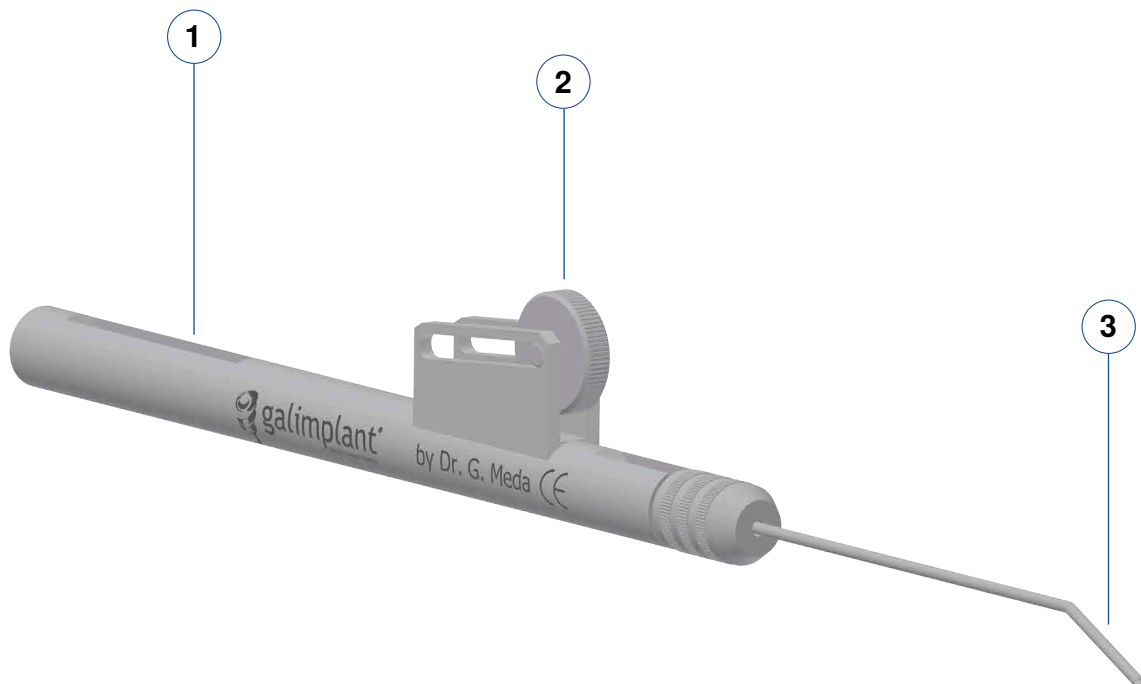

1. Cuerpo de sujeción

2. Regulador de caudal

3. Punta metálica

Siliconas y registros



SILICONA FLUIDA

Ref. GALISIL LIGHT

- ✓ Color **naranja**
- ✓ Mezcla **1:1**
- ✓ Tiempo de trabajo **1' 30"**
- ✓ Tiempo total **2' 00"**



SILICONA PESADA

Ref. GALISIL DENSE

- ✓ Color **azul**
- ✓ Mezcla **1:1**
- ✓ Tiempo de trabajo **1' 15"**
- ✓ Tiempo total **2' 00"**



SILICONA PARA REGISTRO OCLUSAL

Ref. GALISIL OCLUSAL

- ✓ Color **azul**
- ✓ Mezcla **1:1**
- ✓ Tiempo de trabajo **0' 20"**
- ✓ Tiempo total **1' 00"**



CUBETA DE IMPRESIÓN PLÁSTICA

Ref. CUB

- ✓ Cubetas superiores e inferiores, ambas disponibles en 3 medidas.

Galiform

Galiform es un composite fotopolimerizable para modelar y de uso protésico. Ideal para trabajos fresados, diseño de puentes, barras, estructuras implantosoportadas, así como para la ferulización y transferencia de estructuras al modelo. Endurece en pocos segundos con el fotopolimerizador.

>> **Gel de modelación universal fotopolimerizable**

>> **Modelador en frío**

>> **Sin contracción**

- ✓ **Galiform tiene una viscosidad idonea para modelar.**
- ✓ Las modelaciones realizadas con Galiform son muy estables y precisas sin deformación.
- ✓ Galiform tiene una excelente adhesión y se puede combinar con materiales fotopolimerizables y ceras.
- ✓ Galiform se quema sin dejar residuos y no deja restos de color.
- ✓ Debido a su color azul se distingue óptimamente y se obtiene una polimerización en profundidad.



El kit contiene:

- ✓ 3 jeringas de 3g
- ✓ 9 cánulas de aplicación

Indicaciones:

- ✓ Modelación de puentes, Inlays y Onlays.
- ✓ Modelación de attaches, coronas telescópicas y cónicas.
- ✓ Unión intra- o extraoral de estructuras para soldar.
- ✓ Corrección de modelaciones.
- ✓ Confección de espacios definidos para el gel en la fabricación de férulas de blanqueamiento.
- ✓ Alivio de zonas retentivas.
- ✓ Protección de dientes en trabajos de arenado.
- ✓ Relleno de poros o cortes de sierra en el modelo.

Sistema de registro oclusal



Sistema de registro oclusal galimplant

Ref. SRO GAL



PLACA MANDIBULAR GRANDE



PLACA MANDIBULAR PEQUEÑA




PUNTERO CENTRAL



FIJADOR INTERMAXILAR



DESTORNILLADOR

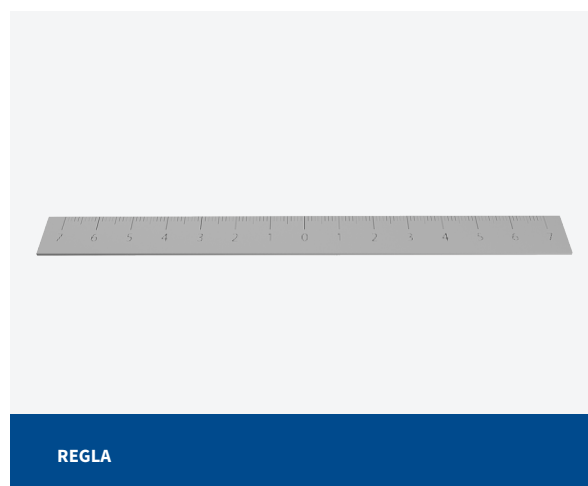

Aparatología



Surgic Pro

Micromotor para implantología

- ✓ Torque: 5-80 Ncm
- ✓ Velocidad del motor: 200~40000 min⁻¹
- ✓ Alimentación de la luz: más de 32000 LUX
- ✓ Iluminación Led para un tratamiento más preciso y seguro
- ✓ Larga duración y resistencia a las altas temperaturas
- ✓ Bomba de irrigación avanzada



Variosurg 3

Sistema de cirugía ultrasónica

- ✓ Frecuencia: 28-32 kHz
- ✓ Fuente de alimentación: 230V 50/60 Hz
- ✓ Flujo de irrigación: 10~75 ml/min
- ✓ Programas: CIRUGÍA x5, ENDODONCIA x2, PERIODONCIA x2
- ✓ Kit básico con 6 puntas



Dos sistemas quirúrgicos conectados que se manejan con un único pedal de control. Un innovador enfoque para implantes y tratamientos de cirugía oral.



También disponemos de líneas de irrigación estériles.

I+D+i

Nuestro valor tiene como base un enfoque científico, evidencias clínicas y un fuerte desarrollo en I+D+i.

¿Qué nos hace diferentes?

Con la colaboración de profesionales del sector, cirujanos, institutos de investigación y universidades, **Galimplant desarrolla una extensa gama de productos de alta calidad que aseguran su fiabilidad a largo plazo.**

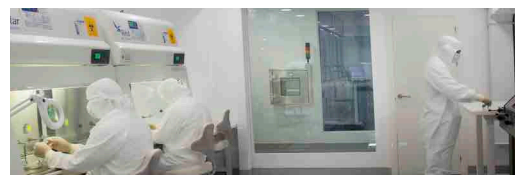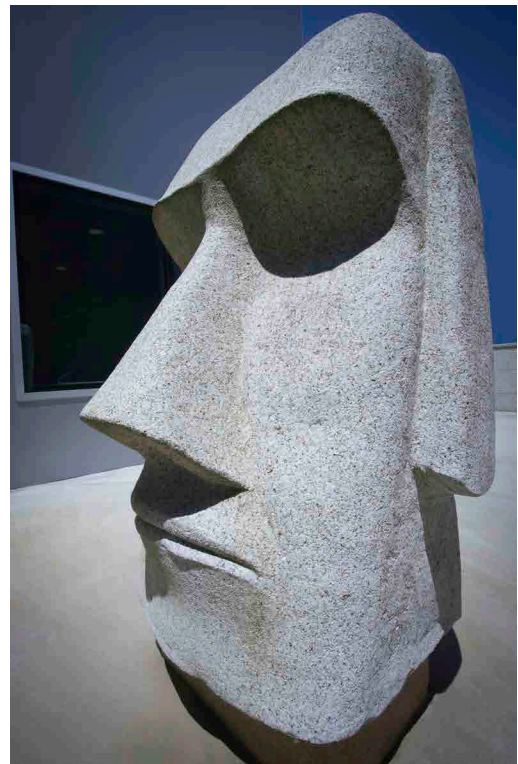

Más información: www.galimplant.com/investigacion



