

Sistema de implantes

IPX - ICI
Conexão interna



Uma única **conexão**, múltiplas **possibilidades**

Sistema Galimplant Clásico

Os nossos implantes dentários são fabricados em **Titânio de Grau IV**. Apresentam uma **conexão interna cônica de 11°** e uma **plataforma protética única**. A **rosca interna** dos **implantes clássicos** é de **1,6 mm**.



- **IPX** Implante de desenho macroscópico que favorece uma elevada estabilidade primária em qualquer situação.

		DIÂMETRO			
		Ø 3,5 mm	Ø 4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5 mm
COMPRIMENTO	6 mm	-----	Ref. IPX 4006S	Ref. IPX 4506S	Ref. IPX 5006S
	8 mm	Ref. IPX 3508S	Ref. IPX 4008S	Ref. IPX 4508S	Ref. IPX 5008S
	10 mm	Ref. IPX 3510S	Ref. IPX 4010S	Ref. IPX 4510S	Ref. IPX 5010S
	12 mm	Ref. IPX 3512S	Ref. IPX 4012S	Ref. IPX 4512S	Ref. IPX 5012S
	14 mm	Ref. IPX 3514S	Ref. IPX 4014S	Ref. IPX 4514S	-----
	16 mm	Ref. IPX 3516S	Ref. IPX 4016S	-----	-----
	18 mm	Ref. IPX 3518S	Ref. IPX 4018S	-----	-----

*Se pretender seleccionar a opção de moldeira fechada, a referência da encomenda deverá incluir um "C" Exemplo: **IPXC 3508S**

CE0051



- **ICI** Implante de desenho macroscópico especialmente indicado para ossos de tipo I e II.

		DIÂMETRO			
		Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm
COMPRIMENTO	8 mm	-----	Ref. ICI 03508S	Ref. ICI 04008S	Ref. ICI 05008S
	10 mm	Ref. ICI 03210S	Ref. ICI 03510S	Ref. ICI 04010S	Ref. ICI 05010S
	12 mm	Ref. ICI 03212S	Ref. ICI 03512S	Ref. ICI 04012S	Ref. ICI 05012S
	14 mm	Ref. ICI 03214S	Ref. ICI 03514S	Ref. ICI 04014S	Ref. ICI 05014S

*Se pretender seleccionar a opção de moldeira fechada, a referência da encomenda deverá incluir um "C" Exemplo: **ICIC 03510S**

CE0051

Transeptelial Multiposição Estético

Prótese Múltipla

Pilar transeptelial fabricado em **titânio de Grau V**. O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**. Indicado para próteses múltiplas aparafusadas com elevada exigência estética.

Plataforma de 3,8 mm



Pilar multiposição reto estético estreito

1 mm	Ref. MUSR 04010
2 mm	Ref. MUSR 04020
3 mm	Ref. MUSR 04030
4 mm	Ref. MUSR 04040
5 mm	Ref. MUSR 04050



Pilar multiposição reto estético slim

2 mm	Ref. MUSLAR 04020
3 mm	Ref. MUSLAR 04030
4 mm	Ref. MUSLAR 04040
5 mm	Ref. MUSLAR 04050

CE0051

Cicatrizador



Ref. EPCTR 4044



Ref. EPCTR 4844

CE0051

Impressão

ANALÓGICO - PARAFUSO DE IMPRESSÃO



Ref. AIPTR 40



Ref. TAIP 135



Ref. TAIP 200



Ref. SBT MUSR



Ref. TMU 4048

CE

Interfases

As interfases podem ser adquiridas através de conjuntos constituídos por uma interface e dois parafusos **TMU 4048**, um clínico e outro para laboratório.



Ref. PCRCMUR 40



Ref. PITEMUR DA4075



Ref. PITEMUR DA4040



Ref. TMU 4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**.



Ref. TPIA DP4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **15 Ncm**.

Utilização exclusiva em laboratório

RÉPLICA



Ref. RITR SB 40



Ref. TRD

No caso de um modelo impresso em 3D, deve utilizar este parafuso com a réplica.

Transeptelial Multiposição Estético

Prótese Múltipla

Pilar transeptelial fabricado em **titânio de Grau V**. O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**. Indicado para próteses múltiplas aparafusadas com elevada exigência estética em dentes posteriores.

Plataforma de 4,8 mm



Pilar multiposição reto estético largo

- 2 mm Ref. MUSR 05020
- 3 mm Ref. MUSR 05030
- 4 mm Ref. MUSR 05040
- 5 mm Ref. MUSR 05050

Cicatrizador



Ref. EPCTR 5044

Impressão

RÉPLICA



Ref. RITR SB 50



Ref. TRD

No caso de um modelo impresso em 3D, deve utilizar este parafuso com a réplica.

ANALÓGICO – PARAFUSO DE IMPRESSÃO



Ref. AIPT 50



Ref. TAIP 135



Ref. TAIP 200



Ref. SBT MUSR 50



Ref. TMU 4048

DIGITAL

Interfases



Ref. PITEMUR DA5075



Ref. PITEMUR DA5040



Ref. TMU 4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**.



Ref. TPIA DP4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **15 Ncm**.

CE0051

CE0051

CE

CE0051

Transeptelial Multiposição Estético

Prótese Unitária

Pilar transeptelial fabricado em **titânio de Grau V**. O **torque recomendado** para a sua colocação é de **35 Ncm**. Indicado para próteses aparafusadas unitárias.

Plataforma de 3,8 mm



Pilar multiposição reto estético estreito

- 1 mm Ref. MUSA S04010
- 2 mm Ref. MUSA S04020
- 3 mm Ref. MUSA S04030
- 4 mm Ref. MUSA S04040
- 5 mm Ref. MUSA S04050



Pilar multiposição reto estético slim

- 2 mm Ref. MUSLA 04020
- 3 mm Ref. MUSLA 04030
- 4 mm Ref. MUSLA 04040
- 5 mm Ref. MUSLA 04050

Cicatrizador



Ref. EPCTA 4844

Impressão

ANALÓGICO – PARAFUSO DE IMPRESSÃO



Ref. AIPT 40



Ref. TAIP 135



Ref. TAIP 200



Ref. SBT MUSA



Ref. TMU 4048

DIGITAL

Interfases



Ref. PCERC MUA 40



Ref. PITEMUA DA4075



Ref. PITEMUA DA4040



Ref. TMU 4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**.



Ref. TPIA DP4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **15 Ncm**.

RÉPLICA



Ref. RIT SB 40



Ref. TRD

No caso de um modelo impresso em 3D, deve utilizar este parafuso com a réplica.

As interfaces podem ser adquiridas através de conjuntos constituídos por uma interface e dois parafusos TMU 4048, um clínico e outro para laboratório.

CE0051

CE0051

CE

CE0051

Transeptelial Multiposição

Prótese com Pilar Reto e Angulado

Pilares transepteliais fabricados em **titânio de Grau V**. O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**. Indicados para setores posteriores.

Pilar multiposição estético angulado

3 mm (15°)	Ref. EMU 1504030
4 mm (15°)	Ref. EMU 1504040
5 mm (15°)	Ref. EMU 1504050
3 mm (30°)	Ref. EMU 3004030
4 mm (30°)	Ref. EMU 3004040
5 mm (30°)	Ref. EMU 3004050
5 mm (45°)	Ref. EMU 4504050
5 mm (50°)	Ref. EMU 5004050
5 mm (60°)	Ref. EMU 6004050

Pilar multiposição reto

1 mm	Ref. MUST 04010
2 mm	Ref. MUST 04020
3 mm	Ref. MUST 04030

Cicatrizador



Ref. PCM 4830



Ref. TMUT 40

CE0051

Impressão

ANALÓGICO – PARAFUSO DE IMPRESSÃO



Ref. AIPMU 40



Ref. TAIPMU 135

DIGITAL



Ref. SBT MUST



Ref. TMUT 40

Interfases



Ref. PITEMUTR DA4040



Ref. PITEMUTR DA4075



Ref. TMUT 40

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **10 Ncm**.

CE0051

CE

CE0051

Sistema Galimplant Único

Os nossos implantes dentários são fabricados em **Titânio de Grau IV**. Apresentam uma **conexão interna cônica de 11°** e **uma plataforma protética única**. A **rosca interna** dos **implantes Único** é de **2,0 mm**, o que lhes confere maior resistência mecânica e robustez estrutural.

IPXC M2

Implante de desenho macroscópico que favorece uma elevada estabilidade primária em qualquer situação. **Métrica 2,0**

DIÂMETRO

Ø 4 mm

Ø 4,5 mm

Ø 5 mm

COMPRIMENTO

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

Ref. IPXC M2 4008S
Ref. IPXC M2 4010S
Ref. IPXC M2 4012S
Ref. IPXC M2 4014S
Ref. IPXC M2 4016S
Ref. IPXC M2 4018S

Ref. IPXC M2 4508S
Ref. IPXC M2 4510S
Ref. IPXC M2 4512S
Ref. IPXC M2 4514S

Ref. IPXC M2 5008S
Ref. IPXC M2 5010S
Ref. IPXC M2 5012S

CE0051

ICIC M2

Implante de desenho macroscópico especialmente indicado para ossos de tipo I e II. **Métrica 2,0**

DIÂMETRO

Ø 4 mm

Ø 5 mm

COMPRIMENTO

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

Ref. ICIC M2 04008S
Ref. ICIC M2 04010S
Ref. ICIC M2 04012S
Ref. ICIC M2 04014S

Ref. ICIC M2 05008S
Ref. ICIC M2 05010S
Ref. ICIC M2 05012S
Ref. ICIC M2 05014S

CE0051

Transeptelial Multiposição Estético M2

Prótese Múltipla

Pilar transeptelial fabricado em **titânio de Grau V**. O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**.

Plataforma de 4,8 mm



Pilar multiposição reto estético M2

- 2 mm Ref. MUSR M2 05020
- 3 mm Ref. MUSR M2 05030
- 4 mm Ref. MUSR M2 05040
- 5 mm Ref. MUSR M2 05050

Cicatrizador



Ref. EPCTR 5044

Impressão

ANALÓGICO – PARAFUSO DE IMPRESSÃO



Ref. AIPTR 50



Ref. TAIP 135



Ref. TAIP 200



Ref. SBT MUSR 50



Ref. TMU 4048

Interfases



Ref. PITEMUR DA5075



Ref. PITEMUR DA5040



Ref. TMU 4048



Ref. TPIA DP4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**.

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **15 Ncm**.

CE0051

CE0051

CE

CE0051

RÉPLICA



Ref. RITR SB 50



Ref. TRD

Utilização exclusiva em laboratório

No caso de um modelo impresso em 3D, deve utilizar este parafuso com a réplica.

As interfases podem ser adquiridas através de conjuntos constituídos por uma interface e dois parafusos TMU 4048, um clínico e outro para laboratório.

Transeptelial Multiposição Estético M2

Prótese Unitária

Pilar transeptelial fabricado em **titânio de Grau V**. O **torque recomendado** para a sua colocação é de **35 Ncm**.

Plataforma de 4,8 mm



Pilar multiposição reto estético M2

- 2 mm Ref. MUSA M2 S05020
- 3 mm Ref. MUSA M2 S05030
- 4 mm Ref. MUSA M2 S05040
- 5 mm Ref. MUSA M2 S05050

Cicatrizador



Ref. EPCTA 5044

Impressão

ANALÓGICO – PARAFUSO DE IMPRESSÃO



Ref. AIPT 50



Ref. TAIP 135



Ref. TAIP 200



Ref. SBT MUSA 50



Ref. TMU 4048

Interfases



Ref. PITEMUA DA5075



Ref. PITEMUA DA5040



Ref. TMU 4048



Ref. TPIA DP4048

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**.

O **torque recomendado** para a sua colocação é de **15 Ncm**.

CE0051

CE0051

CE

CE0051

RÉPLICA



Ref. RIT SB 50



Ref. TRD

Utilização exclusiva em laboratório

No caso de um modelo impresso em 3D, deve utilizar este parafuso com a réplica.

As interfases podem ser adquiridas através de conjuntos constituídos por uma interface e dois parafusos TMU 4048, um clínico e outro para laboratório.

Transepitelial Multiposição Estético M2

Transformável em externa

Fabricado em **titânio de Grau V**. O **torque recomendado** para a sua colocação é de **30 Ncm**.

Plataforma de 3,8 mm



Pilar multiposição transformável em externa M2

- 1 mm Ref. MUSTE M2 04010
- 2 mm Ref. MUSTE M2 04020
- 3 mm Ref. MUSTE M2 04030
- 4 mm Ref. MUSTE M2 04040

Cicatrizador



Ref. EPCTER 4844



Ref. EPCTEA 4844

Impressão

CE0051

Pilar multiposição

CE0051

Pilar multiposição angulado M2

- 15° Ref. CEMU 155040
- 30° Ref. CEMU 305045

Impressão

CE0051

ANALÓGICO + PARAFUSO DE IMPRESSÃO

RÉPLICA



Ref. RITR SB 50



No caso de um modelo impresso em 3D, deve utilizar este parafuso com a réplica.

ANALÓGICO + PARAFUSO DE IMPRESSÃO

RÉPLICA



Ref. AIPTR 50



No caso de um modelo impresso em 3D, deve utilizar este parafuso com a réplica.

DIGITAL



Ref. SBT MUSR 50



Ref. TMU 4048

Interfases

As interfases podem ser adquiridas através de conjuntos constituídos por uma interface e dois parafusos TMU 4048, um clínico e outro para laboratório.



Ref. PITEMUR DA5075



Ref. PITEMUR DA5040



Ref. TMU 4048
O torque recomendado para a sua colocação é de 30 Ncm.



Ref. TPIA DP4048
O torque recomendado para a sua colocação é de 15 Ncm.

Interfases

As interfases podem ser adquiridas através de conjuntos constituídos por uma interface e dois parafusos TMU 4048, um clínico e outro para laboratório.



Ref. PITEMUR DAE4075



Ref. PITEMUA DAE4075



Ref. TMU 4048
O torque recomendado para a sua colocação é de 30 Ncm.



Ref. TPIA DP4048
O torque recomendado para a sua colocação é de 15 Ncm.

Chaves



Chaves duais (LLDC 174, LLDC 220 y LLDL 290)

Estas chaves apresentam dupla função: servem tanto para aplicar o torque manualmente como para utilizar com uma chave de roquete. Disponíveis em 3 comprimentos: 17,4, 22 y 29 mm.

Chaves para sistema angulável (LLDP 220 y LLDP 290)

Estas chaves apresentam dupla função: servem tanto para aplicar o torque manualmente como para utilizar com uma chave de roquete no sistema angulável. Disponíveis em 2 comprimentos: 22 y 29 mm.



Chaves manuais (LLMC 220 y LLML 290)

Estas chaves permitem aplicar o torque manualmente. Com coroa rotativa e perfurada para passagem de fios. Disponíveis em 2 comprimentos: 22 y 29 mm.

Chave ultracurta (LLCA 097)

Esta chave permite aplicar o torque com o auxílio da chave de roquete.



Chave Overdent direta (LLKOD 250)

Pela extremidade quadrada, permite aparafusar o pilar overdent e, pela extremidade oposta, possibilita a colocação do retentor sobre a tampa overdent.

Chaves protéticas multiposição (LLCAMU 174 y LLCAMU 244)

Utilizam-se para colocar pilares multiposição retos com o auxílio da chave de roquete. Disponíveis em dois comprimentos: 17,4 e 24,4 mm.



Chaves protéticas multiposição (LLCAC 160 y LLCAC 250)

Ligam-se à chave de fendas manual e são utilizadas para aplicar o torque. Disponíveis em dois comprimentos: 16 y 25 mm.

Chaves para chave de roquete direta ao implante (LLCAI 220 y LLCAI 290)

Ligam-se à chave de fendas manual e são utilizadas para aplicar o torque. Disponíveis em dois comprimentos: 22 y 29 mm.



Chave de motor direta ao implante (LLMI 295)

Com o auxílio do motor e ligada diretamente à conexão interna dos implantes Galimplant, permite a sua inserção.

Chaves protéticas para motor (LLMTP 220 y LLMTP 290)

Estas chaves permitem aplicar o torque ligadas ao motor. Disponíveis em dois comprimentos: 22 y 29 mm.



Dados curto, longo e manual (DC 144, DL 244 y DMA 150)


Os dados curto e longo são utilizados para ligar ao porta-implantes e inserir o implante com o auxílio da chave de roquete. O dado manual, ligado ao porta-implantes, é utilizado para inserir o implante manualmente.

Chave de motor (LLM 215)

Ligada ao motor e ao porta-implantes, permite inserir o implante.



“Apostando em oferecer-lhe soluções que proporcionem a **máxima estética**, aliada a **um tratamento seguro e previsível**”

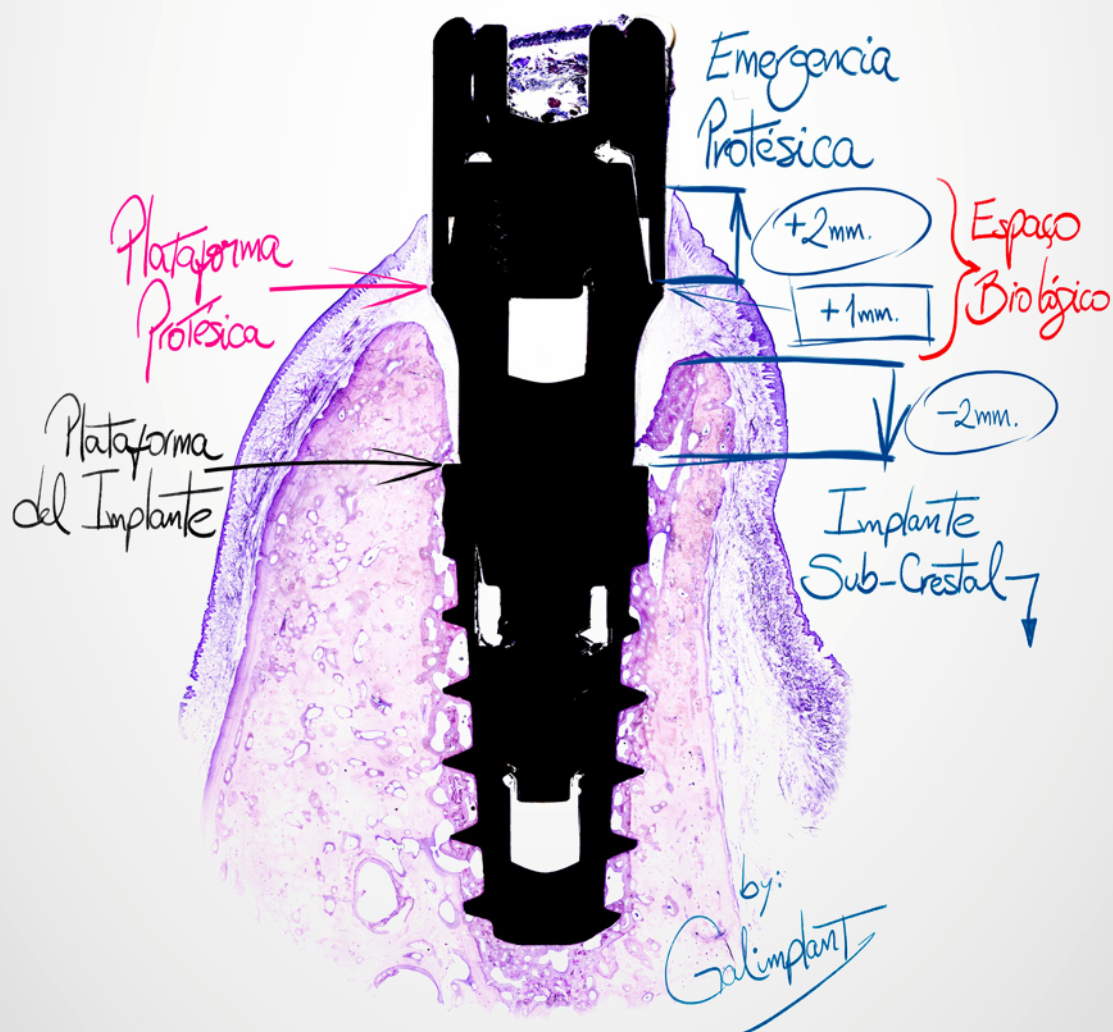

info@galimplant.com



(+34) 982 533 493

C/Benigno Quiroga 90, 27600 - Sarria (Lugo)