


# Galimplant, primera y única empresa española en fabricar implantes cigomáticos a nivel nacional

Con sede en Sarria (Lugo), Galimplant es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de implantes dentales, aditamentos protésicos e instrumental quirúrgico. Una amplia cartera de productos que conforma un catálogo de más de 800 referencias, con lo que pretende cubrir todas las necesidades de cirujanos, implantólogos y protésicos. Una empresa 100% española cuyos estándares de calidad están avalados por certificados de calidad ISO 13485, ISO 9001 y Marcado CE de cumplimiento con la Directiva Europea sobre productos sanitarios 93/42/CEE.

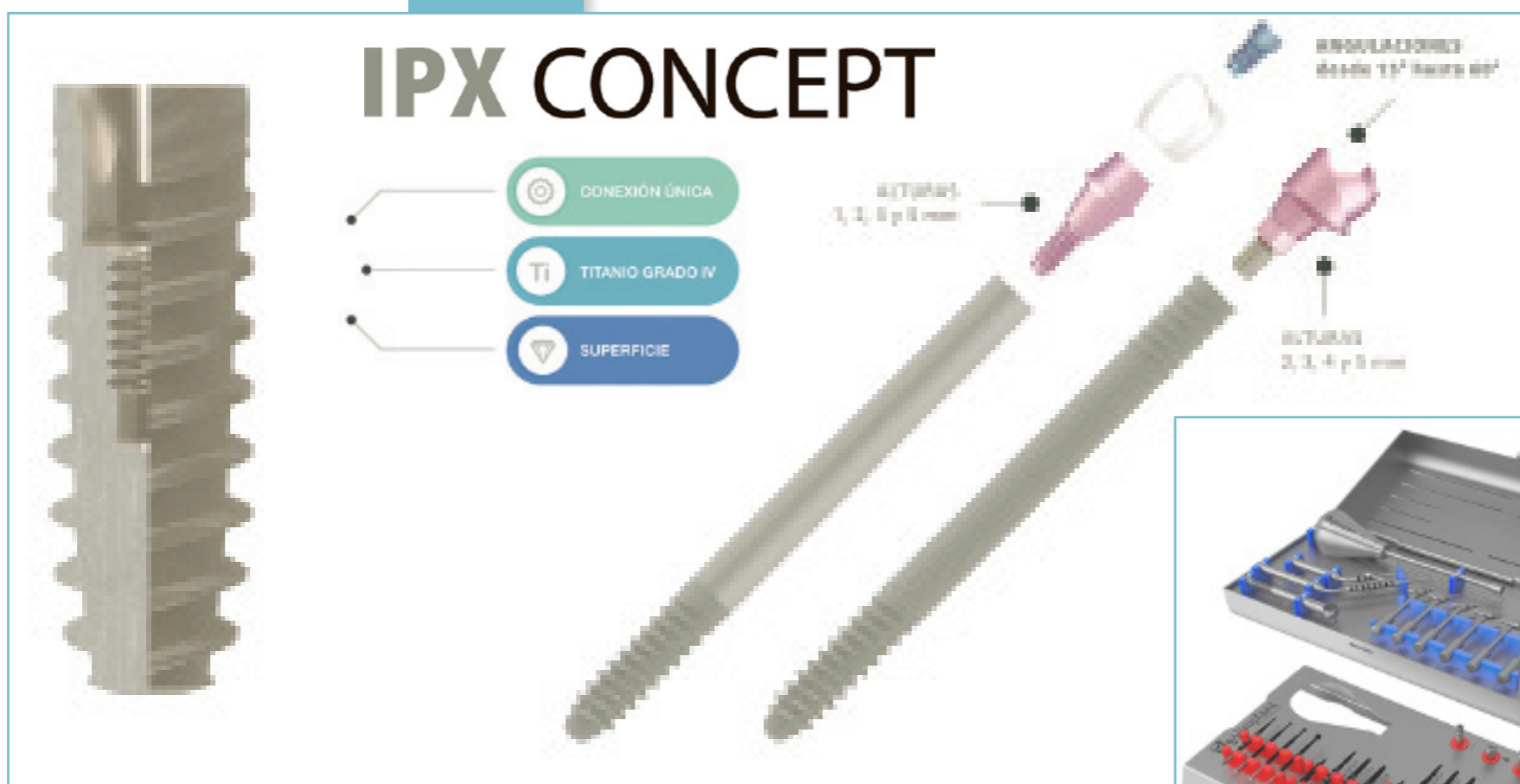

en el mundo: el Implante Cigomático Smooth, que dispone de una rosca con macroscopia IPX con tratamiento Nanoblast Plus® y cuerpo liso mecanizado, una plataforma de 4.2mm y disponible en una variedad de longitudes, de 30mm a 60mm con incrementos de 2.5mm. Y el Implante Cigomático Treated, que tiene una rosca con macroscopia IPX en el ápice, cuerpo liso y otra rosca en el cuello, todo el implante con tratamiento Nanoblast Plus®, una plataforma

elevaciones creadas, suministrando a la superficie una porosidad homogénea y mejorando en gran medida el contacto hueso/implante.

Con la combinación de ambas técnicas se consigue la formación de una capa superficial de TiO2 (dióxido de titanio) libre de impurezas, tanto orgánicas como inorgánicas, y se obtiene una rugosidad media de Ra=1,7 µm., parámetros considerados óptimos para el desarrollo celular, tal y como se demue-

realiza este año un Curso de Experto en Implantología Compleja. Implantes Cigomáticos. Un curso dividido en siete módulos cuyo objetivo es presentar el estado actual de este tipo de tratamiento implantológico desde un punto de vista clínico interdisciplinario. Para Galimplant la formación del profesional es una condición *sine qua non* para el correcto uso de sus productos, asegurando así el bienestar del paciente.

**¿Cuál es la posición de Galimplant a nivel nacional con este producto?**

Somos la primera y única empresa española en fabricar implantes cigomáticos a nivel nacional. Este proyecto nace como fruto del esfuerzo de un gran número de profesionales del sector, tales como el Dr. Juan Alberto Fernández de Ibiza, que nos hemos agrupado para diseñar y fabricar un sistema de implantes cigomáticos que mejore los ya existentes en el mercado internacional. Un proceso que se ha desarrollado con extrema lentitud y con mucho trabajo ya que queríamos que cada detalle del diseño tuviese su función.

El objetivo del proyecto era claro: "sacar al mercado un sistema cigomático único que proporcione al clínico versatilidad, fiabilidad y sencillez en todo tipo de actos quirúrgicos de la cirugía oral y maxilo-facial" y estamos seguros de que con IPX Tilted System® lo hemos conseguido.

**Galimplant es una empresa 100% española que actualmente tiene un enorme crecimiento empresarial, ¿dónde reside su éxito?**

El éxito reside sin duda en la calidad de nuestros productos. Una filosofía basada en el método científico de calidad, en dónde los pacientes son el principio y el fin de nuestro proyecto. Es por ello que ofrecemos a nuestros clientes productos con la máxima garantía de eficacia y seguridad, los cuales están sometidos a rigurosos controles, desde el diseño de los mismos hasta su entrega directa al profesional.

Productos desarrollados gracias a una intensa investigación, tanto preclínica como clínica, y bajo un enfoque biológico y biomecánico, proporcionando excelentes resultados funcionales a corto y a largo plazo, lo que nos convierte en una de las empresas españolas con mayor crecimiento y que aporta mayor número de desarrollos e investigaciones actualmente en España.

**¿Cómo enfoca Galimplant la formación de los profesionales hacia el uso del IPX Tilted System®?**

La colocación de implantes cigomáticos requiere de una exhaustiva formación debido a la complejidad de este tipo de cirugías. Es por ello, que Galimplant, en colaboración con la Universidad de Sevilla, la Clínica Fernández de Ibiza y un gran número de profesionales,

que va desde la colocación de implantes unitarios hasta la determinación del espacio adecuado para la colocación de cuatro implantes consecutivos, tanto en el sector anterior como posterior.

**¿Cuáles son las indicaciones de uso de los implantes cigomáticos y qué resultados nos pueden ofrecer?**

Los implantes cigomáticos están indicados para la rehabilitación implanto soportada del maxilar superior atrófico, ya que el arbotante cigomático no se ve afectado por la reabsorción fisiológica secundaria de todo el proceso de edentulismo, sino que esta área ósea permanece íntegra incluso en pacientes edéntulos con grandes atrofiaciones maxilares permitiendo así la rehabilitación de estos pacientes con resultados funcionales y estéticos altamente satisfactorios.

**¿Existen variantes en este tipo de implantes?**

Galimplant lanza al mercado dos diseños de implantes cigomáticos únicos

**Ofrecemos un sistema único en el mundo de implantes cigomáticos, el IPX Tilted System®**

de 4.3mm y disponible en una variedad de longitudes, de 20mm a 60mm con incrementos de 2.5mm.

**El tratamiento superficial Nanoblast Plus® es sin duda el activo más valioso de Galimplant, ¿cómo surge y qué ventajas aporta?**

Efectivamente, es la superficie creada por Galimplant y su activo más valioso debido a sus excelentes propiedades físico-químicas, que favorecen una adhesión ósea sólida y estable en el tiempo.


Nanoblast Plus® tiene como base un enfoque científico, evidencias clínicas y un fuerte desarrollo en I+D+i durante los últimos 10 años, lo que lo convierte en uno de los mejores tratamientos superficiales a nivel mundial. Una técnica que combina un chorreado de arena de grano grueso y un posterior triple grabado ácido. La técnica de arenado le otorga al implante una rugosidad macroscópica que aporta fijación mecánica, mientras que el grabado ácido proporciona a la superficie de titanio una rugosidad microscópica, suavizando las

**Otro secreto de nuestro éxito es el servicio personalizado a nuestros clientes**

Otro secreto de nuestro éxito es el servicio personalizado a nuestros clientes.

**¿Cuáles son los planes de Galimplant en cuanto a la expansión internacional?**

Galimplant tiene una clara ruta de internacionalización en mercados estratégicos, donde contamos ya con presencia en numerosos países tales como Portugal, los Emiratos Árabes, Colombia y la República Dominicana, entre otros.

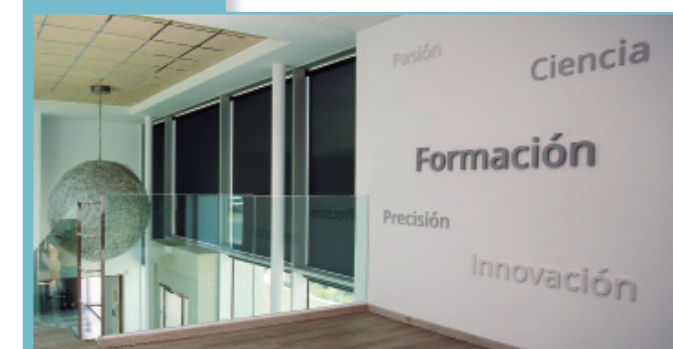

**La empresa no solo ofrece cursos de formación, sino que participa habitualmente en congresos internacionales.**

Recientemente acabamos de estar presentes en la 22ª Edición de la UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition (AEEDC), la conferencia y exposición dental más grande en el Medio Oriente, África del Norte y el sur de Asia y la segunda más grande del mundo, que tuvo lugar en Dubai los días 6, 7 y 8 de Febrero, para hacer la presentación oficial de la empresa en este país, donde cuenta con delegación.

Asimismo, actualmente estamos inmersos en la última etapa del proceso para la obtención de la FDA y así poder exportar nuestros productos a Estados Unidos, un país donde los profesionales demandan productos con una calidad como los nuestros y a un precio muy competitivo.